



新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號
● 新寶股份有限公司
免費諮詢專線：0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是新寶] <http://www.sampo.com.tw>

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

腳底按摩器 使用說明書


HL-H309

User Manual





電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	63W
機體淨重	2.33Kg	外型尺寸	L418 × W368 × H190(mm)

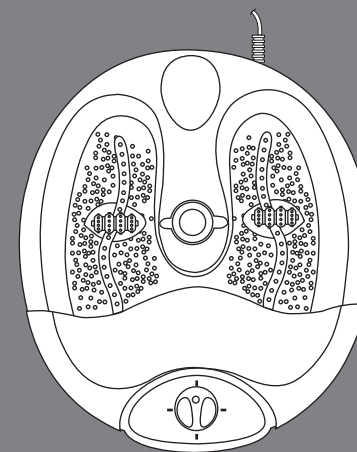

目錄


- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 3 使用注意事項
- 4 使用方法
- 5 清潔與保養
- 6 緊急處理方法

Sampo Good Health

各部名稱


- 1 上部機殼
- 2 下部機殼
- 3 按摩配件旋轉架 (四種配件可供更換)
- 4 功能選擇鈕
- 5 塑膠腳底
- 6 電源線
- 7 氣泡出口
- 8 滾輪
- 9 配件：多點按摩粒 (刺激穴道)
- 10 配件：浮石 (去角質層)
- 11 配件：軟毛刷 (潔淨肌膚)
- 12 配件：按摩球
- 13 紅外線熱力
- 14 防水蓋
- 15 配件：穴位按摩
- 16 配件：滾輪按摩

附件：說明書、保證書

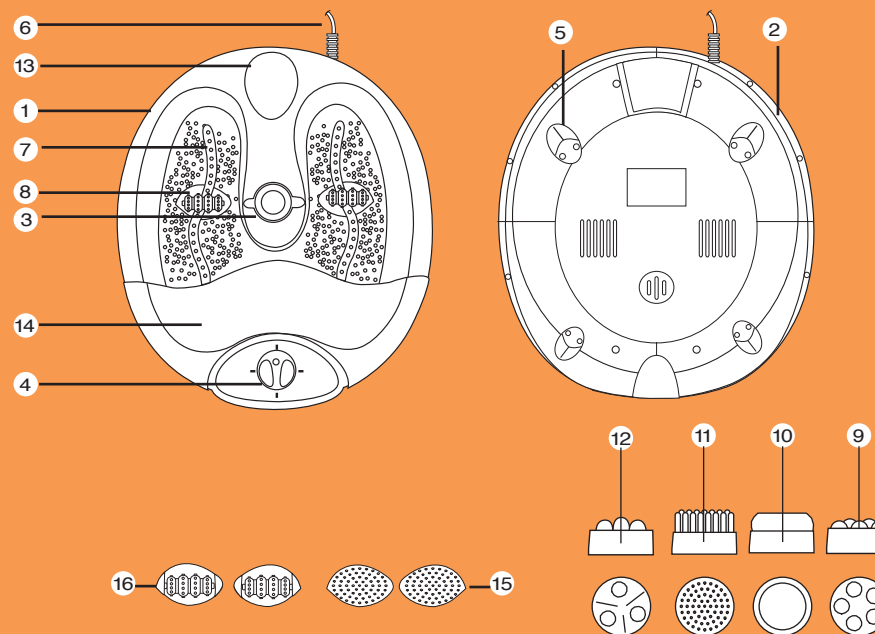

使用前安全注意事項

- 先檢查按摩器本身，電源線與插頭是否完整而無破裂或異常情況，並確認電壓是否相符合 (台灣地區為110V)。
- 每次使用完畢後，應馬上把電源關閉，並且拔出插頭。清洗或置換任何零件或配件之前，也應先把電源插頭拔出。
- 除了按摩器本身配備的配件，其他一概不得採用。
- 萬一按摩器掉入水裡，千萬勿伸手碰觸。應馬上關掉電源，並將插頭拔出。
- 千萬不要把按摩器放在浴缸或洗滌槽近處，以免不小心碰撞掉入水中。
- 請勿將按摩器浸入水裡或其他液體內。
- 雙腳還在水中時，請勿嘗試插上或拔出插頭。
- 當按摩器仍在操作時，切勿置之不理。每當有小孩使用或靠近按摩器時，宜小心督導指示。
- 切勿企圖拉扯電線以拖動按摩器。電線應避免觸及熱的表層，且不要把電線當作握柄。
- 想睡覺或打瞌睡時，皆不宜使用腳底按摩器。
- 這是一台家用的腳底按摩器，並不適合商業用途。

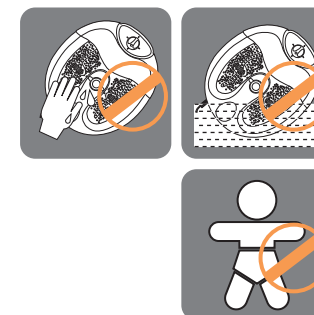



使用注意事項

- 使用之前請檢查電壓必須是110V/ 60Hz。
- 如果您的雙腳出現過敏或任何與雙腳有關的不適問題，請馬上停止使用，並且徵詢醫生的建議，才決定是否繼續使用此按摩器。糖尿病患者、孕婦或患病者，應先得到醫生的同意方可使用。
- 如果你發覺肌肉或關節持續疼痛，應馬上停止使用此按摩器，並儘早去看醫生，很可能是較嚴重病症的徵兆，請勿掉以輕心。



使用方法

註： 保溫功能只能減緩水溫降低之速度，並不能將冷水加溫成熱水，要進行溫熱按摩時需要自行加入溫水。

- 把水注入按摩器之前，必須先關掉電源及拔出插頭。
- 選擇你所要的按摩方式：
 - a. 乾式按摩 – 使用時水不必注入按摩器。
 - b. 濕式按摩 – 把溫水或冷水注入按摩器。
- 把腳底按摩器平放在您準備使用的地方，然後將水注入。最好注入溫水，感覺會較為舒服。可依個人喜好加入沐浴油，香精油或潤膚劑。
- 把腳底按摩器置放在椅子前面的地板上。
- 插上插頭，然後以順時針方向把開關上的箭頭調至你所選擇的位置。每次觸動開關或插頭時，務必先把雙手擦乾。
- 依您所選用的按摩法轉動調整鈕。
 - 0 關 / 腳底護理
 - 1 按摩 / 紅外線 / 保溫 / 腳底護理
 - 2 按摩 / 紅外線 / 保溫 / SPA / 腳底護理
 - 3 SPA / 保溫 / 腳底護理



使用方法

- 先坐在椅子上，然後才把雙腳置入按摩器內，請勿站立於按摩器上，一定要坐下才可使用，以免造成危險。
- 使用修足配件時，請置於按摩器正中央即可，雙腳向下壓，即可啟動配件。
- 附件
 - a. 多點按摩粒 – 把腳跟放在滾球上，享受舒適的按摩。
 - b. 浮石 – 能令腳跟和腳底皮膚變得光滑柔嫩。
 - c. 軟毛刷 – 清理及剝落死皮。
 - d. 按摩球 – 把腳放在按摩球上按摩，特別之按摩頭會刺激到穴道，使你享受舒適的按摩。
- 要享用更具滲透力的舒適按摩，可將腳板置於滾輪上，前後滑動滾動。要感覺按摩的效力，可將腳板時而稍為向下壓，時而放鬆即可。
- 要倒掉按摩器裡的水時，先把電源關上，並拔出插頭。把按摩器抬至洗滌槽或浴室，然後把它側向一旁，讓水從其中一個出口傾出。
- 每次使用腳底按摩器，最好不要超過20分鐘。若超時使用，按摩器可能會過熱。在這種情形之下，應馬上停止使用，並且等按摩器完全冷卻才可再使用。不宜在餐前或餐後使用按摩器。

清潔與保養

清洗

- 先拔出電插頭，等到按摩器冷卻後加以清洗。
- 把按摩器裡的水倒掉，可用水沖洗按摩器，但絕不可將整台按摩器浸入水中。接著，用一塊軟布擦淨。留意開關控制器，不要讓它觸及水或其它液體。
- 清洗後，用乾布擦乾按摩器表層。
- 可把滾軸拆下清洗，以拇指和食指夾住滾軸，然後把它拉出，放在水龍頭下沖洗。
- 切勿使用磨蝕劑、洗滌劑或清潔劑清洗腳底按摩器。
- 務必經常把按摩器的電線弄直，以免捲成一團，易造成電線損害。

存放

- 使用後應收藏在原有的盒子裡，或存放於乾淨及乾爽的地方。
- 為避免毀壞，切記不要把電線纏繞在按摩器上。
- 不可將按摩器的電線懸掛起來以支撐整台按摩器。





緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時，請立即關閉電源，拔掉插頭，儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆修，以免發生危險。

