

◎送你修理

※ 請務必填妥購買日期及蓋店章以確保應有權益

• 零件有裝飾物或鑽石等外觀之零件請勿拆卸。

• 配件如電池、螺絲、繩子等請勿拆卸。

• 天線、圓孔、圓柱、圓頭、圓頭管、圓頭、充電器、充電頭、燈光頭管、燈泡、轉角刀片及其

• 鋼筋頭請勿拆卸，並請勿拆卸內部機件。

• 本公司已申請專利之零件請勿拆卸，以免影響其保固。

• 改善之起因發生在該體積以外者（如：錄影、帶、天線...等）

• 按裝位置之靈活性或靈敏度所引起之故障或異狀

• 增自改裝商品或零件外人操作所引起之故障或異狀

• 因使用之過失或誤用錯誤，以致商品故障或異狀

• 由於天災地變或人為引起之故障或異狀

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不受免費維修

• 本產品需依說明書或說明卡之說明方法不當者，則失去保證書保證效力

• 保證書內容與製造商日期未填寫或標示或與原物不吻合，則失去保證書保證效力

• 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限依保證書所載期限半保固

※注意事項

• 保證日期

• 縱橫面

• 店址

• 電話

• 單子信箱

• 住址

• 姓名

• 出生日期

• 性別

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

• 年 | 月 | 日

聲寶3D立體電子體重計 BF-L1106ML 簡易

聲寶3D立體電子體重計 BF-L1106ML 簡易

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶3D立體電子體重計 使用說明書


BF-L1106ML

User Manual

## 特別注意要點

### 安全注意事項

- 強化玻璃承載面堅固耐用，但應避免受硬物敲擊或碰撞，以免產品受損。
- 本產品強化玻璃面應保持乾燥，避免沾水以防止秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊，以免引起玻璃損壞破碎。
- 如果體重計再開機時LCD無顯示，請考慮加大壓秤力量；如果顯示亂碼或長時間無法關機，請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於平坦堅硬且不易傾倒的地面。

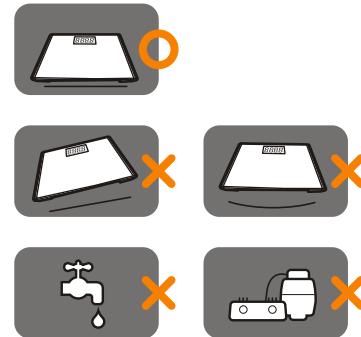


4

## 目錄

- 2 各部名稱
  - 3 使用方法
  - 4 特別注意要點
  - 5 保養方法
- 關於售後服務

## 各部名稱

- ① 液晶顯示螢幕
- ② 強化玻璃表面
- ③ 腳墊(共4個)
- ④ 電池盒(內附CR2032 鋰電池)

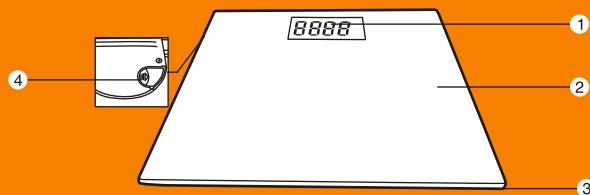


2

## 使用方法

### 使用方法

- 開始使用前請先翻轉體重計至反面，打開電池蓋，把絕緣片抽掉後，把電池盒上蓋尾端兩突點對準盒上缺口後蓋回電池盒蓋(如圖1、2)
- 接著把體重計放在堅硬且平整的地面上，若在地毯...等柔軟的表面上秤重，會影響其準確性。
- 平穩站上秤面並保持身體平衡，此時螢幕會從開機畫面轉為預設測量單位重量(如"0.0kg")，螢幕即顯示秤得體重並鎖定重量，若數秒後不碰觸秤體，螢幕顯示會消失。(如圖3)
- 約因台灣慣用"kg"測量體重，故本機測量單位僅有"kg"一種測量單位。(如圖4)
- 在秤重範圍內，允許誤差為 $\pm 0.3\text{kg}=300\text{g}$ 。
- 體重計最大載重量建議為200kg/最低載重為5kg。(注意：嚴重超載或長期壓載，容易造成磅秤損害)。

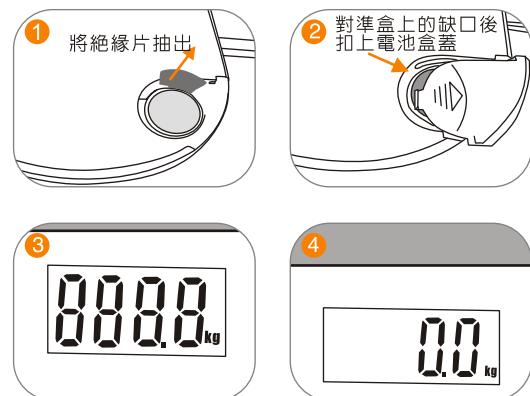


3

Simple good life, Sampo

額定電壓	淨重	使用電池
DC3V	1.48kg	CR2032 3V鋰電池
外型尺寸	W302XD302X16H (mm)	

#### ■ 廢電池請回收

- 電池報廢前應取出電池
- 取出電池前產品應切斷電源
- 應安全地丟棄電池(請依廢棄物處理法，處理廢棄電池)

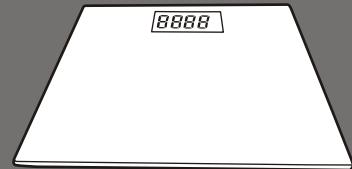


## 保養方法

### 更換電池

- 用一段時間後，當螢幕出現"LO"時，打開電池蓋，將電池按壓後再往上推後，舊電池會鬆開，再將新電池(本機使用3V CR2032 鋰電池)的 "+"面朝上裝入，裝入時先頂開盒內兩簧片後按壓往下，新電池即可固定於電池盒內，再將電池盒蓋蓋好。(如圖5)

※若在測量時螢幕出現" Err "時，代表體重計讀取錯誤，請離開體重計再重新測量。

※秤重超過150kg，LCD將顯示" Err "；電力不足時，LCD顯示" LO "，請更換電池。

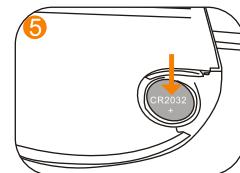

### 機體清潔

- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，因玻璃與金屬連接面不能浸水)。
- 為確保體重計的使用壽命，請勿將磅秤長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生故障。

### 關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。