




電壓	110V/60Hz	消耗功率	380W
機體淨重	2.4KG	外型尺寸	245mm x 350mm x 400mm

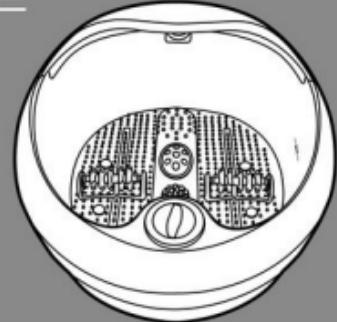


## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用前注意事項
- 4 基本操作說明
- 5 使用指南
- 7 安全注意事項
- 8 清潔與存放
- 9 緊急處理方法
- 10 家電小百科

## 各部名稱

- ① 活動大蓋(防止水濺出)
- ② 滴/倒水口
- ③ 加熱保溫圈
- ④ 氣泡槽
- ⑤ 滿水警示線
- ⑥ 紅外線
- ⑦ 大型滾動輪式按摩輪
- ⑧ 多點按摩器
- ⑨ 功能選擇開關
- ⑩ 防滑橡膠腳底
- ⑪ 電源線

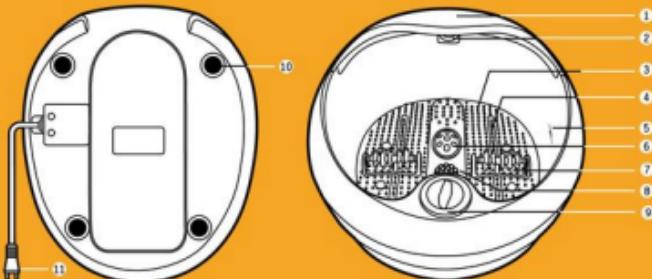

## 使用前注意事項

### 使用前注意事項：

- 使用前，先檢查腳部按摩器本體、電源線及插頭是否完整無破損或無異常情況，確認電壓是否相符（台灣地區為110V）確定其開啟在關機狀態。
- 使用後，把開關旋轉到關機位置，插頭拔離電源。
- 兒童需在成人的看護下使用（兒童不可單獨使用）。
- 本產品不可持續使用超過20分鐘，以免機體過熱。
- 如腳部按摩器電源線或電源插頭有損壞現象，請不要使用，必須連絡製造商或代理商維修或更換，以避免危險。
- 不可在浴室中使用。
- 使用本產品時，如身體產生任何痛感或不適，請停止使用，並請醫師診治。
- 如有以下情況請勿使用本產品：
  - 1.身體腫脹、燒傷、發炎或出現皮疹、潰瘍時。
  - 2.身體感到麻木及疼痛沒有感覺時。除非有醫師的指導，才可使用。
  - 3.腿部有靜脈曲張的狀況，或莫名其妙痛。
  - 4.患糖尿病、血液循環不順暢者、足部、腿部發炎或傷口未痊癒者，請不要使用。
- 足部受真菌感染、腫脹、骨折或持續疼痛者，請在醫生的指導下使用。

## 基本操作說明

### 基本操作說明

- 使用前，請先將活動大蓋依右圖箭頭指示方式裝上聽到卡聲即可，以防漏水。
- 您可選擇「乾式按摩」或「濕水按摩」功能，但當選用「乾式按摩」功能時，只能將開關轉到「M+IR」，其餘開關設定，使用時均需為有水狀態。



#### • 按摩加水

1. 加水前，請確定本體未通電。
2. 加水（適當的溫度）入按摩器，或利用按摩器獨特的「加熱」功能。

#### • 功能選擇開關

◦ OFF ..... 關（停止工作）

◦ M+IR ..... 震動按摩 + 紅外線


將開關旋至M，便可享受震動按摩的快意，此檔位適合無水按摩。

◦ H+B ..... 加熱+氣泡（此檔位一定要盛水使用）

洗完熱水澡後，使用此檔位熱水加氣泡衝擊按摩可使按摩肌肉更快得到鬆弛。

◦ H+B+M+IR .... 加熱+氣泡+按摩+紅外線（此檔位一定要盛水使用）

輕鬆享受溫水加熱、氣泡衝擊與震動按摩的全方位舒適感。

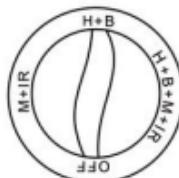

## 使用指南

### 使用指南

- 使用本產品除了「震動按摩 + 紅外線」功能外（旋扭 M+IR 位置），其餘功能必須加水使用（適合家居使用）。
- 使用時將按摩器妥善放置，確定其開關在關機的位置後，再行接入家用的110V電源上。  
冬季使用可直接加入38°C左右的溫水。
- 此腳部按摩器是根據腳的穴位分佈和骨骼的結構而設計，適合各種腳型。  
其溫度開關控制發熱線可調整水溫，保持適當的溫度。按摩粒能有效地按摩腳底各個部位。若想增強按摩強度，則由使用者自行改變腳底壓力便可。

## 使用指南

- 可自由選擇操作功能，享受腳部的按摩功效。
- 紅外線保溫按摩 / 內置的震動按摩與紅外線照射燈，對幫助血液循環有一定效果。
- 氣泡按摩熱水浴 / 最適宜完成熱力按摩後使用。這樣可使按摩肌肉更快得以鬆弛，感覺更加舒適。
- 紅外線氣泡按摩加熱 / 腳部按摩器內置發熱裝置加熱水溫，使用20~30分鐘後，水溫可上升至40°C~42°C此時水溫不再上升，保持恆溫狀態。
- 大型滾動軸式按摩輪 / 配合大型滾動軸式按摩輪腳底來回迅速滾動，可按摩穴位神經。

紅外線保溫按摩



氣泡按摩加熱水浴

紅外線氣泡按摩  
熱水浴

大型滾動軸式按摩輪



## 安全注意事項

## 安全注意事項

- 請勿站立於腳部按摩器內或將其它重物放入其中及使用外力使按摩輪長時間無法轉動。
- 不要利用電源線來拖動腳部按摩器，以免引起電源線損傷。
- 不要將60°C以上的熱水直接倒入，以免溫度過高灼傷皮膚。
- 每次使用後，切記關閉開關並拔下電源插頭後才傾倒盛水和清潔，以免觸電。
- 清潔腳部按摩器時，絕對不能將整個按摩器浸入水中或其它溶液中。
- 在使用或存放腳部按摩器時，切勿將它倒扣起來或掛起來，應放在平面上存放。
- 請由溢/倒水口倒水，嚴禁由功能選擇開關處倒水。
- 請勿在浴室或戶外使用本產品。
- 電源接通後，不得讓本產品無人看管。不用時，請拔掉電源。
- 所附配件只適合用於此產品，不得使用未經廠家推薦的配件，以免危險。
- 在無人照料時由兒童或老人單獨使用，可能會發生危險。
- 想睡覺或困倦時請勿使用。
- 使用時只能採用坐姿，請勿採其他姿勢使用。



### 清潔與存放

- 使用完畢後，將盛水槽部份洗滌乾淨，清潔前應先關閉電源並拔除插頭。絕不可將整部腳部按摩器浸入水中清洗。
- 握住按摩器的邊緣將水由溢/倒水口倒水，嚴禁由功能選擇開關處倒水。
- 用水與溫和的清潔液對按摩器進行清洗，然後抹乾，尤其在使用精油後。
- 不要使用腐蝕液或高濃度清潔劑清洗按摩器。
- 請用柔軟的布直擦拭按摩器。
- 不使用時，請將按摩器放置在安全、陰涼通風處存放。
- 收藏時，電源線要拔離插頭，並將電源線妥善收好(不可使用電源線作懸掛用)。

### 售後服務

#### 緊急處理方法

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。

若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

送修前，請先連絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服中心會協助處理。

絕對不要自行拆開外殼進行修理。

#### 進口商：

- 名稱：東富電器股份有限公司
- 地址：台南市安平工業區新忠路11號
- 電話：（06）2645207 · 2617105

 生活小常識

腳底有許多重要穴道，如適當以溫水泡腳，可促進新陳代謝，加強體內循環，此時可輔以不同種類之精油：

精油種類	功效	精油種類	功效
茶樹	抗菌除臭	迷迭香	提神、潤膚
桉樹	軟化肌膚	玫瑰	促進血液循環
薄荷	促進血液循環	檸檬	排水
薰衣草	舒緩、安眠潤膚	百里香	排水排毒

注 意：泡腳機若加入精油搭配使用，使用完畢後務必清洗乾淨，否則長期下來，恐因殘存的精油影響機體正常運作。

清洗方式：傾倒已加入精油之泡腳水後，再加入清水，將機體運轉設定轉至「H+B+M+IR」，為時約10~15分鐘，機體會自動清洗。反覆進行此動作數次(視機體髒污程度)，再以潔布拭淨、倒置機體即可。

...更多選購指南、生活常識之家電小百科 [歡迎登錄>>](#)

[www.sampo.com.tw](http://www.sampo.com.tw)

