

User Manual

ME-D802WL

纖形按摩器使用說明書

SAMPO


並要求經銷商填寫日期，以確保您的權益
請向產品發行保證書，請勿撕毀時注意索取

電壓 | 消耗功率 | 機體淨重 |
AC110V/60HZ 25W 900g

外型尺寸 |
W240xD120xH160(mm)


各部名稱

- ① 電源開關
- ② 按摩握把
- ③ 電源線
- ④ 紓壓式紅外線布套
- ⑤ 點壓式按摩頭
- ⑥ 推壓式按摩頭

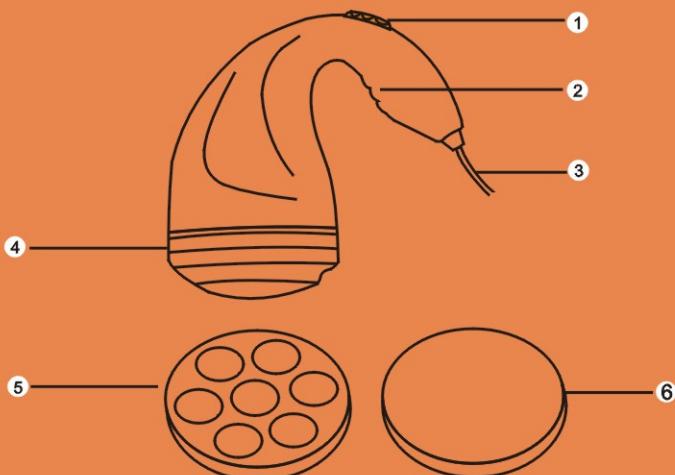


使用方法

建議使用部位

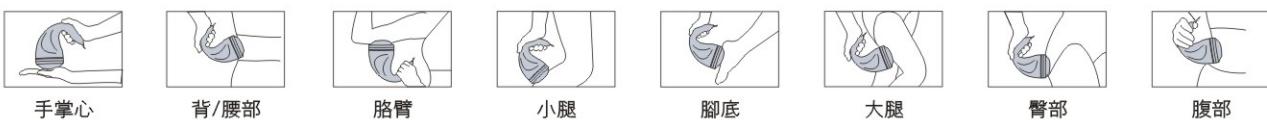

使用說明



- 請將電源線插入家用插座中(110V)。
- 將電源開關依順時針方向旋轉，並調整強度。
- 將塑身按摩器放置於欲按摩之部位上即可。
- 無段式按摩強度微調效果：
本機開機後，可依旋轉鈕調整方向設定按摩強度：順時針方向漸強，逆時針方向漸弱。

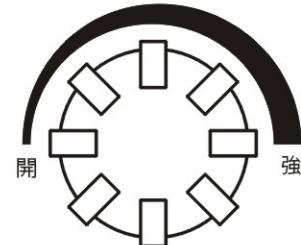

- 遠紅外線溫熱效果：
啓動1~2分鐘後，產生溫熱之遠紅外線效果，可促進血液循環順暢，達到按摩與消除疲勞的功效。(拆卸式布罩可清洗替換)

- 2種按摩頭可置換：
使用者可依個人需求選擇按摩模式(更換按摩頭時必須先將電源關閉，並打開按摩布罩)：
推壓式按摩頭-使用(圖一)按摩頭，利用推壓震動特性，舒緩肌肉酸痛與疲勞。
點壓式按摩頭-使用(圖二)按摩頭，利用按摩球震動特性，可促進血液循環。

- 符合人體工學設計：
流線形彎腰握把，可輕鬆使用於身體欲按摩之部位。

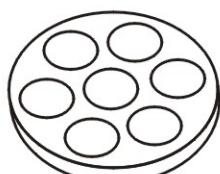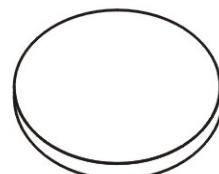

(圖一)

(圖二)

常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處理方法
開機後不工作	電源插頭未插牢	重新插牢電源插頭
開機後不工作	沒有開啟電源	將電源開關順時針方向旋轉
開機後有異音	有異物跑進本機裡	打開布罩拿出異物
開機後有異音	可換式按摩頭安裝不當	將按摩布套拆開重新安裝可換式按摩頭
突然停止工作	使用時間過長	關閉電源並讓本產品休息半小時後再使用
布套破損	被銳利異物損傷	更換布套新品

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解、修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。

售後服務商：禾亞實業有限公司
地址：台中縣大里市瓦瑤路56巷6號
售後服務專線：04-24180315

Simple good life, Sampo