

User Manual

音波電動牙刷使用說明書

TB-B802L

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁
購買時請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

TB-B802L

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名

出生日期

男 女

電話

住址

電子信箱

購買日期

經銷商

店址

電話

謝謝您的惠顧

※注意事項

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

▽ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託：穩聯國際企業有限公司 服務專線：(02) 2996-0865
- ※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障原因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）

聲寶股份有限公司 • 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] 穩聯國際企業有限公司 台北縣新莊市建興街16號 服務專線：(02) 2996-0865


電源	四號電池x 2 (3V)	功率	2W	振動頻率	31000次/分鐘
外形尺寸	206(高)mm x 31(長)mm x 27(寬)mm			機體淨重	50g

各部名稱

- A** 刷頭 **D** 機身
B 開 **E** 電池(本產品不附電池)
C 關 **F** 底蓋

使用安全注意事項

- 爲了您的健康,請每三個月更換一次刷頭
- 本產品具備防水功能,但切勿將牙刷長時間浸泡於水中
- 當產品轉速變慢時,請更換新電池
- 請勿自行拆修,避免發生危險

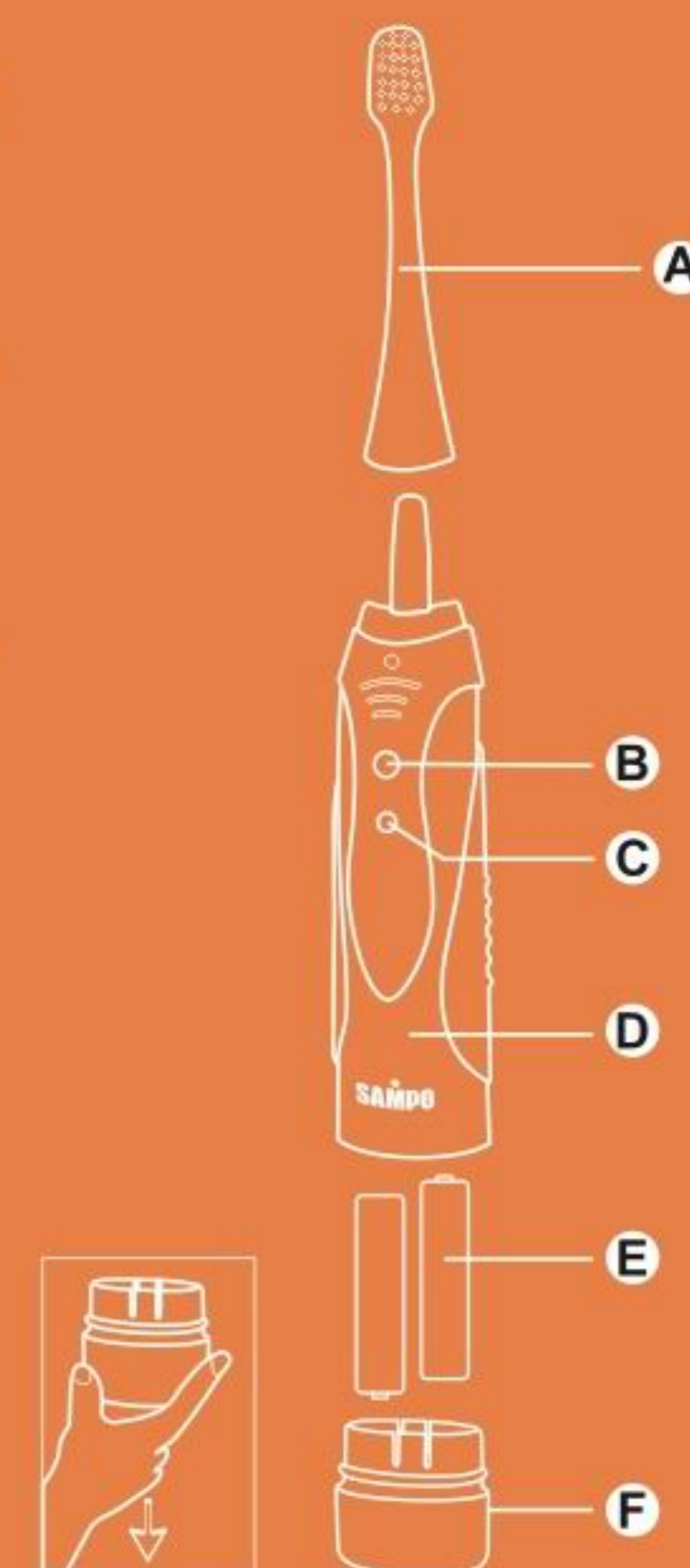

使用說明

主要功能說明

- 有效清潔牙齒。
- 高頻振動的刷頭可節省時間與力氣,牙膏的微泡沫能瞬間滲透,有效清除牙菌斑和牙結石。
- 高頻振動產生的振動波可以按摩牙齦,促進血液循環,刷毛覆蓋緊貼牙齒表面及隙縫,均勻而徹底地清潔牙齒的每個部位。

使用壽命規格

- 電池:每天使用2次,每次使用2分鐘,可持續使用40天。
- 刷頭:正常使用壽命爲三個月。
- 牙刷體:正常使用壽命2年。

性能或特性規格

- 刷頭高頻振動,振動頻率爲31000次/分鐘,使用過程中如刷身微微發熱,屬正常現象,不影響其功能與使用。

附屬品

- 無

關於售後服務

- 若發生故障,請立即停止使用,並將電池拆除。若在故障狀態下繼續使用或自行維修,均可能發生危險。
- 送修前,請先撥售後服務專線:02-2996-0865諮詢,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。
- 絕對不要自行拆開外殼進行維修。

委製商資訊

委製/進口商:穩聯國際企業有限公司
售後服務專線:(02)-2996-0865