

型號: 603F

遠紅外線 按摩器



使用說明書



TAPPING MASSA™
Massager with Far
Infrared Heater

Instruction Manual

Model: 603F

感謝您購買愛奧樂603F遠紅外線按摩器，使用前請仔細閱讀此使用手冊，以便能妥善操作此按摩器。

特 性

- 可用於頭下各個部位
- 敲擊式按摩，遠紅外線放射，熱能輻射烘烤，促進血液循環，使您迅速解除疲勞，恢復體力。
- 使用及攜帶方便
- 可選擇2種敲擊頻率及力度，選擇遠紅外線（熱）的啓動（開關），以上幾種功能可單獨或同時使用。

重要安全指示

當使用一種電器產品時，須遵守該產品的相關安全使用要求。因此，使用前請先閱讀所有相關說明。


危險性——爲了降低危險性，請必須遵守以下幾點：

1. 使用前須先查看所使用的電源是否合乎要求。
2. 請勿在身體沾水的情況下使用
3. 請勿放於潮濕的環境中（如浴室），以防電子元件受潮，影響功能。

警告——爲了避免火災，燙傷及人體受傷，請必須遵守以下幾點：

1. 按摩器插上電源時，請勿離開；若停止使用時，請關掉電源（將推鈕推至OFF檔，後再拔掉插頭）。
2. 兒童，病人或殘疾人使用該產品時，必須有人協助或督導。
3. 使用此產品時，須遵守此產品操作說明。
4. 當產品之電源線或插頭損壞，進水，墜地致毀或因其它原因無法正常運行時，請勿再使用。應送回維修中心檢查維修。
5. 請將電源線遠離過熱的物體。
6. 請勿在睡覺或打盹時使用本產品。
7. 請勿在棉被或枕下使用該產品，以免過熱引發火災。
8. 請勿塞任何物體在按摩頭部，以免阻滯機器運行，破壞內部結構。
9. 切勿靠近身體敏感部位或易受傷部位（如眼睛，心臟等）。
10. 請在使用時握住產品手柄，勿將電源線當成提手，以免損壞線路。
11. 請勿將按摩器直接集中在人體某部位超長時間按摩，此產品設計用于持續移動，須經常改變按摩部位。
12. 使用時將按摩頭輕觸身體，請勿大力按壓在身上。
13. 此產品設計爲家庭個人使用。

部件名稱和功能

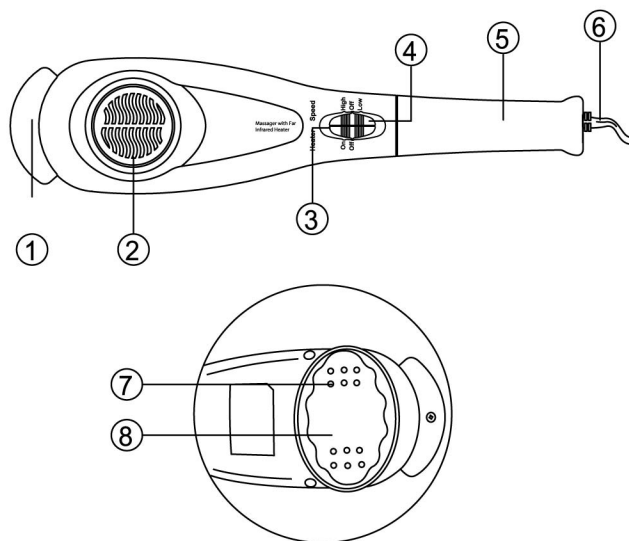

- 1) 按摩扶手
- 2) 發熱通風罩
- 3) 熱風開關鈕
- 4) 調速開關鈕
- 5) 握柄
- 6) 電源線
- 7) 按摩頭出氣孔
- 8) 按摩頭

外加按摩頭

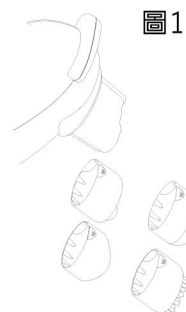


圖1

(A) 另備有四個按摩頭，可根據不同需求享受到五種不同的按摩體驗。



圖2

(B) 插入按摩頭（如圖2所示）。

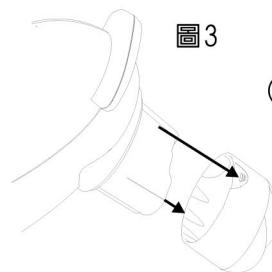



圖3

(C) 按住兩側按鈕，拔出外加按摩頭（如圖3所示）。


操作步驟

1. 使用前先檢查開關鈕是否停留在OFF檔
2. 確定開關鈕在OFF檔位後，將電源線插到符合產品規定的電源插座上。
3. 當您感覺身體某部位疲勞，疼痛，酸軟無力時，將按摩頭靠近此部位做短時集中按摩。如圖所示


按摩部位圖示：

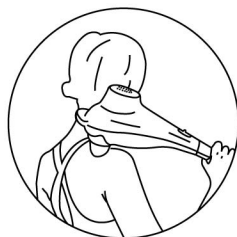


肩膀按摩

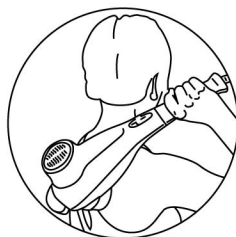


背部按摩

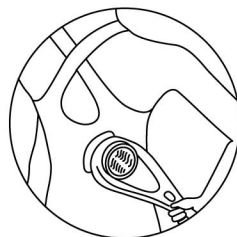


腰部按摩

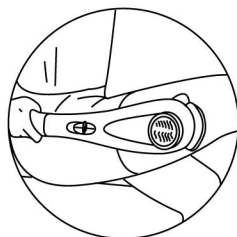

大腿按摩

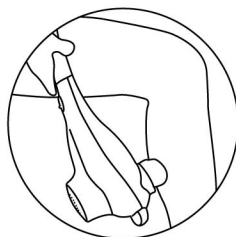

小腿按摩

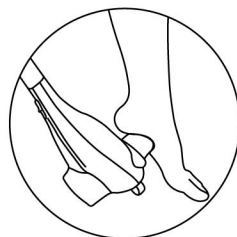

足部按摩

4. 若需要使用紅外線放射及熱能輻射功能，請將熱風開關鈕推至"ON"位置，此時遠紅外線功能啟動。
5. 以站姿，坐姿，或臥姿使用，手握住按摩器，推動按摩器調速開關鈕至所需檔位（LOW低 或HIGH高）
6. 您也可以用手握住按摩器做全身移動按摩，使用中可隨時方便地更換按摩力度檔位。
7. 結束按摩時，請將2個開關鈕推至OFF檔位，將電源插頭拔掉方可離開。

注意：此產品建議個人使用時，最長使用時間勿超過30分鐘；若需要繼續按摩，請停止片刻再重新啟動。

維護

清潔———拔掉電源插頭，待按摩器表面溫度降低，使用柔軟的濕布擰干後擦拭，請勿讓水進入按摩頭及開關鈕等活動部位：

- 清洗後，請用乾布擦淨按摩器表面。
- 請勿使用腐蝕性清潔劑清洗按摩器。
- 經常整理電源線，以免糾纏成結。

收藏———拔掉電源插頭，待按摩器變涼：

- 擦拭後放入乾燥的盒內。
- 請勿將電源線亂放，須整理好後收起。
- 收藏時請平放，勿懸掛，以免墜地損毀。

維修——提醒廣大用戶，勿自行拆開修理，如發生故障，
請送專業維修站檢修。若自行拆卸致損，則不
在保修之列。

規 格

產品尺寸：450x97x128mm

產品名稱：遠紅外線按摩器

產品型號：603F

震動頻率：2000~4000轉

紅外線溫度：50~60℃

電力消耗量：AC 230V~50Hz 120W

重量：約1.2KG

生產商：愛奧樂醫療器械（深圳）有限公司

地 址：深圳市龍崗區盛平第二工業區工業二路6號3棟

服務電話：8008309390

執行標準：GB4706.10-2003