



電壓	消耗功率	生產國別
110V a.c. 60Hz	13W	中國
外型尺寸	機體淨重	
W365 X D120 X H110(mm)	1.1kg	




## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 安全注意事項
- 5 產品特點
- 6 使用方法
- 8 清潔方法
- 9 緊急處裡方法
- 10 關於售後服務
- 11 家電小百科

## 各部名稱

- ① 圓形按摩頭
- ② 針狀按摩頭
- ③ 热敷按摩頭
- ④ 強弱推鈕
- ⑤ 本體
- ⑥ 開關/功能推鈕
- ⑦ 發熱點
- ⑧ 黏扣帶
- ⑨ 拆解組合鈕
- ⑩ 電源線固定槽
- ⑪ 手把
- ⑫ 電源線

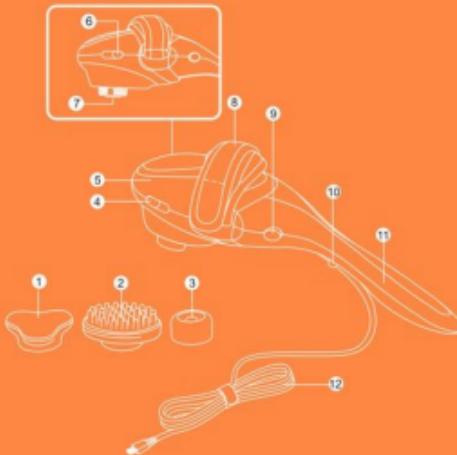

## 安全注意事項

- 請用電壓110V 7A（含）以上之插座。
- 請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電情形。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起，以節能與避免走火意外。
- 本產品提供一般家庭使用，請勿做為商業及其他用途。



## 安全注意事項

- 建議由低速開始，有需要時，再逐漸增加速度。
- 建議本產品使用於身體同一部位時，請勿超過10分鐘。
- 懷孕期間切勿使用本產品，同時也要避開傷口處，以免造成意外。
- 用餐後，一小時內請勿使用本產品。
- 孩童或殘障人士使用時，應有成人在旁邊監督。
- 本產品禁止在頭部以上及骨頭關節部位使用，以避免使用傷害。
- 長髮使用者請將頭髮束起再使用，避免頭髮捲入發生危險。
- 請勿在過敏皮膚處過度按摩或身體不適時使用本產品，若您有疑慮，使用前請諮詢醫生的意見。
- 使用前請先檢查機器是否有破損或故障後再使用，如有破損或異常狀況請勿使用。
- 若電源線損壞時，必需由原製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

## 產品特點

- 可拆/裝式手持按摩器。
- 按摩/熱敷功能。
- 弱.....強，無段開關，方便使用。
- 三組按摩頭，不同按摩效果。




1.本按摩器提供圓形按摩頭、針狀按摩頭、熱敷按摩頭三種按摩頭以供使用者選擇，使用者可依需求更換，更換時請務必關閉電源，更換方法依逆時針方向拆卸，順時針方向裝上。注意：沒有裝配熱敷按摩頭請勿使用熱敷按摩功能，請務必先換上熱敷按摩頭再使用（如圖一），使用後，請勿以手直接碰觸到加熱點（如圖二），以避免燙傷。

2.本按摩器可選擇手持或手握，將插頭插入插座，依（圖三）將手掌伸進機體黏扣帶，依個人手掌大小，調整黏扣帶鬆緊度後使用。如需要使用手把時（一般使用於背部），依（圖四）請將手把卡勾對準機體溝槽，稍加施力聽到“喀”聲後，依（圖五）將電源線置入固定槽，即可以手把操作使用，使用前請注意手把與機體確實卡緊。如需手持請依（圖六）按下拆解組合鍵，將本體與手把分離即可。

3.推動開關以啓動機器使用（如圖七），本按摩器可調整強弱推鈕，以調整適合的按摩與熱敷強度（如圖八）。

4.把機器使用在想要按摩的身體部位如手臂、小腿、大腿、腰部、肩部、背部(部位示意圖一、二、三、四)，使用時保持舒適，若肌膚或身體感覺不適，請停止使用。

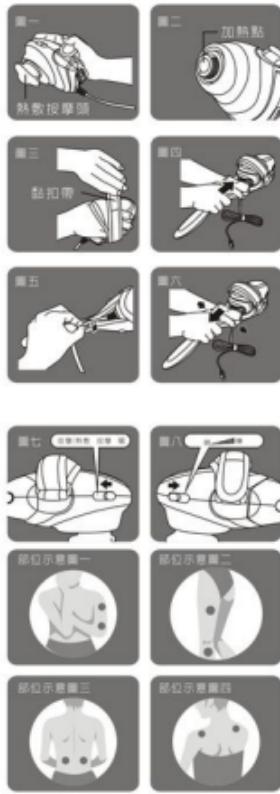

## 清潔方法

- 使用完後與清潔前，請先拔除電源插頭。
- 請勿在機體上使用萃、稀釋劑或其他具腐蝕性溶劑。
- 請使用棉質布料沾清水，輕拭本產品。
- 使用熱敷功能後，至少須要等待30分鐘以上，才可清潔加熱點。
- 切勿讓異物沾污按摩頭螺紋處與加熱點，以避免意外的發生與保障產品使用壽命。
- 請勿將本產品儲放在潮濕、高溫或火源附近。
- 請勿將本產品長時間放在太陽直射的地方。
- 請勿以任何方式拉扯電源線，以避免意外的發生與保障產品壽命。
- 請勿讓任何液體滲入機體。

## 緊急處理方法

- 本電器如有冒煙或起火現象，請儘速將插頭拔掉，並送回經銷商或廠公司修護。

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡客服0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 進口商：東富電器股份有限公司  
地址：臺南市安平工業區新忠路11號  
電話：06-2617105

## 家電小百科

### 生活小常識

#### 如何減輕肩膀酸痛

- 肩膀酸痛時，除了身體會不舒服，更會影響工作或讀書效率。
- 消除肩膀酸痛的有效穴道，乃是位於大拇指和食指之間的「合谷穴」，及位於手背上食指和中指中間的「頸頂點」。如果用手指或筆頭刺激合谷穴和頸頂點（如下圖所示），肩膀酸痛能減緩許多。



...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



血海篇三



營商股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頭湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-統統-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>