

User Manual


聲寶肩頸按摩器

ME-D1003HL

SAMPO

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期，以確保您的權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

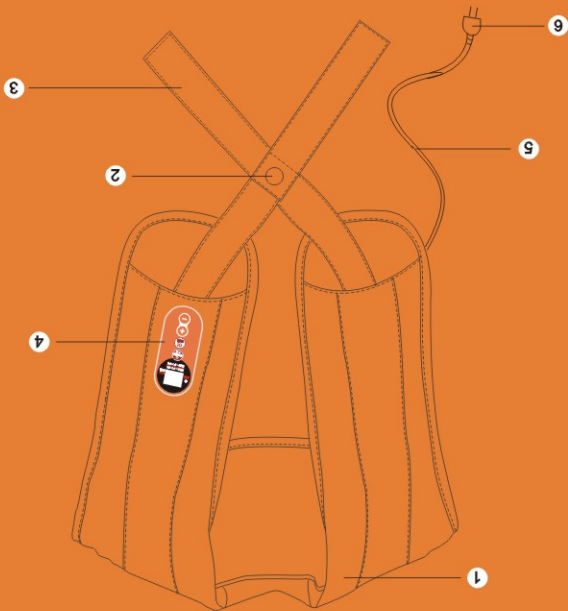


- 各部名稱
- ① 按摩組件
 - ② 固定鈕釦
 - ③ 把手
 - ④ 控制面板
 - ⑤ 電源線
 - ⑥ 電源插頭

電源	AC110-60Hz
消耗功率	45W
機體淨重	2.8kg
外型尺寸	W600xD460xH100(mm)

使用說明

- 將插頭插入電源插座，再將產品環繞於需要使用的部位，並確保安全舒適。
- 按壓控制面版電源開關，開機預設值(F1-輕柔舒適，P1-力道最弱)，依序按壓選擇喜好的模式(F1-輕柔舒適，F2-定點放鬆F3-筋骨舒暢，F4-節奏減壓，F5-全方位槌打)。
- 按壓增強"+"或減弱"-鍵，選擇喜好的按摩力道，(P1~P8)。
- 按壓加熱鍵(加熱燈即亮)時，具有局部熱敷效果。
- 欲停止使用時，請按電源開關鍵，螢幕顯示"OF"。
- 使用15分鐘後自動關機。

控制面板

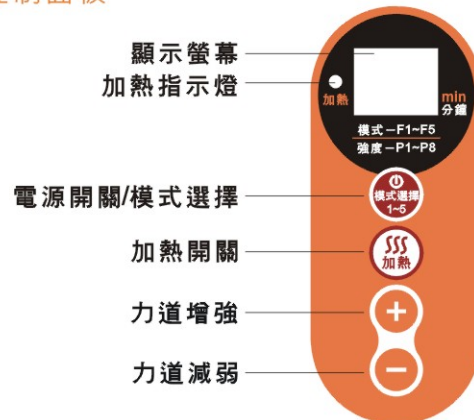

安全注意事項

- 建議每次按摩時間，請勿超過15分鐘。
- 在按摩時若感到不適，請立即停止使用並尋求醫療諮詢。
- 使用中有任何異狀，請立即停止使用。勿嘗試自行拆卸。
- 每次使用完畢或清潔前，請關閉電源並拔除插頭。
- 本產品建議以乾布擦拭清潔，勿以其他任何方式清潔，以免導致故障。
- 長時間不使用，請拔除插頭並以防塵套覆蓋。
- 請勿放置在陽光直射、高溫或高度潮溼的地方。
- 切勿在洗澡或淋浴時使用本產品。
- 勿將產品放在靠近浴缸或水槽的地方。
- 如果不慎將水潑灑在產品上或泡水，請立即關閉電源並拔除插頭，以免觸電。
- 為避免過熱，請勿將產品置於枕頭或毯子下操作。
- 身心功能障礙者、傷殘者、孩童使用本產品，須有旁人周全的指導。
- 請勿在室外、使用噴霧或充滿氧氣的場所使用。
- 勿用潮濕的手接觸電源插頭，以免觸電或導致機件故障。
- 拔除電源插頭時，切勿拉扯電線。
- 請勿將電源線纏繞於產品上或置於重物之下，以免電源線受損而導致觸電或電線走火。
- 電源線或電源插頭破損時，切勿繼續使用。
- 請勿拖拉電源線或是將電源線當作握把使用。

常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處理方法
無法啟動	電源插頭未插牢	將插頭安全插上
無法啟動	電源開關沒有開啓	請啟動開關鍵
開機後有異音	內部零件故障	連絡送回經銷商
產品突然停止	使用時間過長，過熱保護裝置啟動	拔下產品電源插頭，並讓產品冷卻休息約30分鐘左右
產品突然停止	電源插頭被拔離或鬆脫	將插頭安全插上
產品突然停止	誤按開機按鈕	請重新啟動開機
產品突然停止	預設使用時間15分鐘已到	若您還想再按摩一次，請再次按下開關鍵

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。

售後服務商: 禾亞實業有限公司
地址: 台中縣大里市瓦磘路56巷6號
售後服務專線: 04-24180315