

User Manual

ME-D810GL

舒壓按摩墊使用說明書

SAMPO


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期，以確保您的權益

電壓	消耗功率	機體淨重
AC110V-60Hz	30W	2500g

外型尺寸
W400xD95xH290(mm)

各部名稱

- 1 兩組指壓按摩頭
- 2 鬆緊帶
- 3 保險絲
- 4 兩段式電源開關
- 5 電源線
- 6 發泡體
- 7 合成塑膠皮套

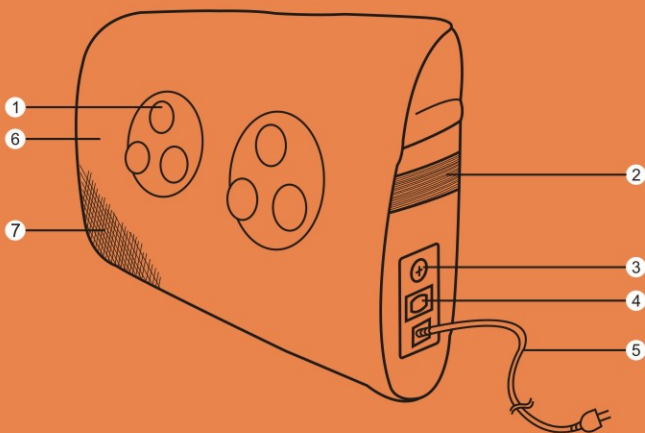

建議使用部位



使用說明

- 請將電源插頭插入家用插座中(110V)。
請將紓壓按摩墊放至於欲按摩之部位上(可利用本按摩墊背面的鬆緊帶，固定於座椅上)。


- 兩段式按摩強度選擇：
開啓兩段式電源開關，I為弱速，按摩力道較小且按摩速度較慢，II為強速，按摩力道較大且按摩速度較快，○則為關閉電源。
本產品可以依照個人需求調整按摩強度，針對身體各酸痛處按壓，促進新陳代謝。

- 符合人體工學設計：
完全貼合腰部曲線，可使坐姿更挺直舒適，紓緩在辦公室長時間工作引起的背腰部肌肉疲勞感，也可輕鬆使用於身體其他欲按摩之部位。

- 建議使用時間：
本產品建議使用時間為30分鐘，須連續使用時需要間隔15分鐘後再繼續使用。

- 使用完畢後，請關閉電源開關，且拔除電源線(切勿拉扯電源線)。

- 清潔方法：
本產品如遇髒污時，請用乾淨的溼布沾清水擦拭即可(不可卸下布套水洗)。

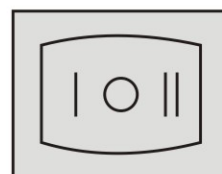

弱 停 强

常見故障及處理方法

故 障 現 象	可 能 原 因	處 理 方 法
開機後不工作	電源插頭未插牢	重新插牢電源插頭
開機後不工作	沒有開啓電源	開啓電源
開機後不工作	保險絲斷開	更換保險絲
突然停止工作	內部過熱保護	關閉電源並讓本產品休息半小時後再使用

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。