

電源 | 110V 功率 | 4W 轉速 | 9800 轉/分鐘

外形尺寸 | 243(高) x 105(長) x 48(寬) 機體淨重 | 450g

各部名稱

- A 刷頭
- B 開
- C 關
- D 刷頭放置盒
- E 機身
- F 指示燈
- G 充電器



使用說明

主要功能說明

- 有效清潔牙齒。
- 高速左右轉動的刷頭可節省時間與力氣，牙膏的微泡沫能瞬間滲透，有效清除牙菌斑和牙結石。
- 高速轉動產生的振動波可以按摩牙齦，促進血液循環，刷毛覆蓋緊貼牙齒表面及隙縫，均勻而徹底地清潔牙齒的每個部位。

使用壽命規格

- 電池：每次充滿1次電，每天使用2次，每次使用2分鐘，可持續使用5天，電池循環使用壽命2年。
- 刷頭：正常使用壽命為三個月。
- 牙刷體：正常使用壽命2年。

性能或特性規格

- 刷頭左右轉動、轉速為9800轉/分鐘。

附屬品


- 充電器x1 刷頭x4 掛鈎x1 螺絲x2

關於售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電池拆除。若在故障狀態下繼續使用或自行維修，均可能發生危險。
- 送修前，請先撥售後服務專線：02-2996-0865諮詢，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。
- 絶對不要自行拆開外殼進行維修。



產品充電

- 第一次開始使用本產品前，至少給產品充電16小時；
- 充電前確認產品已關掉開關；你可以將牙刷放在充電器上連續充電。
- 為了延長電池的使用壽命，每6個月重覆以上程序一次。
- 當電池開始充電時，綠色的指示燈亮起。

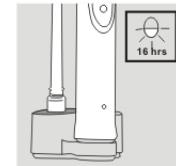

產品使用

- 將牙刷頭裝在刷身上。
- 將牙膏擠到刷毛上，沾上一些水。
- 將牙刷頭放入你的口中。
- 按下“開 (ON)”按鈕，開始刷牙。將刷頭輕輕靠住牙齒，慢慢移動到牙齒的不同部位，2分鐘後，牙齒將被徹底清潔乾淨。

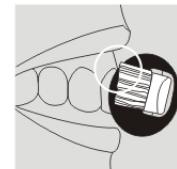
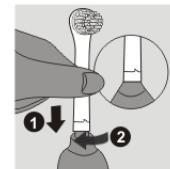


2

使用說明




清潔儲藏

- 按下“開 (ON)”按鈕，在水龍頭下用冷水（水溫不超過60°C）沖洗刷頭。
- 按下“關 (OFF)”按鈕，取下刷頭，用水沖洗內面。
- 再按下“開 (ON)”按鈕，沖洗傳動連接軸內殘餘的牙膏。
- 將刷頭儲藏在充電器背後的刷筒內。
- 用濕布將充電器擦乾淨。清潔前，請拔掉電源插頭。

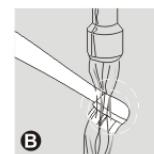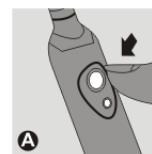

替換刷頭

- 為了達最好的清潔效果，建議每3個月更換一次刷頭。
- 當刷毛向外彎曲時，必須更換刷頭。
- 你可以在你原先購買牙刷的商店買到新的刷頭或與經銷商連繫。

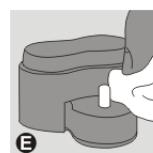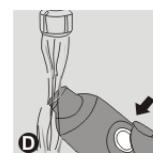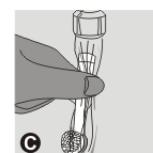

委製商資訊

委製/進口商:穩聯國際企業有限公司
售後服務專線:(02)-2996-0865