



數字體溫計使用說明書

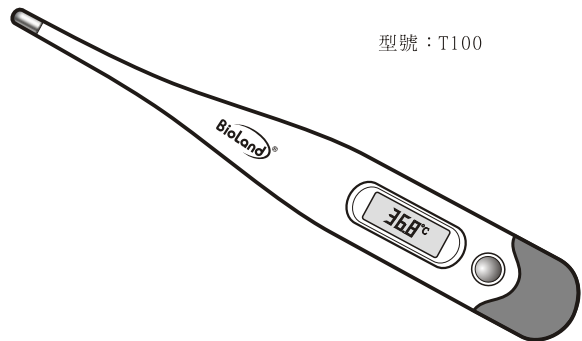

型號：T100

使用該體溫計前請仔細閱讀以下說明。

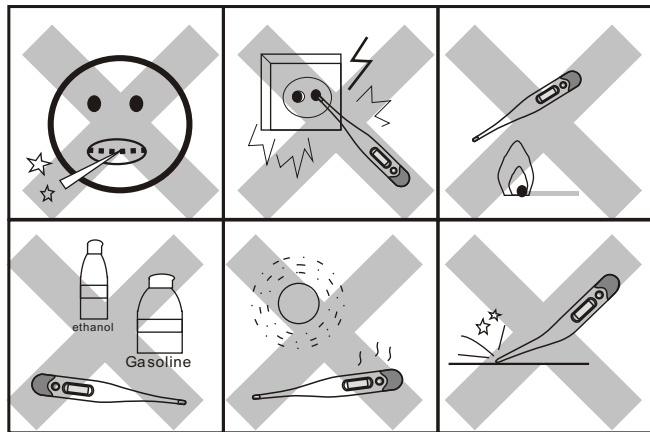

警示！



慎防小孩誤食或玩弄電池！

電池的安裝與使用：

該體溫計要求使用一枚LR-41(或AG3)型電池，該電池可允許1000次左右測量。當顯示屏上出現“▼”符號時，將需要更換同型號的新電池。

重新更換電池請按以下步驟：拉開電池蓋部分並取出已經沒電的電池（依下圖A、B步驟）並更換新電池。

注：廢棄電池必須按當地相關法律法規妥善處理。

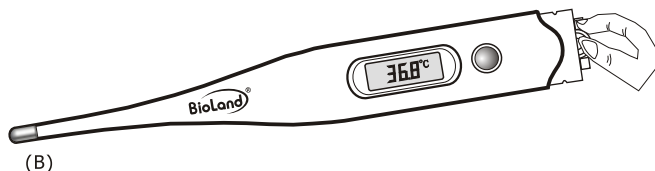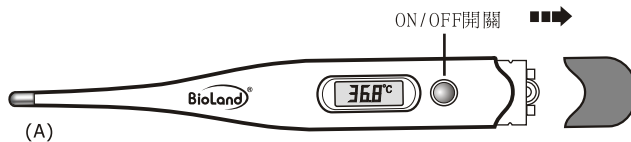

(C) 低電符號

(D)

(E)

使用方法：

- 按ON/OFF鍵開啓體溫計。
- 開機後LCD顯示屏上出現“188.8°C”約2秒鐘。
- 開機後顯示屏上最後測量的讀數顯示約2秒鐘後出現“L°C”符號。
- 當符號“°C”不斷閃爍時表示測量正在進行，當溫度在16秒內變化 $<0.02^{\circ}\text{C}$ 時，符號“°C”停止閃爍表示測量完成。
- 當測量溫度 $>37.5^{\circ}\text{C}$ 時，溫度計發出“Bi...Bi...Bi...”提示音，持續4秒，當測量溫度 $\leq 37.5^{\circ}\text{C}$ 時，溫度計發出“Bi...”提示音，持續4秒。
- 測量後請將體溫計妥善收藏。

肛溫的測量方法：

- 將體溫計的探頭端輕輕插入直腸數毫米深處。若在插入時感到任何不適請立刻停止繼續插入。
- 若想為新生兒、嬰幼兒測量肛溫，請將小兒仰臥在較堅硬的床上，抬起他們的雙腿並與身體保持90度的角度，這樣以防在測量時他們翻身。請記住幼兒的體內溫度總是比體表溫度有稍微的偏高（約 0.5°C ）。
- 測量後，請別忘關機。（如果您忘記關機，本機將在10分鐘後自動關機）。

口腔溫度測量方法：

- 測量前口閉上3~5分鐘，將探頭感溫端放入口腔舌頭下面的熱點位置，閉上嘴巴。聽到提示音後，取出讀取溫度數據，口腔溫度通常會比體表溫度稍微偏高（約 0.3°C ）。

腋溫的測量方法：

- 請將探頭端夾於腋下，並夾緊手臂防止滑落。聽到提示音後，取出讀取溫度數據。

警示：

- 首次測量和每次使用後，請用濕紙或濕巾進行必要的清潔和適宜的消毒處理。
- 確保不要浸入水或其它任何液體中。
- 體溫計不可做為玩具，請妥善放置在小孩不能觸及的安全地帶。
- 給小孩測體溫時必須由成人現場測量。一旦發現體溫偏高，請及時請教醫生。該體溫計可迅速測量 $32^{\circ}\text{C}\sim 42^{\circ}\text{C}$ 範圍內的體溫。
- 體溫計必須存放在室內乾燥的地方。（其適宜的存儲溫度為 $-25^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$ ，溫度為95%以下），必須遠離熱源，避免陽光直射。
- 避免在強的電磁場中使用該體溫計。

合
格
證

本產品經本公司品質保證部
門檢驗，產品符合技術標準

中國公司：愛奧樂醫療器械（深圳）有限公司
地址：深圳市龍崗區盛平第二工業區工業二路6號3棟
授權生產：深圳市興旺實業有限公司
生產許可證號：粵藥管械生產許20010219（更1）號
標準號：YZB/粵0517-2004 FDTH-V1,V2
注冊號：粵食藥管械（準）字2005第2200356號

郵編：518172
電話：0755-28961218
0755-28961318
傳真：0755-28962868