

# User Manual

BF-L1105ML

聲寶大視窗體重計 使用說明書

SAMPO

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益  
保證書印製於說明書最後頁

聲寶大視窗體重計 BF-L1105ML 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

|      |      |   |    |   |    |      |  |    |  |    |  |  |  |  |  |
|------|------|---|----|---|----|------|--|----|--|----|--|--|--|--|--|
| 姓名   | 出生日期 |   | 電話 |   | 住址 |      |  |    |  |    |  |  |  |  |  |
|      | 男    | 女 | 年  | 月 | 日  | 電子信箱 |  |    |  |    |  |  |  |  |  |
| 購買日期 |      |   | 年  | 月 | 日  | 經銷商  |  | 店址 |  | 電話 |  |  |  |  |  |

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內登載購買日期未填寫或經塗改或毀損者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線...等）

④ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保擁有權益


● 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、印表頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。  
● 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。  
※ 服務保證範圍  
留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。  
登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 免付費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3286299 e-mail: [cs@sampo.com.tw](mailto:cs@sampo.com.tw)

## 特別注意要點

### 安全注意事項

- 強化玻璃承載面堅固耐用，但應避免受硬物敲擊或碰撞，以免產品受損。
- 本產品強化玻璃面應保持乾燥，避免沾水以防止秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊，以免引起玻璃損壞破碎。
- 如果體重計再開機時LCD無顯示，請考慮加大壓秤力量；如果顯示亂碼或長時間無法關機，請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於平坦堅硬且不易傾倒的地面。

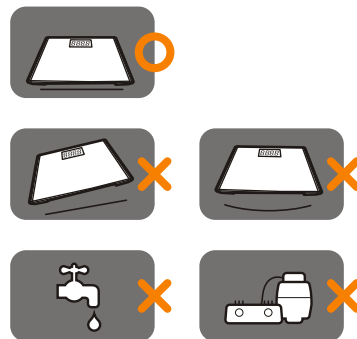


## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 5 保養方法
- 關於售後服務

## 各部名稱

- 1 電池盒(內附CR2032 鋰電池)
- 2 強化玻璃表面
- 3 腳墊(共4個)
- 4 液晶顯示螢幕

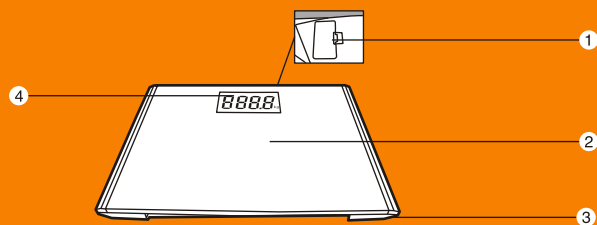


2

## 使用方法

### 使用方法

- 開始使用前請先翻轉體重計至反面，打開電池蓋，把絕緣片抽掉後，把電池盒上蓋尾端兩突點對準盒上兩缺口後蓋回電池盒蓋(如圖1、2)
- 接著把體重計放在堅硬且平整的地面上，若在地毯...等柔軟的表面上秤重，會影響其準確性。
- 平穩站上秤面並保持身體平衡，此時螢幕會從開機畫面轉為預設測量單位重量(如"0.0kg")後，螢幕即顯示秤得體重並鎖定重量，若數秒後不碰觸秤體，螢幕顯示會消失。(如圖3)
- ※因台灣慣用"kg"測量體重，故本機測量單位僅有"kg"一種測量單位。(如圖4)
- 在秤重範圍內，允許誤差為 $\pm 0.3\text{kg}=300\text{g}$ 。
- 體重計最大載重量建議為200kg/最低載重為5kg。(注意：嚴重超載或長期壓載，容易造成磅秤損害)。

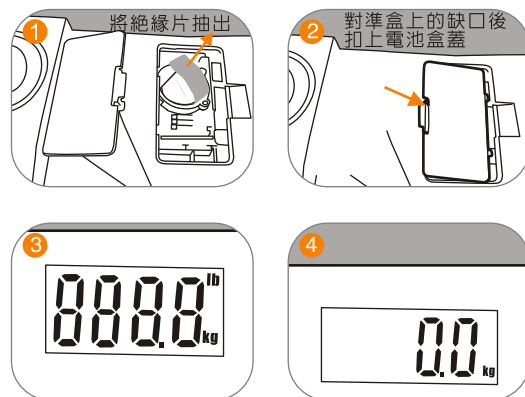

3

|      |                    |              |
|------|--------------------|--------------|
| 額定電壓 | 淨重                 | 使用電池         |
| DC3V | 2.56kg             | CR2032 3V鋰電池 |
| 外型尺寸 | W393XD301X26H (mm) |              |



#### 廢電池請回收

- 電池報廢前應取出電池
- 取出電池前產品應切斷電源
- 應安全地去棄電池(請依廢棄物處理法，處理廢棄電池)

## 保養方法

### 更換電池

- 用一段時間後，當螢幕出現"LO"時，打開電池蓋用小支平頭螺絲起子將電池從盒中撬取出並將電池(本機使用3V CR2032 鋰電池)的 "+" 面朝上裝入，聽到 "咔" 一聲即表示電池已裝好，再將電池盒蓋蓋好。(如圖5、6)
- ※若在測量時螢幕出現"Err"時，代表體重計讀取錯誤，請離開體重計再重新測量。
- ※秤重超過150kg，LCD將顯示"Err"；電力不足時，LCD顯示"LO"，請更換電池。

### 機體清潔

- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，因玻璃與金屬連接面不能浸水)。
- 確保體重計的使用壽命，請勿將磅秤長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生故障。

### 關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

