



BF-L802ML

User Manual

聲寶語音體重計 使用說明書

聲寶語音體重計 BF-L802ML 機號

聲寶產品保證書



保證書印製於說明書最後頁
並要求經銷商填妥購買日期及售店章，以確保您的權益

購買日期
年 | 月 | 日

經銷商

店址

電話

住址

電子信箱

姓名

出生日期

男 | 女

電話

年 | 月 | 日

※服務保證範圍

- 登錄或與公司聯絡 (凡家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。
- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益


※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- ※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障重起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶，天線...等)

各部名稱

- 1 語音音量控制鈕
- 2 藍光螢幕顯示器
- 3 強化玻璃表面
- 4 腳墊
- 5 語音喇叭
- 6 秤重單位設定鍵
- 7 電池盒 (AAA)

※ 本產品不附贈電池，電池需自行購買

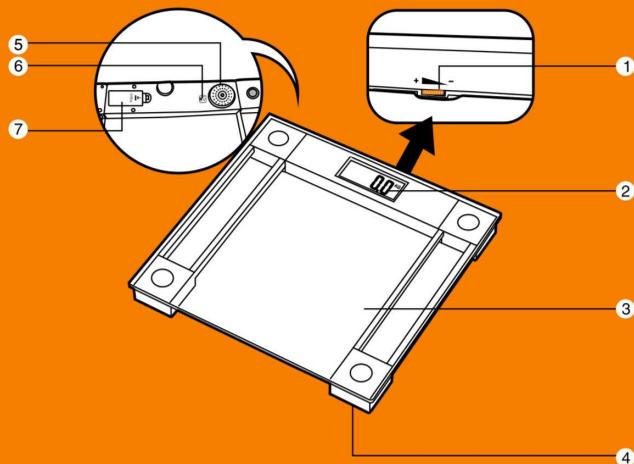


2

使用方法

使用方法

- 請將電池放在左邊底部電池盒中，使用電池種類為AAA電池二顆 (如圖1)。
 - 接著將秤放在平整的地面上，若在地毯...等柔軟的表面上秤重，會影響其準確性 (如圖2)。
 - 以腳輕抬玻璃面震動開機或輕拍玻璃面 (如圖3)，此時體重計會播報“請等候，好，請站在秤上”，螢幕顯示為“0.0kg”，後，平穩上秤並保持身體平衡，螢幕即顯示所秤得體重並鎖定重量 (播報出體重)，5秒後不使用即自動關機，如欲重新測量，則重複上述步驟啟動。
 - 若不想播報音量過大，可在體重計前端後面自行調整音量大小 (如圖4)，如果要完全無聲，只要將語音音量控制鈕，調整到最低即可。
 - 在機體背面上方附有測量單位設定鈕，可依個人使用習慣設定，共有三種重量單位：st、lb、kg (如圖4及三小圖A、B、C)。
圖A. st(英石)：英國人使用單位，1st=14 lb，以st為測量單位，不足1st則以lb來顯示尾數。
圖B. lb(磅)：1磅=0.45公斤。圖C. kg(公斤)：一般秤重使用單位。
 - 在秤重範圍內，允許誤差為 $\pm 0.3\text{kg}=300\text{g}$ 。
 - 每次使用完畢，約在5秒後自動關機 (注：不秤重時，秤也會自動關機)。
 - 體重機最大載重量建議為150kg/最低載重為5kg。(注意：嚴重超載或長期壓載，容易造成磅秤損害)。
- ※ 體重計不使用時宜將電池拿出，避免耗電。
※ 秤重超過150kg，LCD重量顯示為ERR；電力不足時，LCD將顯示Lo，此時請更換電池。


3

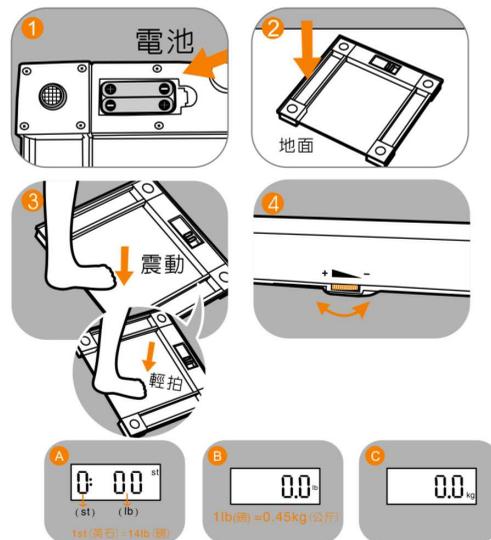

Simple good life, Sampo

安全注意事項


- 強化玻璃承載面堅固耐用，但應避免受硬物敲擊或碰撞，以免產品受損。
- 本產品強化玻璃面應保持乾燥，避免沾水以防止秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊，以免引起玻璃損壞破碎。
- 如果磅秤在開機時LCD無顯示，請考慮加大壓秤力量；如果顯示亂碼或長時間無法關機，請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的地面。

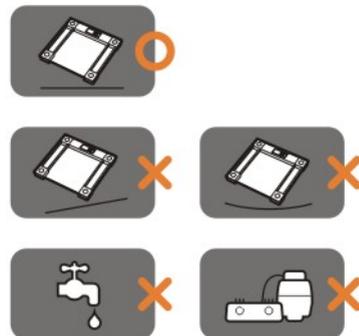

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 5 保養方法
- 緊急處理方法
- 關於售後服務

額定電壓	淨重	使用電池
DC3V	2.20 kg	AAA 4號電池X2(顆)
外型尺寸	W312XD300X36H(mm)	

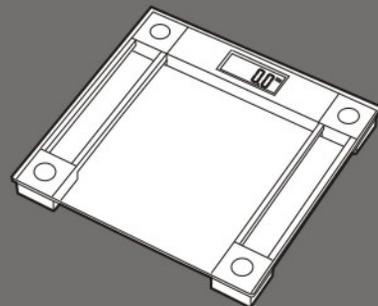

保養方法

機體

- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，而且玻璃與金屬連接面不能浸水)。
- 為確保磅秤的使用壽命，請勿將磅秤長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生觸電或短路的危險。

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。
- 如有任何問題，請速與聲寶免費諮詢專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

進口商：東富電器股份有限公司 地址：台南市南區新忠路11號 (06)264-5207

5 服務商：獅子心股份有限公司 地址：台南縣717仁德鄉仁義六街97號 消費者服務專線：0800-008-598

Simple good life, Sampo