

尊貴股仔自限公司 德國總經理山德士董事局主席
電話：0800 006139 [0800-6139-1] 訂閱號26號

送行記

清嘉慶年間吳昌碩書畫集

謝您的惠賜

請在附註處簽名或與公司聯繫（居家電器品項退回），始享本公司自購貨之日起一年之更換服務，客戶

●除了有獎勵規定外，服務區域限中華民國管轄國內。

● 天線、圓針、磁頭、攝像頭、鏡頭、光導電池、敏感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、顯示器及其

它配什麼？請找找小丑樂團團員。

● 除了有獎製媒之外，服務品質與中華民國電信局合規窗口。

※ 聚類分析

本公司之工程師與技術員將定期回廠進行設備的定期檢查及保養，以保證其正常運作。

影響力

四

聖經

九

電子信號

五

聖
經

日 月 年

卷八

量具儀器品保部

華碩時尚電子體重計(伸縮型)BF-L901ML

SAMPO

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。


聲寶時尚電子體重計(伸縮型)使用說明書

BF-L901ML

User Manual

安全注意事項

- 強化玻璃承載面堅固耐用，但應避免受硬物敲擊或碰撞，以免產品受損。
- 本產品強化玻璃面應保持乾燥，避免沾水以防止秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊，以免引起玻璃損壞破碎。
- 如果磅秤再開機時LCD無顯示，請考慮加大壓秤力量；如果顯示亂碼或長時間無法關機，請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的地面。

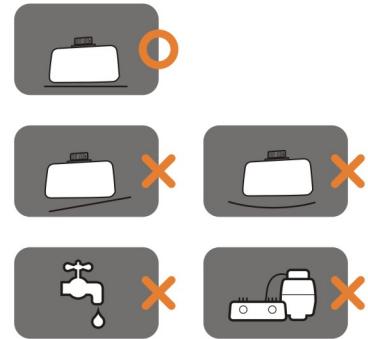


4

目錄

- 2 各部名稱
 - 3 使用方法
 - 4 特別注意要點
 - 5 保養方法
- 緊急處理方法
關於售後服務

額定電壓	淨重	使用電池
DC3V	663g	CR2032 3V鋰電池
外型尺寸	W230XD130X21H (mm) W230XD178X21H (mm) (將螢幕拉出)	

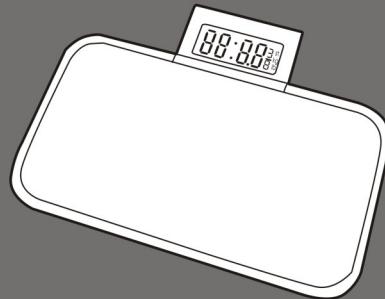

保養方法


- 用一段時間後，當螢幕出現"LO"時，代表電池電力已不足，請更換新電池。
- 本機使用3V CR2032 鋰電池1顆，打開電池蓋將電池 "+" 面朝上裝入，聽到 "卡" 一聲即示電池已裝好，再將電池盒蓋蓋好。(如圖4)

※體重計不使用時，宜將電池拿出，避免耗電。

※秤重超過150kg，LCD將顯示"Err"：電力不足時，LCD顯示"LO"，請更換電池。•


機體

- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，而且玻璃與金屬連接面不能浸水)。
- 為確保磅秤的使用壽命，請勿將磅秤長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生觸電或短路的危險。

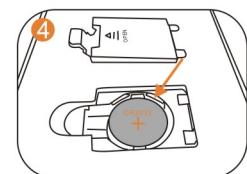

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。
- 如有任何問題，請速與聲寶免費諮詢專線，或就近經銷商洽詢。

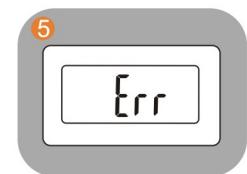


關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

各部名稱

- 1 秤重單位st(英石)
- 2 秤重單位kg(公斤)
- 3 秤重單位lb(英磅)
- 4 強化玻璃表面
- 5 腳墊(共4個)
- 6 液晶顯示螢幕
- 7 伸縮式螢幕
- 8 電池盒(CR2032 鋰電池)
- 9 電源開關鍵
- 10 秤重單位選擇鈕

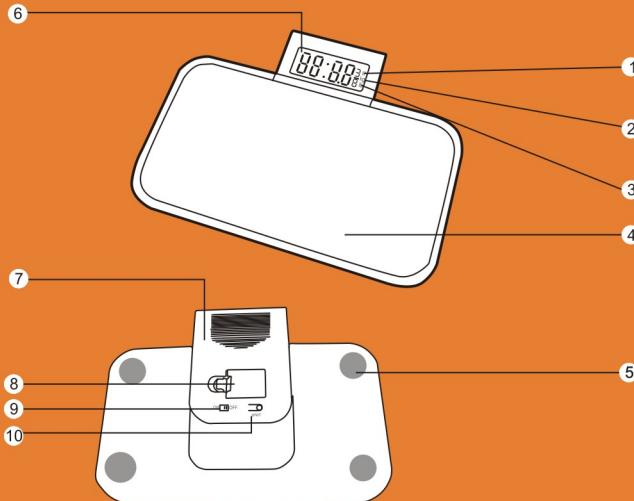


2

使用方法

使用方法

- 將螢幕從本體底部拉出(如圖1)
- 將電源開關鍵推至"ON"即可打開電源。(如圖2)
- 接著將秤放在平整的地面上，若在地毯...等柔軟的表面上秤重，會影響其準確性。
- 用腳輕踏秤體，此時螢幕會從開機畫面轉為預設測量單位重量(如"0.0kg")後，平穩站上秤面並保持身體平衡，螢幕即顯示秤得體重並鎖定重量，8秒後不碰觸秤體，螢幕會消失。(如圖3)
※長時間不使用時，請將電源開關鍵推至"OFF"即可關掉電源。
- 在"OFF"狀態下輕拍機體不會有動作。
- 在機體背面上方附有秤重單位選擇鈕，可依個人使用習慣設定，共有三種重量單位：st、lb、kg
- A. kg(公斤)：一般秤重使用單位(即開機時預設使用的測量單位)
- B. st(英石)：英國人使用單位，1 st = 14 lb，
以st為測量單位，不足1 st則以分數形式的" lb "來顯示尾數。
- C. lb(磅)：1 lb = 0.454 kg (如圖A、B、C)
- 範例：
58公斤重的人站在體重計上，測量單位不同時螢幕的顯示結果分別為(如圖D、E、F)
 - 在秤重範圍內，允許誤差為 $\pm 0.3\text{kg} = 300\text{g}$ 。
 - 不使用時請將開關鍵推至"OFF"關掉電源，並將螢幕推回本體中收納收藏。
 - 體重計最大載重量建議為150kg/最低載重為5kg。(注意：嚴重超載或長期壓載，容易造成磅秤損害)。

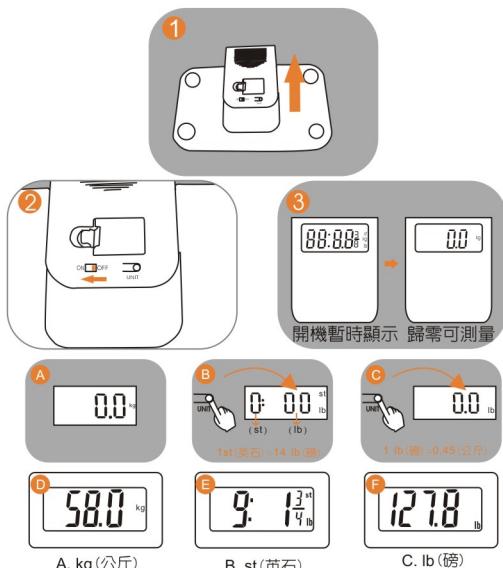

3

Simple good life, Sampo