


安全注意事項

- 強化玻璃承載面堅固耐用，但應避免受硬物敲擊或碰撞，以免產品受損。
- 本產品強化玻璃面應保持乾燥，避免沾水以防止秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊，以免引起玻璃損壞破碎。
- 如果磅秤再開機時LCD無顯示，請考慮加大壓秤力量；如果顯示亂碼或長時間無法關機，請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於平坦堅硬且不易傾倒的地面。

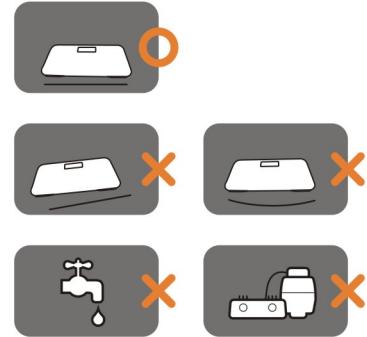

4


目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 5 保養方法

關於售後服務

各部名稱

- ① 螢幕顯示器
- ② 強化玻璃表面
- ③ 腳墊
- ④ 秤重單位設定鉗
- ⑤ 電池盒(內附CR2032鋰電池)

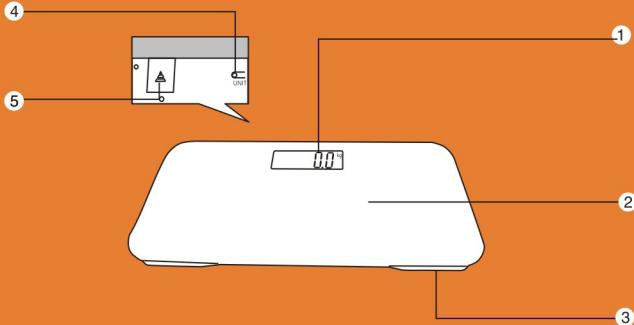


2

使用方法

使用方法


- 首次使用時，請將電池盒中的絕緣片抽掉即可使用；使用的電池種類為3V鋰電池(CR2032)一顆(如圖1)。
- 平穩站上秤面並保持身體平衡，此時秤體就會從預設測量單位(0.0kg)轉變成所測得的體重(此時畫面會暫停3秒)，17秒後不碰觸秤體，螢幕會消失。(如圖2、3)
- 在機體背面上方附有測量單位設定鉗，可依個人使用習慣設定，共有三種重量單位：st、lb、kg(如圖4及三小圖A、B、C)。
- 圖A. st(英石)：英國人使用單位， $1\text{st}=14\text{ lb}$ ，以st為測量單位，不足1st則以lb來顯示尾數。
- 圖B. lb(磅)： $1\text{ lb}=0.45\text{ kg}$ 。
- 圖C. Kg(公斤)：一般秤重使用單位。
- 在秤重範圍內，允許誤差為 $\pm 0.1\text{kg}=100\text{g}$ 。
- 每次使用完畢，約在6秒後自動關機(注：不秤重時，秤也會自動關機)。
- 體重計最大載重量建議為180kg/最低載重為5kg。(注意：嚴重超載或長期壓載，容易造成磅秤損害)。

※體重計不使用時，宜將電池拿出，避免耗電。

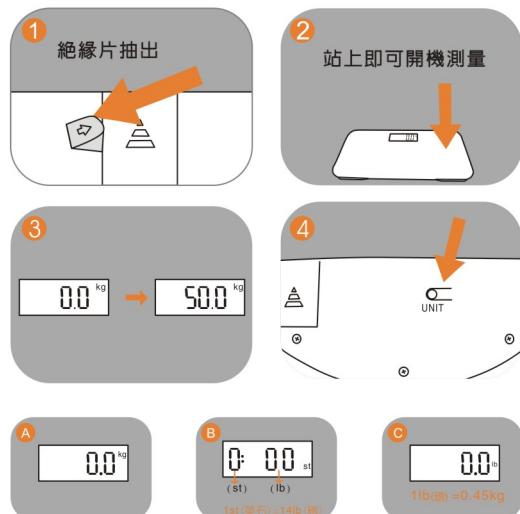

3

額定電壓	淨重	使用電池
DC3V	0.9kg	CR2032 3V鋰電池
外型尺寸	W312XD161X22H (mm)	
 廢電池請回收		

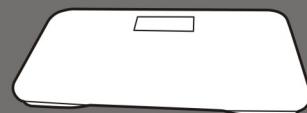

保養方法

更換電池

- 用一段時間後，當螢幕出現"LO"時，將電池蓋向上推開後，將電池按壓後再往上推後舊電池會鬆開，再將新電池(本機使用3V CR2032 鋰電池)的 "+"面朝上裝入，裝入時先頂開盒內兩簧片後按壓往下使電池固定於電池盒內下方兩突片，再將電池盒蓋蓋好。(如圖5、6、7)
- ※秤重超過180kg，LCD將顯示" Err "；電力不足時，LCD顯示" LO "，請更換電池。

機體清潔

- 不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，而且玻璃與金屬連接面不能浸水)。
- 為確保磅秤的使用壽命，請勿將磅秤長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生觸電或短路的危險。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

