

BF-L903ML

聲寶環保綠電子體重計

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

BF-L903ML 寶靈保綠電子體重計

機號

臺灣寶麗產品保證書

SAMPO

姓名										男 女		出生日期				電話				地址										電子信箱									
購買日期										經銷商		店址				電話																							
日										年		月				日																							

謝謝您的垂顧

急辭職的權時，應即詳實填列職期日期並蓋印章，於一週內上稱 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡 (小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯誼證書保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、唱針、磁頭、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。


※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

寶豐股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是寶豐] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

特別注意要點

安全注意事項

- 強化玻璃承載面堅固耐用，但應避免受硬物敲擊或碰撞，以免產品受損。
- 本產品強化玻璃面應保持乾燥，避免沾水以防止秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊，以免引起玻璃損壞破碎。
- 如果磅秤再開機時LCD無顯示，請考慮加大壓秤力量；如果顯示亂碼或長時間無法關機，請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於平坦堅硬且不易傾倒的地面。

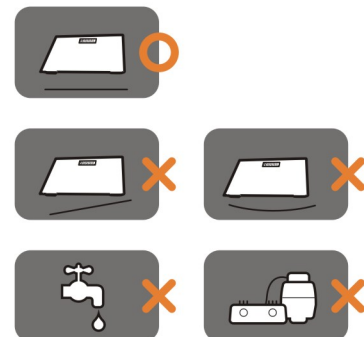


目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 5 保養方法
- 關於售後服務

各部名稱

- 1 電池盒 (內附CR2032 鋰電池)
- 2 強化玻璃表面
- 3 腳墊 (共4個)
- 4 液晶顯示螢幕


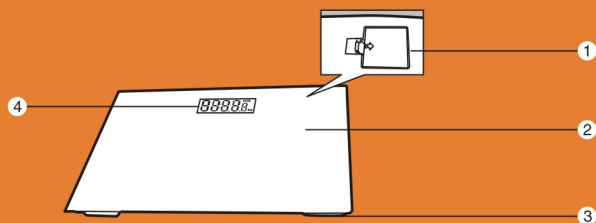


2

使用方法

使用方法

- 開始使用前請先翻轉體重計至反面，打開電池蓋，將絕緣片抽掉後，將電池盒上蓋尾端兩突點對準盒上兩缺口後蓋回電池盒蓋 (如圖1、2)
- 接著將秤放在堅硬且平整的地面上，若在地毯...等柔軟的表面上秤重，會影響其準確性。
- 平穩站上秤面並保持身體平衡，此時螢幕會從開機畫面轉為預設測量單位重量 (如“0.0kg”) 後，過5秒後螢幕即顯示秤得體重並鎖定重量 (此時畫面會暫停6秒)，17秒後不碰觸秤體，螢幕會消失。(如圖3)
- ※因台灣慣用“kg”測量體重，故本機測量單位僅有“kg”一種測量單位。(如圖4)
- 在秤重範圍內，允許誤差為 $\pm 0.1\text{kg} = 100\text{g}$ 。
- 體重計最大載重量建議為150kg/最低載重為5kg。(注意：嚴重超載或長期壓載，容易造成磅秤損害)。

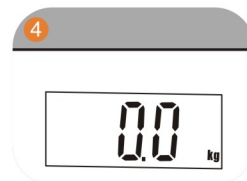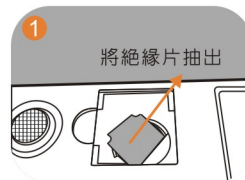

3

額定電壓	DC3V	淨重	1.17kg	使用電池	CR2032 3V鋰電池
外型尺寸	W302XD212X21H (mm)				



保養方法

更換電池

- 用一段時間後，當螢幕出現“LO”時，打開電池蓋用小支平頭螺絲起子將電池從盒中撬取出並將電池（本機使用3V CR2032 鋰電池）的“+”面朝上裝入，聽到“卡”一聲即示電池已裝好，再將電池盒蓋蓋好。（如圖5、6）
- ※若在測量時螢幕出現“Err”時，代表體重計讀取錯誤，請離開體重計再重新測量。
- ※秤重超過150kg，LCD將顯示“Err”；電力不足時，LCD顯示“LO”，請更換電池。

機體清潔

- 不可使用化學溶劑擦拭（必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，而且玻璃與金屬連接面不能浸水）。
- 為確保磅秤的使用壽命，請勿將磅秤長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生觸電或短路的危險。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

