

User Manual

BF-L904ML

使用說明書

計量體重電子秤

SAMPO

請將原裝說明書與印證書妥善保存，以便您日後查詢及索取保固服務。並要求經銷商妥善保存原裝說明書及印證書，以便日後查詢及索取保固服務。

SAMPO

聲寶產品保證書

機號

聲寶造型電子體重計 BF-L904ML

姓名										
出生日期	年	月	日	男	女					
住址										
電話										
電子信箱										
購買日期	年	月	日	經銷商	店址		電話			

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保固期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 搬裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障重起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線...等）

送站修理



※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（凡家電產品免費寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。
- ※服務保證範圍
- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

安全注意事項


- 強化玻璃承載面堅固耐用，但應避免受硬物敲擊或碰撞，以免產品受損。
- 本產品強化玻璃面應保持乾燥，避免沾水以防止秤重時滑倒。
- 應避免非正常使用或受到撞擊，以免引起玻璃損壞破碎。
- 如果磅秤再開機時LCD無顯示，請考慮加大壓秤力量；如果顯示亂碼或長時間無法關機，請取出電池停頓約3秒鐘後再重新裝入。
- 本產品只可作家庭秤量人體體重之用，不可做商業或其他用途。
- 使用時，請置放於堅硬且平坦不易傾倒的地面。

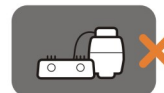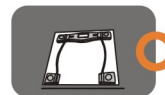

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 5 保養方法
- 緊急處理方法
- 關於售後服務

額定電壓	DC3V	淨重	1.58kg	使用電池	CR2032 3V鋰電池
外型尺寸	W302XD302X33H (mm)				

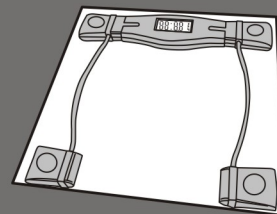

保養方法

更換電池



- 用一段時間後，當螢幕出現"LO"時，打開電池蓋，用小支平頭螺絲起子將電池從盒中撬出，並將新電池（本機使用3V CR2032 鋰電池）的 "+" 面朝上裝入，聽到 "卡" 一聲即示電池已裝好，再將電池盒蓋蓋好。（如圖5、6）
- ※若在測量時螢幕出現"Err"時，代表體重計讀取錯誤，請離開體重計再重新測量。
- ※秤重超過150kg，LCD將顯示"Err"；電力不足時，LCD顯示"LO"，請更換電池。

機體清潔

- 不可使用化學溶劑擦拭（必要時可使用沾水的濕布擦拭，但避免水進入秤體內，而且玻璃與金屬連接面不能浸水）。
- 為確保磅秤的使用壽命，請勿將磅秤長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生觸電或短路的危險。


關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

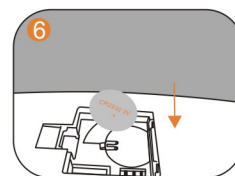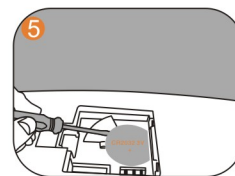

各部名稱

- ① 液晶顯示螢幕
- ② 強化玻璃表面
- ③ 腳墊(共4個)
- ④ 電池盒蓋

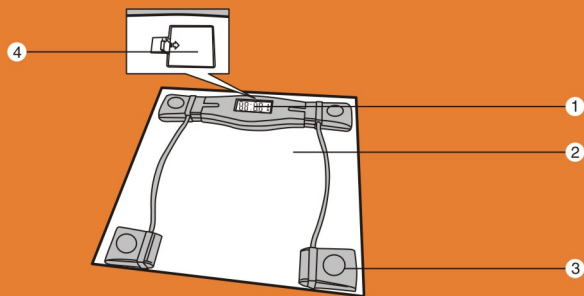


2

使用方法

使用方法

- 開始使用前請先翻轉體重計至反面，打開電池蓋，將絕緣片抽掉後，將電池盒上蓋尾端兩突點對準盒上兩缺口後蓋回電池盒蓋(如圖1、2)
- 接著將體重計放在平、硬的地面上，若在地毯...等柔軟的表面上秤重，會影響其準確性。
- 用腳輕踏秤體，此時螢幕會從開機畫面轉為預設測量單位重量(如“0.0kg”)後，平穩站上秤面並保持身體平衡，螢幕即顯示秤得體重並鎖定重量，17秒後不碰觸秤體，螢幕會消失。(如圖3)
- ※因台灣慣用“kg”測量體重，故本機測量單位僅有“kg”一種測量單位。(如圖4)
- 在秤重範圍內，允許誤差為 $\pm 0.1\text{kg}=100\text{g}$ 。
- 體重計最大載重量建議為150kg/最低載重為5kg。(注意：嚴重超載或長期壓載，容易造成磅秤損害)。
- ※低於5kg測量時，易造成體重計不啟動。

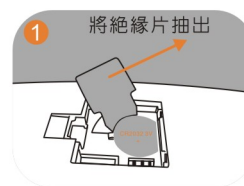

3