

User Manual

聲寶舒壓按摩器說明書


ME-D1103L



隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期，以確保您的權益

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號


- 各部名稱
- 1 電池蓋
 - 2 按摩握把
 - 3 矽膠軟接頭
 - 4 凸點按摩頭
- ※ 本產品不附電池

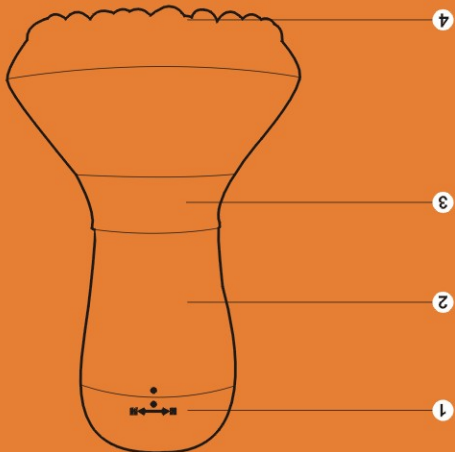

外型尺寸 | W84xD84xH122(mm)


電源 | 4號電池3顆 | 消耗功率 | 5W | 機體淨重 | 135g

建議使用部位

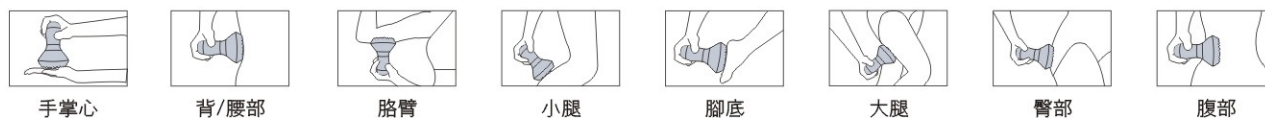

使用說明

- 請將電池蓋往逆時針方向打開，把三顆4號電池依正負極方向放入產品電池座中，再以順時針方向旋緊電池蓋。
- 將按摩器於放置於欲按摩之身體部位，下壓後即啟動。

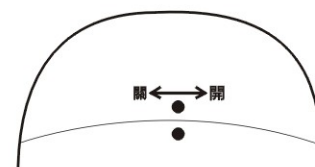

產品特色

- 多面向凸點按摩，富趣味性的按摩感受。
 - 造型小巧可愛，方便隨身攜帶。
 - 可依據個人喜好進行深層按摩。
 - 操作輕鬆方便，可隨時使用，快速紓壓。
 - 使用4號電池三顆，更換方便（本產品不附電池）。
- ※消耗完畢的電池應安全回收電池（請依廢棄物清理法，處理廢棄電池）

常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處理方法
開機後不工作	沒有裝電池、電池極性錯誤或沒電	重新安裝電池或更換電池
開機後有異音	馬達故障	送修處理
震動無力	電池電量不足	更新電池
震動無力	馬達故障	送修處理

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。