

User Manual

ME-D1106EL


警實按摩椅說明書

SAMPO

隨同產品發行保養書，請勿撕毀時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期，以備你有需要

警實股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

※本產品不附電池

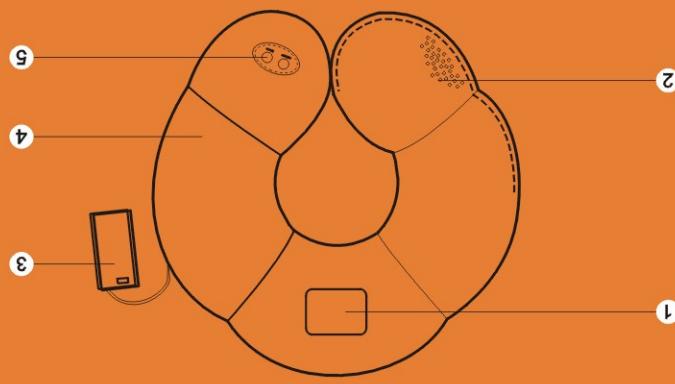

電源	三驟3級電	消耗功率	2W	機體淨重	310g	外型尺寸	W320xD320xH90(mm)
----	-------	------	----	------	------	------	-------------------

- 1 電動電線
- 2 磁力泡海棉球
- 3 電池座
- 4 布套
- 5 搓刮面板


使用說明

- 打開電池蓋，將二顆3號電池依正負極方向放入產品電池座中，蓋上電池蓋。並翻至反面，設定至“ON”的位置。(如圖一)
- 將按摩頸枕固定於頸部，按壓控制面板的電源開關，並依次按壓選擇喜歡的模式，本產品共有6種模式可供選擇。(如圖二)

建議每次按摩時間，請勿超過15分鐘。

- 欲停止按摩時，請按壓電源開關鍵。


*消耗完畢的電池應安全回收電池（請依廢棄物清理法，處理廢棄電池）。

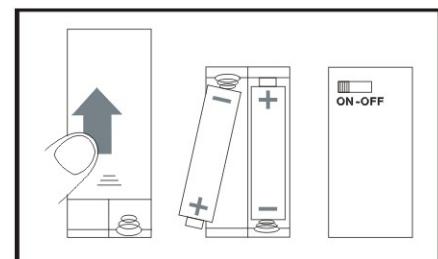

(圖一)

產品特點

- 6種震動式按摩設計，可舒緩肌肉酸痛與疲勞。
- 雙色超柔觸感布料，舒適感十足。
- 環狀設計，容易固定按摩位置。
- 造型輕巧，適合旅遊、休憩之用。
- 操作輕鬆方便，可隨時使用，快速紓壓。

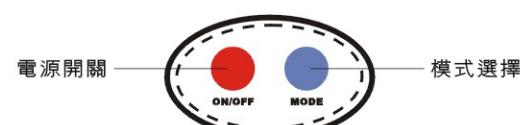

(圖二)

常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處理方法
開機後不工作	沒有裝電池、電池極性錯誤或沒電	重新安裝電池或更換電池
開機後不工作	電源開關沒有開啟	啟動電池盒及面板之電源開關鍵
開機後有異音	震動馬達故障	送修處理
震動無力	電池電量不足	更換新電池
震動無力	震動馬達故障	送修處理

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡04-24180315諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆卸本產品進行修理。

委製／服務商：禾亞實業有限公司
地址：台中市大里區瓦磘路56巷6號
售後服務專線：04-24180315