

SAMPO

ME-P701W

User Manual

曼波 s 織形機 使用說明書

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

曼波 s 織形機 ME-P701W 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，隨即詳填購買日期並蓋店章，於一週內上傳<http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

• 天線、馬針、磁頭、攝像管、鏡頭、印表頭、熱感頭、充電電池、螢光燈管、燈泡、軸

承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內

• 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

• 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

• 保證書內列購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力

• 本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待

• 由於天災地變或人為引起之故障或損毀


• 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀

• 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

• 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影〈音〉帶、天線...等)

聲寶股份有限公司·新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:[03]328299 e-mail:cs@sampo.com.tw

電壓	110V /60Hz	消耗功率	25W
機體淨重	1 kg	外型尺寸	W175×D 110 ×H 148 (mm)

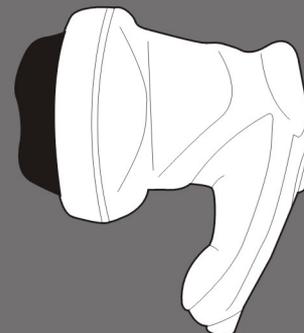


目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 4 產品特點
- 5 使用方法
- 6 清潔與保養
- 7 緊急處理方法
- 8 關於售後服務
- 9 家電小百科

各部名稱

- 1 布質保護套
- 2 滾珠按摩頭
- 3 平式按摩頭
- 4 不規則按摩頭
- 5 本體
- 6 旋鈕開關

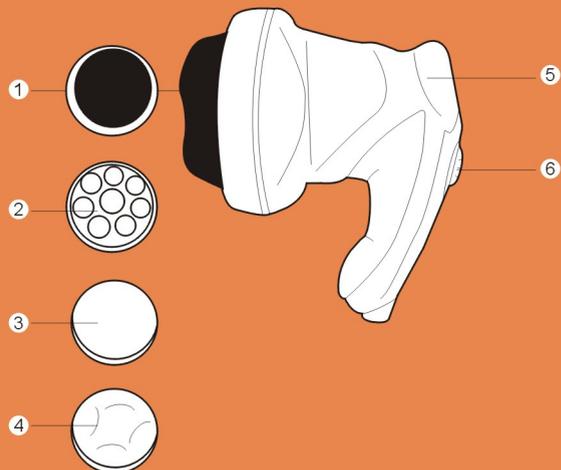

安全注意事項

- 請用電壓110V 7A(含)以上之插座。
- 請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 本產品僅供一般家庭使用，請勿做商業及其他用途。



安全注意事項

- 建議從低速按摩開始，然後再逐漸增加速度。
- 建議本產品使用於身體同一部位時，請勿超過10分鐘。
- 不使用本產品時，請務必將插頭從插座上拔出。
- 懷孕期間切勿使用本產品，同時也要避開傷口處，避免造成意外。
- 用餐後，一小時內請勿使用本產品。
- 孩童或殘障人士使用時，應有成人坐在旁邊監督。
- 本產品禁止在頸部以上及骨頭關節部位使用，以避免使用之傷害。
- 長髮使用者請將頭髮束起再使用，避免頭髮捲入發生危險。
- 平面及不規則按摩頭使用時請套上布質保護套，以防止異物捲入發生危險。
- 滾珠按摩頭為搭配按摩霜時使用，使用時不需加上布質保護套，但須注意勿讓異物捲入，避免發生危險。
- 請勿在過敏皮膚處過度按摩或身體不適時使用本機器，若您有疑慮，使用前請先諮詢過醫生的意見。
- 使用前請先檢查機器是否有破損或故障後再使用，如有破損或異常狀況請勿使用。



產品特點

- 體積輕巧，攜帶方便。
- 橡膠握把，握感舒適。
- 可DIY輕鬆使用。
- 無段開關設計，可隨意調整速度。
- 可更換按摩頭。

符號說明

- 順時針方向旋轉，即啓動本機。
- 將無段式旋鈕順時針方向旋轉則轉動速度會越來越快。
- 將無段式旋鈕逆時針方向旋轉則轉動速度會越來越慢。
- 不使用時，關機請確認有聽到『喀』一聲，才是正確關機。



使用方法

1. 將插頭插入電源插座上。
2. 轉動旋鈕開關(即速度調節開關)以啓動按摩器。
3. 把機器使用在想要按摩的身體部位，使用時保持舒適，若肌膚有不適，請停止使用。(如右列圖示)
4. 順時鐘方向，按摩力道由弱到強：逆時鐘方向則由強到弱。
(建議從低速按摩開始，然後再逐漸增強速度。)
5. 使用完按摩器，請將旋扭轉到關的位置，再將插頭電源拔掉。
6. 附有按摩頭，可依需求更換使用。
 - 。可使用部位手臂、小腿、大腿、腹部
7. 按摩頭更換請先將黑色布套部分拆下，在進行不同按摩頭更換即可。
8. 搭配按摩霜使用時，三款按摩頭上不可套上布質按摩套。



清潔與保養

- 使用完後與清潔前，請先拔除電源插頭。
- 請勿在機體上使用苯、稀釋劑或其他具腐蝕性溶劑。
- 請使用濕布擦拭清潔本產品。
- 避免有棉絨、綿絮及頭髮等異物捲入本體，以免影響產品使用上的危險。
- 請勿將本產品儲藏在高溫或火源附近。
- 請勿將本產品長時間放在太陽直射的地方。
- 不要拉扯或用電線將本產品拉起。
- 切勿讓水或液體滲入本產品內。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與聲寶0800免費諮詢專線聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

售後服務

關於售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。
- 若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情細詳細說明，客服中心會協助處理。
- 絕對不要自行拆開外殼自行修理。



進口商

公司：佳信國際有限公司
地址：台中市西屯區惠文路780號1樓
電話：04-24738835

M 生活小常識

曼波 S 纖形機－搭配按摩霜，效果更加

- 沐浴過後，在欲按摩之部位擦上按摩霜
- 搭配適合的按摩頭進行按摩(不可加上布質保護套)
- 按摩時間以10-15分鐘為宜。

(注意：本產品不可使用於關節上)

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



SAMPO

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）