

Qubit® dsDNA HS Assay Kits 操作说明书

【产品名称】

通用名称：双链 DNA 超敏检测试剂盒（荧光法）

英文名称：Qubit® dsDNA HS Assay Kits

【包装规格】

100 人份&500 人份/盒

【预期用途】

Nanodrop 系列微量分光光度计采用目前最常见的紫外吸光法对待测样品的浓度及纯度进行检测，由于它会检测吸光度在 260nm 处所有物质的吸光值（如 DNA、RNA、降解核酸和游离核苷酸等其他杂质），因此读数并不是十分准确。而荧光计通过荧光染料与特定目标分子结合后，检测其荧光强度来测目标分子的浓度，因此其定量结果一般低于 A260nm 处的读数，但是更为准确。

另外，准确的 DNA 定量对于许多后续应用而言都至关重要。Nanodrop 系列全波长微量分光光度计无法精确测定 5ng/ul 以下的 DNA 浓度，然而，许多 DNA 样品又恰在这个范围之内。在检测双链 DNA 时，荧光计的检测极限可达 0.5pg/ul。此时，更为灵敏的荧光计似乎是个更好的选择。荧光计和相应的定量试剂盒，能快速灵敏、精确测定 DNA 的浓度。

本试剂将被用于成本昂贵的下游实验：qPCR、PCR 克隆、转染和新一代测序等精密测定的实验，精准定量范围 10 pg/μL 至 10ng/μL。

【检验原理】

本试剂盒利用 Picogreen DNA 染料能够特异性结合双链 DNA，而不与蛋白质、RNA、盐离子结合的原理，通过激发光照射，Qubit 检测仪收集发射光，特异的分析样品中双链 DNA 的实际含量，能够排除样品中蛋白质、RNA、盐离子等物质的干扰，从而对双链 DNA 进行精准的定量。



试剂盒组成	保存	规格(100 人份)	规格 (500 人份)
Qubit Reagent	-20-8℃	100 μL/支×1 支	500 μL/支×1 支
Qubit dsDNA HS Standard #1	-20-8℃	1mL/瓶×1 支	5mL/瓶×1 瓶
Qubit dsDNA HS Standard #2	-20-8℃	1mL/瓶×1 支	5mL/瓶×1 瓶
Qubit dsDNA HS Buffer	-20-8℃	30mL /瓶×1 瓶	120mL /瓶×1 瓶
说明书	常温	1 份	1 份

【主要组成成份】

备注：不同批次的试剂不可混合使用。

【储存条件及有效期】

2-8℃保存；避免反复冻融；有效期 6 个月。

【适用仪器】

荧光仪（ Qubit 2.0 ， Qubit 3.0 等荧光仪）

【需要但试剂盒没有提供】

一次性无尘手套、 Qubit® assay tubes (500 tubes, Life Technologies, Cat. no. Q32856)或者 Axygen® PCR-05-C tubes （ VWR, part no. 10011-830 ）

【检验方法】


1. 实验准备：

- 1.1 准备好检测所需要的 0.5ml 的薄壁离心管（ n=待测样品数+2 standards ）；
- 1.2 在薄壁离心管的管盖处进行标记样品的编号，切不可在管的侧壁进行标记。
- 1.3 Qubit® 工作液的准备：使用新的塑料管按照使用的量将 Qubit® Reagent 用 Qubit® dsDNA HS Buffer 按照 1:200 的比例进行稀释，例如： $V(\text{Qubit}^{\circledR} \text{工作液}) = (\text{待测样品数} + 2 \text{ standards}) \times (1V_{(\text{Qubit}^{\circledR} \text{Reagent})} + 199V_{(\text{Qubit}^{\circledR} \text{dsDNA HS Buffer})})$ 涡旋混匀待用；
- 1.4 按 190μL 将 Qubit® 工作液分到标准品的 2 个离心管中，分别加入 10μL 标准品 Qubit dsDNA HS Standard #1 和 Qubit dsDNA HS Standard #2，涡旋混匀备用，注意不要出现气泡；
- 1.5 待测样品：根据实际需要的量，将 Qubit® 工作液进行分装，确保测量体积为 200μL。例如：若待测样品的体积为 5μL，则 Qubit® 工作液为 195μL 进行分装。

1.6 将待测样品加入对应的检测管中，确保终体积为 200 μ L；涡旋混匀，不要出现气泡。

1.7 将准备好的标准品和样品放置室温反应 3min，待测。

操作流程图例：

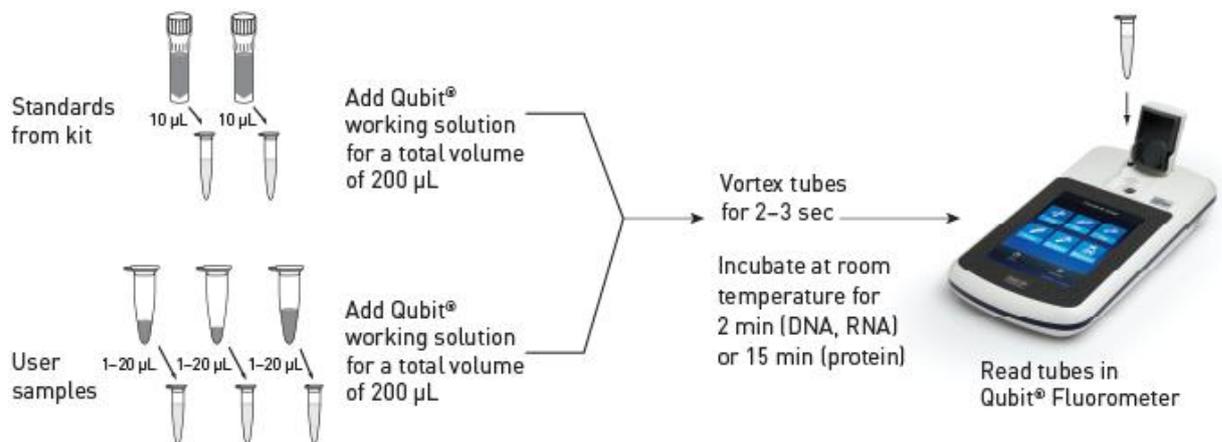

2. Qubit® 3.0 操作步骤

- 2.1 在 Qubit® 3.0 主屏幕操作页面，选择 DNA，然后选择检测类型 dsDNA High Sensitivity。显示“Read standards”，选择 Read Standards 进行检测。
- 2.2 将装有 Standard #1 管子插入样品槽中，关闭上盖，按键 Read standard。读取完成后(~3 seconds)，移走 Standard #1。
- 2.3 将 装有 Standard #2 管子插入样品槽中，关闭上盖，按键 Read standard。读取完成后(~3 seconds)，移走 Standard #2。
- 2.4 按键 Run samples。
- 2.5 在读取页面，选择相应的单位和体积；
 - 2.5.1 从旋转轮面板上选择+或-按钮来选择添加到试管中的样品体积（从 1 - 20μl）；
 - 2.5.2 从下拉菜单中选择测量样品浓度的浓度单位。
- 2.6 将装有待测样品的管子插入样品槽中，关闭上盖，按键 Read，读取完成后(~3 seconds)，移走样品，直至样品测完。

3. Qubit® 2.0 操作步骤

- 3.1 在 Qubit® 2.0 主屏幕操作页面，选择 DNA，然后选择检测类型 dsDNA High Sensitivity。显示“Read standards”，选择 Read Standards 进行检测。
- 3.2 将装有 Standard #1 的管子插入样品槽中，关闭上盖，按键 Read standard。读取完成后(~3 seconds)，移走 Standard #1。
- 3.3 将 装有 Standard #2 管子插入样品槽中，关闭上盖，按键 Read standard。读取完成后(~3 seconds)，移走 Standard #2。
- 3.4 按键 Run samples。
- 3.5 将装有待测样品的管子插入样品槽中，关闭上盖，按键 Read，读取完成后(~3 seconds)，移走样品，直至样品测完。
- 3.6 按照下面公式计算样品 $\frac{200}{X}$ 管中 DNA 的浓度。

样品浓度 = QF value × (QF Value :Qubit® 2.0 直接测量得到样品的结果；X:加入的样品的体积)

【产品性能指标】

1. 最低检测限：10pg/μL
2. 核酸定量检测线性范围 10pg/μL-10ng/μL。
3. 特异性检测与 Mg²⁺、氯化钠、醋酸钠、醋酸铵、乙醇、苯酚、氯仿、SDS、RNA、蛋白质、Triton-X100、dNTPS、BSA 等干扰物没有交叉反应。

【注意事项】

4. 检测温度：所有检测必须在室温操作（22-28°C）；
5. 孵育时间：DNA 与工作液混合后，反应 3min，荧光信号在 3 个小时内都是稳定的。

6. 荧光校准：每次使用前，请按照批次使用校准，以确保实时检测数据的一致性。

【生产企业】

企业名称：广州艾基生物技术有限公司

生产地址：广州生物岛螺旋三路三期四栋 505

注册地址：广州生物岛螺旋三路三期四栋 301

邮政编码：510003