

样本保存液说明书

【产品名称】

通用名称：样本保存液

英文名称：Dako Mounting Medium

【包装规格】

473 mL

【预期用途】

用于组织、细胞病理学分析样本的保存。

用于永久保存福尔马林固定，石蜡包埋组织切片，冷冻切片和载玻片上细胞制备。用于 Dako CoverStainer 仪器，也可以与自动盖片仪器连用。

【主要组成成分】

该产品是一种低粘度快干型的封片剂用于自动盖玻片。可与二甲苯（芳香族）和不含二甲苯（脂肪族）清洗剂相容。每瓶含473mL，可至少用于6000个玻片。

丙烯酸共聚物

二甲苯：30-60%

甲 苯：30-60%

【储存条件及有效期】

室温保存。有效期 24 个月。

超过效期后请勿使用。当样本保存液放置到 Dako 组织染色机上，需在 5 天内用完。如果试剂在非规定的条件下存储，用户需要验证存储条件。没有明显迹象显示该产品的不稳定性。如果出现异常结果不能归因于实验操作步骤的偏差，由此怀疑产品可能出现问题时，请及时联系 Dako 技术支持部门。

生产日期，失效日期：见标签。

【适用仪器】

组织染色机（Dako CoverStainer）

【样本要求】

1. 石蜡切片：福尔马林固定的石蜡包埋组织
2. 冷冻切片和细胞涂片：丙酮固定的冷冻切片或固定的细胞涂片

【检测方法】

依照组织染色机提供的伊红-苏木素染色（H&E）检测规程，染色完成后，切片需脱水，透明，封片。

更多信息及使用说明请参考 Dako 组织染色机（Dako CoverStainer）用户指南。

【注意事项】

1. 仅用于体外诊断并仅供专业人员使用。
2. 穿戴合适的个人防护装置，以避免接触眼睛与皮肤。
3. 根据当地政府、国家或联邦的规范要求，对未使用的溶液进行处理。
4. 产品含有 30-60%甲苯和 30-60%二甲苯并且已经标记如下：



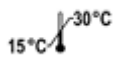
警告

H226	易燃液体，易挥发
H302	吞食有害
H319	警惕眼部刺激
H315	警惕皮肤刺激
H361	怀疑对胎儿有损害
H335	可能导致呼吸刺激
H336	可能导致嗜睡和头晕
H373	长时间重复暴露可能导致器官损害
P201	使用前获取特别说明
P202	充分阅读和理解所有安全警告前不要进行任何操作
P281	按照需要使用个人防护设备
P280	带防护手套，穿戴脸部和眼部防护。
P210	远离热源，热的表面，火花，明火和其他火源。禁止抽烟。
P241	使用防爆电气，通风，照明和所有材料处理设备。
P242	只能使用无火花的工具。
P243	采取防静电措施。
P233	保持容器密闭。
P271	只能在室外或通风良好的地方使用。
P260	请勿吸入蒸汽。
P270	使用本产品时请勿进食，饮水或吸烟。
P264	处理后彻底清洗双手。
P314	如感觉不适，求医/就诊。
P308 + P313	如接触到或有疑虑：求医。
P304 + P340 + P312	如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
P301 + P312 + P330	如误吞咽：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。漱口。
P303 + P361 + P353	如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水冲洗皮肤或淋浴。
P302 + P352 + P362-2	如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。脱下污染的衣服。
P332 + P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P337 + P313	如果眼睛刺激持续：就医。
P405	存储时锁起。
P403	存放在通风良好的地方。

P235 保持凉爽。

P501 按照当地，区域，国家和国际的规定处理内含物和容器。
推荐用户在特殊染色前进行兼容性测试。

【标识的解释】

 货号	 批号	 GHS 危险符号 (详见注意事项章节)
 体外诊断医疗器械	 有效期	 GHS 危险符号 (详见注意事项章节)
 请参阅说明书	 制造商	
 温度限值	 GHS 危险符号 (详见注意事项章节)	

【基本信息】

备案人/生产企业: Dako Denmark A/S

住所: Produktionsvej 42, DK-2600 Glostrup, Denmark

生产地址: Produktionsvej 42, DK-2600 Glostrup, Denmark

联系方式

电话: +45 44 85 95 00

传真: +45 44 85 95 95

网址: www.dako.com

售后服务单位/代理人: 安捷伦科技(中国)有限公司

售后服务单位/代理人住所: 北京市朝阳区望京北路3号研发中心(一期)3层3-1至3-3室

联系方式: 800-820-3278; 400-820-3278

【医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号】

国械备 20151292

【说明书核准及修改日期】

核准日期: 2015 年 08 月 26 日

修改日期: 2017 年 11 月 27 日