

手把手教你轻松掌握 诺和笔® 6 数字化功能



操作视频二维码

如您有进一步操作问题，
请致电：

诺和关怀热线

400-810-2299（手机拨打）

800-810-2299（座机拨打）

智云热线

400-921-6690

第一步：绑定手机APP

1、扫描二维码，下载APP并注册



2、诺和笔® 6 绑定APP

1

点击“糖尿病管理”



2

点击“用药”



3

点击“绑定胰岛素笔”



4

点击“诺和笔® 6”



5

点击“立即绑定”

诺和笔®6


步骤一
准备好诺和笔和手机
注意手机NFC位置



步骤二
点击[立即绑定]按钮，开始设备绑定

立即绑定

温馨提示：诺和笔®6贴近手机NFC背面功能位置处
NFC位置请查阅手机说明书，以下内容仅做示例展示

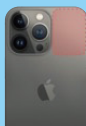

苹果系统
(如：苹果手机)



安卓系统
(如：华为手机)

6

点击“选择注射的
胰岛素种类”
(示例：诺和锐®)

选择注射的胰岛素

8条用药记录即将同步，请选择注射的那种胰岛素

☒ 诺和锐® 

☐ 诺和达® 

☐ 诺和锐®30 

☐ 诺和平® 

7

同步数据成功，
完成绑定

用药



诺和笔®6
诺和锐®

同步数据

用药方案 设置提醒 >

诺和锐® 记录一下

一天三次 / 1次10U

提醒时间 | 9:00

同步数据成功

用药记录 用药统计

第二步：同步注射数据

1

进入“用药”界面
点击“同步数据”



2

进入同步引导页



3

点击“选择使用的
胰岛素种类”



4

成功同步数据



第三步：查看用药统计

1

点击“用药统计”



2

选择“使用的
胰岛素种类”
(示例：诺和锐®)



3

查看每日用药总量



4

查看当日用药明细



- 点击柱状图展示当日用药明细
- 可左右滑动柱状图查看近期数据

提醒用药功能

1

点击“添加提醒”



2

点击
“胰岛素用药方案”



3

设置用药情况
打开“用药提醒”后
点击“保存”



4

到时提醒

