


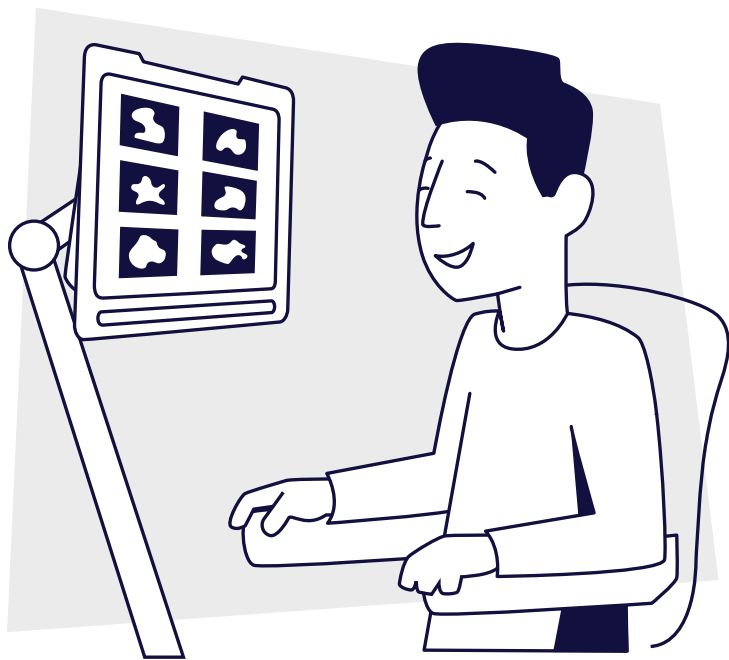


TD Pilot (派乐)眼控仪

入门指南

开始使用

装箱清单

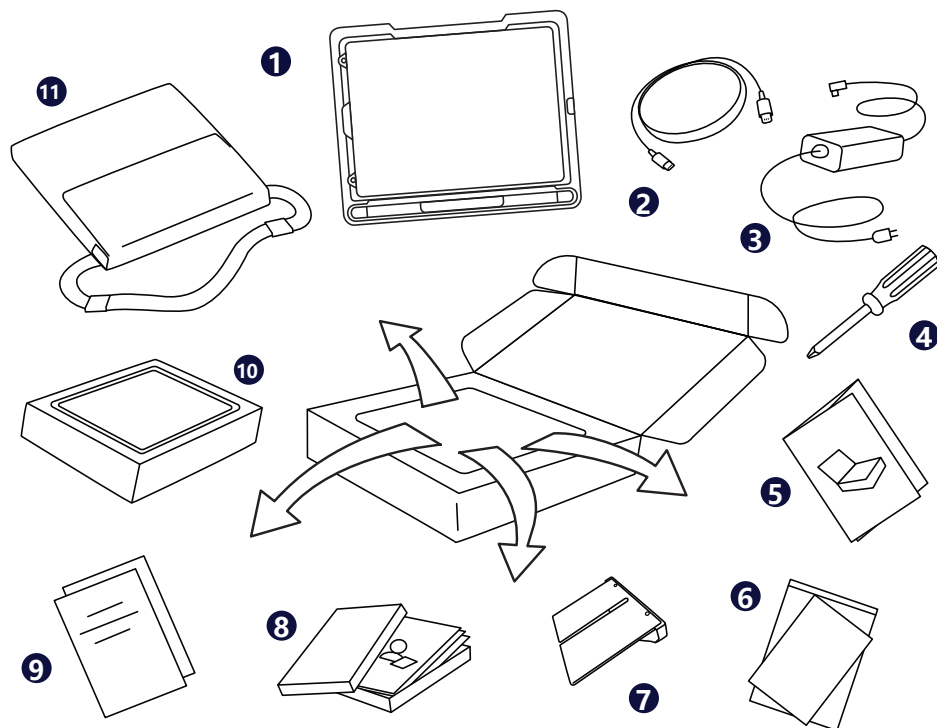

❶ 设备主机

(iPad Pro 12.9、TD Pilot (派乐)
眼控仪底座、保护壳、ConnectIT/
Rehadapt 安装板、USB-C 至
USB-C 连接线缆、预装电池)

❷ 连接线缆

Lightning – USB C

❸ 充电器

❹ 螺丝刀

❺ 入门指南

❻ 安全与合规文件

❼ 可调节支架

❽ TD Snap Core First 培训卡片

❾ 保修资料

❿ iPad 盒

(含 iPad 充电器)

⓫ 便携包

开始使用

该《入门指南》适用于两种人群：将要使用设备进行沟通的用户，可以用手操控或移动设备的助手。带有手形图标的部分必须由助手完成。带有眼睛图标的部分应当由用眼睛操作设备的用户完成。在完成本指南中的步骤之后，用户将能够通过注视在 TD Snap 应用程序内沟通。

助手




用户



开机

- 1 将充电线连接至位于 TD Pilot（派乐）眼控仪侧面的充电口，然后将电源线插入插座内。
- 2 按下位于 TD Pilot（派乐）眼控仪背面的电源按钮开机。
- 3 按下 iPad 上的电源按钮开机。
- 4 按照屏幕上的提示设置 iPad。

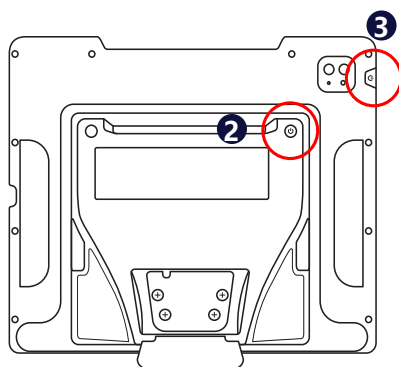

按照提示完成对 iPad 的设置之后，您将会看到包含应用程序图标的主屏幕。

设置 TD Snap


- 1 选择 **TD Snap** 应用程序。




- 2 按照提示设置 TD Snap 用户，请选择“眼控”访问方式。

安装与放置


使用眼控仪之前，将用户调整到一个他觉得舒适的姿势。用户如果佩戴眼镜，请保持镜片清洁。

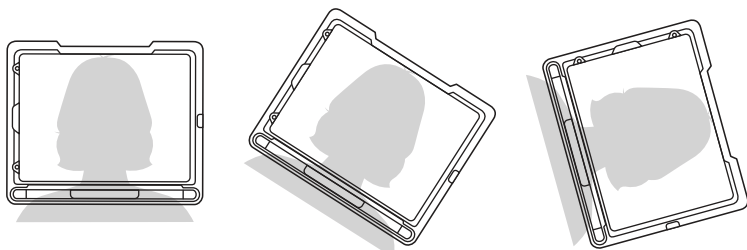

将 TD Pilot (派乐) 眼控仪安装到支架上，或者放置到一个比较平整的平面上，使其达到用户视线或者略低于视线的高度。如果用户头部斜向左侧或右侧，应将 TD Pilot (派乐) 眼控仪倾斜以适应用户。务必确保屏幕表面角度与用户面部角度匹配。大多数用户当坐在桌子或办公桌前时，需要将 TD Pilot (派乐) 眼控仪放置在高于桌子表面的位置。

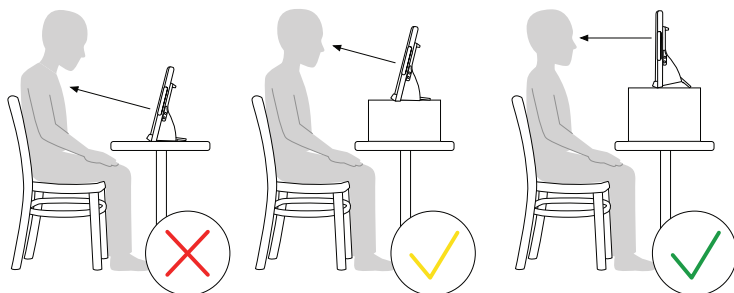

在进入到校准页面时，您需要根据跟踪状态框内的反馈信息再次调整设备位置，让它适配于用户当前的姿势。

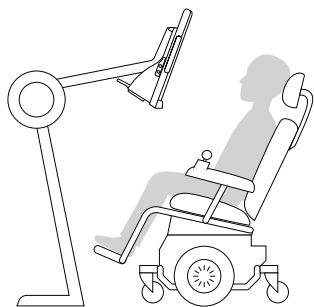

注意：支架系统能精确地调整设备位置，让用户能够在最佳的位置上使用设备。支架系统包含了不同的种类，如：落地支架、轮椅支架和桌面支架。扫码了解支架系统的详细信息。



grco.de/bcnrv2

校准

- 1 点按 **CoPilot** 应用程序。



- 2 按照 CoPilot 屏幕上的提示校准眼控仪。
- 3 当用户完成校准后，从屏幕底部向上滑动，以返回主屏幕。

准备就绪!



此时 TD Pilot (派乐) 眼控仪准备就绪! 启动 TD Snap 开始沟通。



注意: 如果您想要使用 TD Snap 之外的其他应用程序，请参阅 TD Pilot (派乐) 眼控仪用户手册上的辅助触控部分。查找 TD Pilot (派乐) 眼控仪用户手册的方式：TD CoPilot > 设置 > 帮助 > 用户手册。

转至 TD Snap 培训卡片

使用 TD Pilot (派乐) 眼控仪附带的 TD Snap Core First 培训卡片继续设置。

培训卡片可带您了解 TD Snap 的特点、基本编辑、数据备份以及帮助您将 TD Snap 融入日常生活的一些活动。



提示: 可通过 TD Snap > 编辑 > 用户 > 访问方式自定义您的 TD Snap 眼控设置。

其他资源

扫描二维码或者使用链接



Tobii Dynavox
qrco.de/bcnrp1



Apple
qrco.de/PCEccRU



myTobiiDynavox
qrco.de/bcnrrB



**Tobii Dynavox
学习中心**
qrco.de/bcnrv3



**TD Pilot (派乐)
眼控仪支持页面**
qrco.de/bcnrss



文档
TD CoPilot > 设置 >
帮助



**TD Pilot (派乐)
眼控仪用户手册**
qrco.de/bcnru7



中国技术支持
0512-69362880