

快速指南

BOSE

HEARPHONES™
对话增强耳机

请阅读并保留所有安全和使用说明。

①



BOSE HEAR

在智能手机上设置


Apple 用户：从 App 商店下载 Bose Hear 应用。

注意：您也可使用 iPad 或 iPod touch 进行设置。



Android™ 用户：从 worldwide.Bose.com/Support/Hearphones 下载 Bose Hear 应用

②

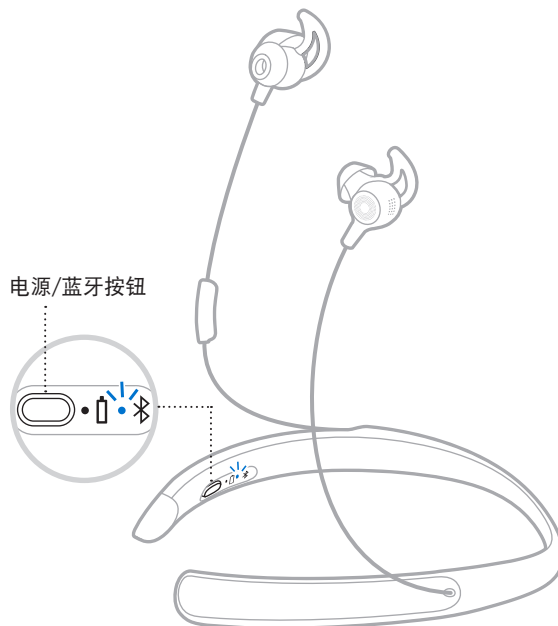


打开 HEARPHONES™ 的电源

按下电源/蓝牙按钮。

首次开机时，电池指示灯会亮起且蓝牙指示灯呈蓝色光闪烁。

③

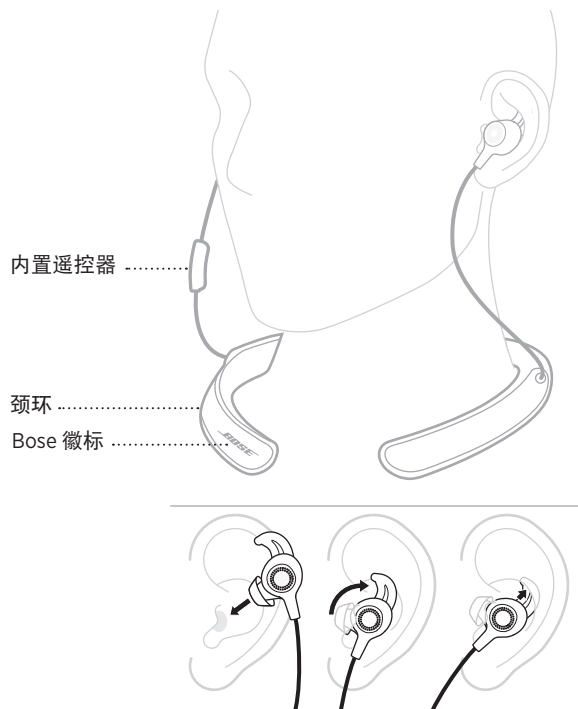

佩戴 HEARPHONES™


A. 将颈环环于脖颈。

注意： 确保内置遥控器在右侧且 Bose 标志朝上。

B. 将耳机放入耳朵中。

注意： 关于如何选择正确的 StayHear+ 耳塞尺寸的更多信息，请参见第 5 页。

④

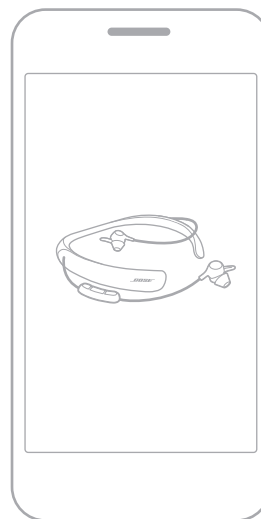


使用 BOSE HEAR 应用以完成设置

A. 打开 Bose Hear 应用。

B. 按照应用的说明连接 Hearphones™。


HEARPHONES™ 组件

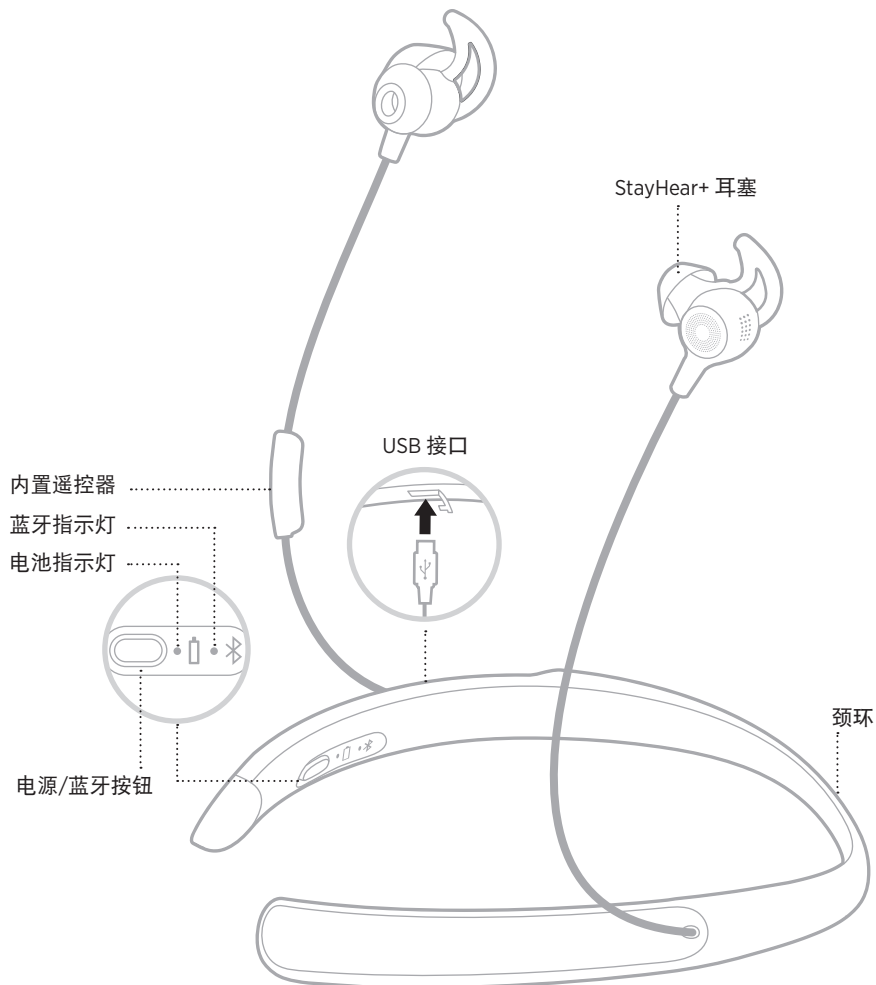

正确的 STAYHEAR+ 耳塞尺寸

耳机随附有中号 StayHear+ 耳塞。包装盒内有小号和大号耳塞。如果中号耳塞感觉太松，请尝试使用大号耳塞。如果耳塞感觉太紧，请尝试使用小号耳塞。


注意：人的耳朵千差万别。也有可能您的两只耳朵尺寸不同，因此您需要进行试验，直到找到恰好的尺寸。

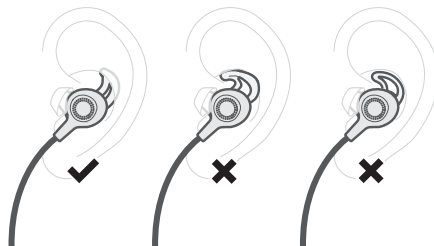


更换 STAYHEAR+ 耳塞（如果需要）

- A. 用一只手握住耳机，另一只手轻轻地将耳塞底座从耳机上剥下。

注意：为了防止撕裂，请勿拖拉耳塞的翼部。

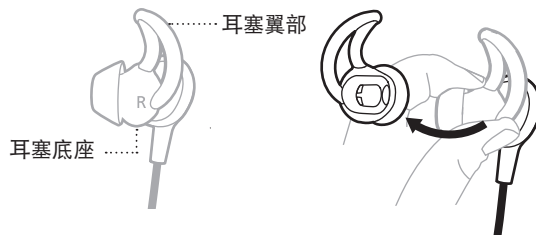


- B. 将耳机出音孔滑到新耳塞的开口，然后将其卡入到位。

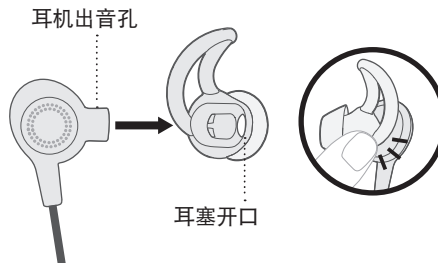

查看快速入门视频教程

worldwide.Bose.com/Hearphones_Eartips

控制外界音量和方向性

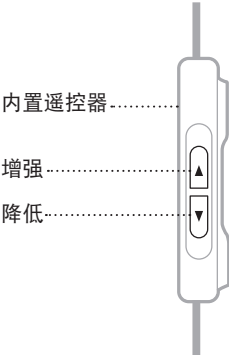


更改外界音量

功能	措施
增强外界音量 (放大外界声音)	按下 ▲。
降低外界音量 (降低外界声音)	按下 ▼。

注意：您也可使用 Bose Hear 应用控制外界音量。

更改方向性


同时按住 ▲ 和 ▼ 直到听到首选模式的语音提示。

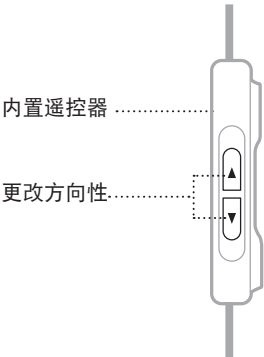

方向性模式	说明
全向 (低频声)	全方位听声音。
前向 (中频声)	专注于与多人进行对话，并降低背后的噪音。
定向 (高频声)	在嘈杂环境中专注聆听某人的对话。


注意：您也可使用 Bose Hear 应用更改方向性。

控制媒体播放和呼叫功能

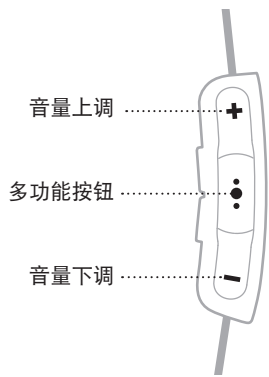

功能	措施
播放/暂停音频	按下“多功能”按钮 ●●。
跳到下一曲目	按两次 ●●。
跳回上一个曲目	按三次 ●●。
接听/结束通话	按下 ●●。
拒绝接听来电	按住 ●●。

为 HEARPHONES™ 充电

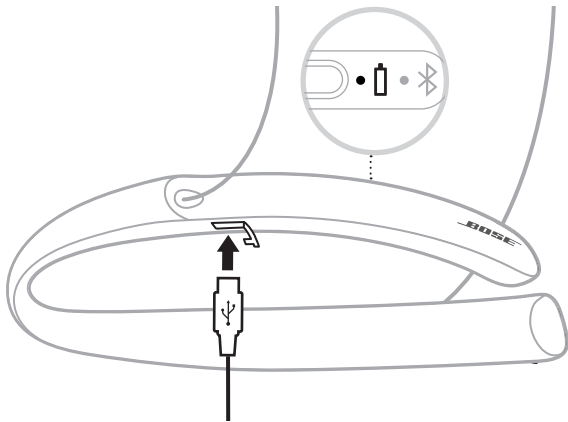

- 
完全充满
- 
电量不足
- 
需要充电
- 
正在充电
- 
充电错误

请阅读并保留所有安全和使用说明。

有关 Bose Hearphones™（包括附件和替换件）的更多信息，请参阅 worldwide.Bose.com/Support/Hearphones 上的用户指南或联系 Bose 客户服务中心以获取纸质副本。请访问：worldwide.Bose.com/Support/Hearphones 查看说明视频。

重要安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请保留这些说明。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 请勿在水附近使用本设备。
6. 请仅用干布进行清洁。
7. 只能使用制造商指定的附件/配件。
8. 在雷雨天气或长时间不用时，请切断本设备电源。
9. 任何维修事宜均应向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

警告/小心

- 请勿长时间在高音量下使用耳机。
 - 为了避免听力受损，请以舒适、适度的音量使用耳机。
 - 先将设备音量调低，然后再戴上耳机，之后再逐渐调高音量，直到达到舒适的听觉水平。
- 如果耳机发出不正常的杂音，请勿使用。在此情况下，请关闭耳机，然后联系 Bose 客户服务中心。
- 如在驾驶时通过本耳机进行通话，应谨慎使用，并遵守关于手机和耳机使用的适用法律。有些地方的法律对在驾驶时使用此类产品有特别限定，如单耳承的配置。请勿在驾驶时将耳机用作其他用途。
- 切勿在无法听到周围的声音即可能对自己或他人造成危险时，将耳机“外界音量”设置为低于 0 或选择“定向”或“前向”的麦克风方向性（例如，骑车，在道路，施工现场或铁路附近步行等）。
 - 根据情况调节耳机，以保证能够听到周围的声音，包括报警和警告信号。
 - 了解使用耳机时作为提醒或警告的声音如何相应变化。
 - 请注意，使用耳机时可能会更难识别声音的方位，特别是使用“定向”或“前向”方向性时。



包含小部件，可能会导致窒息。不适合 3 岁以下的儿童使用。



本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。

- 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受淋或受潮。
- 本产品不得受液体淋溅或喷洒，不得将装有液体的物体（如花瓶等）置于本产品上或本产品附近。
- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 仅在经过相关部门批准且符合本地监管要求的电源（如 UL、CSA、VDE、CCC）条件下使用本产品。
- 请勿使含有电池的产品过热（例如请避免阳光直射并远离火源等）。

监管信息

请勿尝试拆除产品内的可充电锂电池。请联系当地的 Bose 经销商或其他有资格的专业人士进行拆除。

中国危险物质限用表

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
	有毒或有害物质和元素					
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
连接线	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 条款。						
0：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。						

请填写以下内容，留作记录

序列号位于包装盒上。型号位于右耳机上。

序列号：_____

型号：_____

请将收据与用户指南存放在一处。现在是您注册 Bose 产品的好机会。您可以访问 <http://global.Bose.com/register> 轻松完成注册。

生产日期：序列号中第八位数字表示生产年份；“9”表示 2009 年或 2019 年。

中国进口商：博士视听系统（上海）有限公司，中国（上海）自由贸易试验区，日樱北路 353 号，9 号厂房 C 部

法律信息

这是个人声音放大器，不是助听器。它不能代替助听器。

Android 是 Google LLC. 的商标。

Apple、Apple 徽标、iPad、iPhone 和 iPod 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。已从 Aiphone K.K 获得“iPhone”商标在日本的使用许可。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。

Bluetooth® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose Corporation 根据许可规定使用上述标记。

N 标志是 NFC Forum, Inc. 在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。

使用“Apple 专用”标记表示此附件的设计专门用来与标记中认定的 Apple 产品相连，并且通过了开发商的认证，符合 Apple 的性能标准。Apple 对此装置的工作或其与安全和规章标准的符合性概不负责。

Bose 和 Hearphones 是 Bose Corporation 的商标。

Bose 公司总部：1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其它方式使用本指南的任何部分。



产品保修卡

非常感谢您选购Bose产品。

保修范围 / 期限:

产品保修期自相关购买发票或收据的出具之日起计算，具体期限及保修政策请参阅Bose官网 global.Bose.com/warranty

博士视听系统（上海）有限公司（以下简称“Bose”）将把产品以全新状态、使用原始包装形式交付给您，且由您在正常情况下使用，不存在制造、材料和工艺上的缺陷。为了提供保修服务，Bose可能要求你提供购买凭证，包括但不限于收据或销售发票和产品保修卡。

服务热线：400-880-2266（开通手机业务，主叫方仅付当地市话费）



worldwide.Bose.com/Support/Hearphones

Bose 客户服务中心：400-880-2266

保修免责范围：

因不当使用或维修、正常磨损、商业用途、事故或外部原因引起的故障或破损、设备上带有序列号的标签污损、涂改、遗失等；从非授权渠道/经销商处购买的产品；未经授权对产品进行维修、修改或定制等。

本保修卡凭证遗失后不再补发，请与销售凭证一起妥善保管。

本保修卡仅于中国大陆地区使用。

其他未注明事项按国家规定执行。



Bose客户服务中心

地址：上海市闵行区顾戴路2337号D塔楼5层

邮编：201100 网址：www.bose.cn

服务热线：400-880-2266（开通手机业务，主叫方仅付当地市话费）



832171-0010