

Panasonic

ideas for life

2012/春

オーラルケア 総合カタログ

音波振動ハブラシ/ジェットウォッシャー
ステインクリーナー



パナソニックホームページ panasonic.jp

ランチ磨きは、ポケットドルツ。



Panasonic Beauty

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。



むし歯、歯周病の原因No.1は「歯垢」です。

むし歯や歯周病など、お口のトラブルの原因である歯垢は、食べ物カスの中の糖分と細菌が結びついた、バイ菌の固まりのようなもの。そのままにしておくと歯の表面を溶かしてむし歯になったり、歯周病（歯肉炎・歯周炎）をまねいたりしてしまいます。




歯垢（電子顕微鏡像）


お口のトラブル防止には、ブラッシングを基本とした歯垢除去が有効です。

日本人の歯は複雑なカタチといわれています。


日本人が歯垢を磨き残しやすい部分

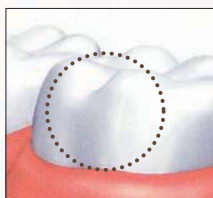

特に奥歯が丸みを帯びている。

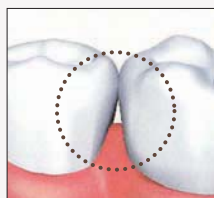

歯と歯の間に空間がある。

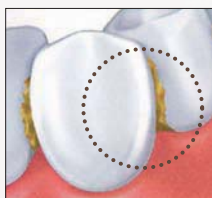

歯並びの悪い人が多い。



日本人の歯

- 歯並びが曲線的
- 歯面が丸い
- 歯にすき間がある



欧米人の歯

- 歯並びが直線的
- 歯面がフラット
- 歯にすき間が少ない

日本人の口腔内環境に合わせた、
ブラシの「カタチ」「大きさ」「動き」が必要です。

歯磨きは硬い組織（歯）と 柔らかい組織（歯ぐき）を同時に磨く行為です。

歯を磨こうと
ゴシゴシ
磨きすぎると
歯ぐきに負担が
かかります。



歯 = 硬組織

歯ぐき = 軟組織

歯ぐきに負担をかけずに
しっかり磨くことが大切です。



歯にドルツ



ドルツの3つのこだわり。

1 歯ぐきにやさしく歯垢除去 音波振動^{※1}バス(ヨコ)磨き

ステインオフドルツ

ドルツイオン

ドルツリニア

2 当てるだけで、すばやくツルツル リニアモーター

ステインオフドルツ

ドルツイオン

ドルツリニア

3 小さな口でも、すみずみまで届く 日本人の口に合った小さなヘッド

ドルツは、日本人の歯のために開発された音波振動^{※1}ハブラシ。
歯ぐきを傷めず歯垢を除去し、手磨きを超えるツルツル感へ。

ドルツシリーズは、8020推進財団[※]認定ブランドです。

※ 日本歯科医師会が提唱し、厚生大臣(現厚生労働大臣)の許可を得て設立されました。(平成12年12月1日)

「80歳になっても自分の歯を20本以上保とう」

ずっと食べ物をおいしく。ずっと健康に美しく。

日本歯科医師会と厚生労働省は8020運動を推進しています。



● Doltz(ドルツ)は、「Do Lasting Total-oral care with Zest(気持ちよく続けられる歯と歯ぐきのトータルケア)」の略(造語)です。

※1 音波領域内での振動

● 写真、イラストは全てイメージです。



おそと ランチの後は音波^{※2}でツルツル

シャイニーグラデの5色を展開。
外出先で、エレガントな女性らしさを演出します。



黒と白のシンプルな2色は、
道具にこだわる男性も満足できる上質感です。



音波振動^{※1}ハブラシ

ポケット

Doltz [ドルツ]

EW-DS12

直径約0.3mm幅振動磨き
約16,000ブラシストローク/分

5~6 ページ

Kids 子どもも音波^{※2}できちんとキレイ。



たいせつな乳歯を守るため、
しあげ磨きをしっかりサポートします。



音波振動^{※1}ハブラシ

ポケット

Doltz [ドルツ]

しあげ磨き用

NEW EW-DS32

約0.3mm幅振動磨き
約12,000ブラシストローク/分

7 ページ



ライト付き



学校でも、おうちでも。
子どもひとりで上手に磨けます。



音波振動^{※1}ハブラシ

ポケット

Doltz [ドルツ]

ひとり磨き用

NEW EW-DS12

約0.3mm幅振動磨き
約16,000ブラシストローク/分

8 ページ



ジェット水流で、歯と歯ぐきを健やかに。



ジェットウォッシャー ドルツ
EW-DJ40

●携帯に便利な充電式。

14 ページ



ジェットウォッシャー ドルツ
EW1250P

●長時間使える交流式。

14 ページ

ステイン(着色汚れ)を除去し、輝く白い歯へ。



ステインクリーナー ドルツ
EW-DC11

●どこでも使える乾電池式。

14 ページ

おうち 朝と夜はおうちでしっかり歯垢除去

毎日の歯磨きも、気になる歯のくすみのお手入れも、この1台におまかせ。

ステイン除去 & リニア音波振動※1

音波振動※1ハブラシ

ステイン **オフ**

Doltz 【ドルツ】

EW-DL21

約1.2mm幅バス(ヨコ)磨き
約20,000ブラストローク/分

9~10 ページ

しっかり歯磨きをしたい方へ。
専用ブラシで歯ぐきも心地よくケアできます。

リニア音波振動※1

音波振動※1ハブラシ

Doltz 【ドルツ】

リニア

EW-DL11

約1.5mm幅バス(ヨコ)磨き
約20,000ブラストローク/分

13 ページ

おうちでしっかりオーラルケア。
とくに歯ぐきの衰えが気になる方におすすめです。

イオン & リニア音波振動※1

音波振動※1ハブラシ

Doltz 【ドルツ】

イオン

EW-DE41

EW-DE21

約0.9mm幅バス(ヨコ)磨き
約28,500ブラストローク/分

11~12 ページ

歯磨きをもっと手軽に。
電動ハブラシをはじめて使う方にもぴったりです。

音波振動※1ハブラシ

Doltz 【ドルツ】

スリム

EW-DM41

直径約0.45mm幅振動磨き
約26,000ブラストローク/分

13 ページ

ケアの目的に合わせた機能で選べる ドルツシリーズ

商 品		搭 載 機 能				
		イオンパワー※3	ステイン除去	リニアモーター	バス(ヨコ)磨き	音波振動※1
乾電池式	ポケットドルツ					●
	ステインオフドルツ		●	●	●	●
充電式	ドルツイオン	●		●	●	●
	ドルツリニア			●	●	●
	ドルツスリム					●

おそとでもおうちでも、
きれいな歯、輝く笑顔へ

Doltz 【ドルツ】

※1 音波領域内での振動 ※2 音波振動 ※3 歯面にマイナスイオンを引き寄せる力

音波振動※1ハブラシ
ポケット
Doltz [ドルツ]



おそと

ランチの後は
 音波※2でツルツル

スタイリッシュに携帯できる。
 キレイに差がつく、全7色。

毎日持ち歩くものだから、
 もっと楽しく、美しく。

誰かに見せたいくなるスタイリッシュデザインは、
 もうファッションアイテムのひとつ。

お口のキレイはもちろん、
 毎日の暮らしまで美しく輝かせてくれるでしょう。



ポーチにすっきり、携帯に便利

衛生的に携帯・保管ができる
 キャップ付で、ポーチにそのまま
 収納できます。

どこでも持ち運べる
 全長**16cm**



● ポーチは付属または、別売はして
 おりません。

violet

音波振動※1ハブラシ ポケットドルツ

EW-DS12

-K(黒) -N(ゴールド) -P(ピンク) -PN(ピンクゴールド)
 -V(バイオレット) -VP(ビビットピンク) -W(白)

オープン価格※(乾電池別(単4形アルカリ乾電池※3×1本)
 または、(単4形充電式電池※3×1本)

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

寸法：高さ16×幅1.65×奥行1.8cm


質量：約30g(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)



音波
 振動※1



水洗い
 OK

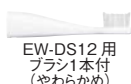

EW-DS12用
 ブラシ1本付
 (やわらかめ)

● 普通のハブラシと同じように、手で動かして磨くことで、ブラシヘッドの音波振動※1により、
 毛先がすみずみに届きやすくなります。



(バイオレット) (ビビットピンク) (ピンク) (ピンクゴールド) (ゴールド)

(白)

(黒)

高級感あふれるシャイニーグラデ

マット塗装

⚠ 裏表紙に掲載の「安全に関するご注意」をご確認のうえ、ご使用ください。



歯垢除去 心地よくスピーディに磨ける

毎分約16,000ブラシストロークの微細な音波振動※1。同じ磨き時間でも、手磨きよりもツルツルの歯へ。時間がないお昼休みにぴったりです。



便利 本体丸洗いOK、充電式電池も使える

単4形アルカリ乾電池※3、または単4形充電式電池※31本でOK。毎日の充電の手間がありません。また国内はもちろん、海外でも活躍します。

(使用時間:1日1回2分使用で約3か月)



※3 本体丸洗いOK



単4形アルカリ乾電池※3

ブラシ 小さな口でも磨きやすい

日本人の小さな口のすみずみまで届くコンパクトヘッド。ダブルエッジ形状のブラシで歯間や奥歯の奥までしっかり磨けます。



運転音 周りを気にせず使える 約51dB

どこでも気がねなく使えるように、電動ハブラシ特有の音を軽減しました。(当社測定方法による平均音圧値 参考:EW-DL11 約64dB)

音波振動※1ハブラシ

ポケット

Doltz

しあげ磨き用




※1 ソフトな音波振動で、乳歯や
歯ぐきにやさしくしあげ磨き。



はじめての
電動ハブラシに。
しあげ磨きに
オススメ♪

歯垢
除去 乳歯や歯ぐきにやさしく磨ける
ソフトな音波振動※1磨き

やわらかい
乳歯の
エナメル質や
歯ぐきは
傷つきやすい

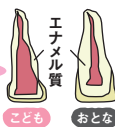

約12,000ブラシストロークのやさしい
音波振動※1で、小さな子どもの
やわらかな歯ぐきや、エナメル質
の薄い乳歯もやさしく磨けます。

ブラシ 奥歯までしっかり見ながら磨ける
ライト付きコンパクトヘッドブラシ



子どもの小さな歯にフィットするフラット形状のコン
パクトヘッドブラシに、口の中を明るく照らすライトを
搭載。歯の裏や奥歯など、暗くて見えにくい部分の
磨き残しを防ぎます。

便利 使いやすい
背面動作スイッチ

スイッチをグリップの背面に配置。
子どもの歯を磨きながらの入切もかんたんです。

●動作スイッチを押すたびに
ライト「ON」→ライト「OFF」→動作「切」と切り替わります。

音波振動※1ハブラシ ポケットドルツ

NEW

EW-DS32

くまさんデザインの
かわいい
キャップ付！
-A(青) -P(ピンク)
オープン価格※
(乾電池別(単4形アルカリ乾電池※2×1本)
または、(単4形充電式電池※2×1本)
※ オープン価格商品の価格は販売店に
お問い合わせください。

寸法：高さ16×幅1.8×奥行2cm

質量：約35g(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)



音波
振動※1



EW-DS32 用
ブラシ1本付
(やわらかめ)

● 普通のハブラシと同じように、手で動かして磨くことで、ブラシヘッドの音波振動※1により、
毛先がすみずみに届きやすくなります。



子どもの生涯の
幼児期のオーラルケア

● 難しいしあげ磨きには、口内を照らすライトや
ソフトな音波振動※1磨きでアシストしてくれる
「ポケットドルツしあげ磨き用」
をおすすめしています。

ポケットドルツキッズで、
お子さまの口内環境の
土台をしっかりとつって
あげてくださいね。

小児歯科医
今井りえ 先生



⚠ 裏表紙に掲載の「安全に関するご注意」をご確認のうえ、ご使用ください。

音波振動※1ハブラシ

ポケット

Doltz

ひとり磨き用



子どものひとり磨きを、
音波振動※1でしっかりアシスト。



歯垢
除去

子どものひとり磨きをアシストする
音波振動※1磨き




毎分約16,000ブラシストロークの
微細な音波振動※1。手磨きの苦手
な子どもでも、磨き残しを少なくしっかり
磨けます。

ブラシ

小さな口のすみずみまで毛先が届く
コンパクトヘッドブラシ

子どもの小さな口も磨きやすい
コンパクトヘッド。ダブルエッジ
形状のブラシで、歯間や奥歯の
奥までしっかり磨けます。

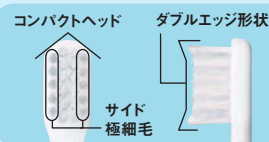

便利

子どものひとり磨きを応援する
「じょうずな はみがきシート」「おなまえシール」入り

はみがきのコツを学べる「じょうずな はみがきシート」と
学校にも安心して持って行ける「おなまえシール」を同梱。

● EW-DS12 (P5-6) と機能は同じです。ひとり磨き用には
「じょうずな はみがきシート」「おなまえシール」が入っています。

じょうずな
はみがき
シート



おなまえ
シール

歯を考えるなら、
はとても重要です。

● 生え始めの永久歯、特に6歳臼歯は弱く
むし歯になりやすいので仕上げ磨きが必要。
また、お子さまにとっては歯みがきが難しい時
期で、「ポケット ドルツキッズ(ひとり磨き用)」
を使用して、子どもひとりで上手に磨ける
習慣をサポートしてあげるとよいでしょう。

6歳臼歯とは

犬歯の後ろに最初の永久歯として
生えてくるのが6歳臼歯。



-PKD(ピンク)

-AKD(青)

音波振動※1ハブラシ ポケットドルツ

NEW

EW-DS12

-AKD(青) -PKD(ピンク)

オープン価格※

(乾電池別〈単4形アルカリ乾電池※2×1本〉
または、〈単4形充電式電池※2×1本〉
※ オープン価格商品の価格は販売店に
お問い合わせください。)

寸法：高さ16×幅1.65×奥行1.8cm


質量：約30g(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)



音波
振動※1



水洗い
OK

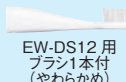

EW-DS12 用
ブラシ1本付
(やわらかめ)

● 普通のハブラシと同じように、手で動かして磨くことで、ブラシヘッドの音波振動※1により、
毛先がすみずみに届きやすくなります。

⚠ 裏表紙に掲載の「安全に関するご注意」をご確認のうえ、ご使用ください。

※1 音波領域内での振動 ※2 パナソニック製をおすすめします。 ● 写真、イラストは全てイメージです。

音波振動※1ハブラシ

ス테인オフ
Doltz



おうち

朝と夜はおうちで
しっかり歯垢除去

ス테인(着色汚れ)除去も歯垢除去もこれ1台。



-VP(ビビッドピンク)

-P(ピンク)

-W(白)

ス테인ケア
アタッチメント付



音波振動※1ハブラシ ステインオフドルツ

EW-DL21

-P(ピンク) -VP(ビビッドピンク) -W(白)

オープン価格※

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スピーディモード

ソフトモード

ス테인ケアモード

対応電圧：AC100～120V(A-2プラグ地域対応)

寸法：高さ23.5×幅2.4×奥行2.8cm

充電表示：充電完了/充電中(約8時間フル充電で約60分間使用可能)

質量：約120g(ブラシ含む)



リニア※1
音波振動



ダブルエッジブラシ
ソフト1本付

ス테인ケア
アタッチメント1本付

ス테인クリーンペースト
(販売名：ドルツはみがきCP)1本付

これからはおうちでステイン除去。もっと輝く白い歯へ。

歯のくすみ。

原因の多くは“ステイン(着色汚れ)”です。

歯は、飲食物に含まれている着色物質やタバコのやにによりくすんできます。それはステイン(着色汚れ)と呼ばれ、このステインを取りのぞくことで、本来の美しさを取り戻せるのです。

■ 着色物質の多い物



コーヒー・紅茶




緑茶



赤ワイン



カレーなど

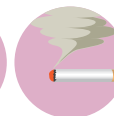

タバコのやに

ステイン除去 おうちで手軽にステイン除去できる

通常のブラッシングではなかなか落ちないステインをしっかり除去。

ステインケアモードで、専用のアタッチメント、ペーストを使うと、いつもの歯磨きでは落とすきれないステインまで除去できます。ケアの目安は2週間に1度です。



ステインケア アタッチメント

歯面用ラバー
歯面のケアに
使用します。

歯間用ラバー
歯と歯の間、
歯並びが悪い
ところなどのケア
に使用します。

アタッチメントの交換時期について

- 月2回使用で、6ヵ月(12回使用)が交換の目安です。お手入れする歯の本数や、着色汚れの付き具合によって異なります。
- また、6ヵ月以内でも、ゴムの先が折れたり、ゴムが摩耗したら交換してください。

清掃成分をプラスしてステインの除去力アップ。


着色汚れを取れやすく、「ピロリン酸ナトリウム」



着色汚れは歯の表面に強固な力で付着し、通常の歯磨きでは落とせません。




清掃助剤「ピロリン酸ナトリウム」がステイン汚れを浮かせて取れやすくします。

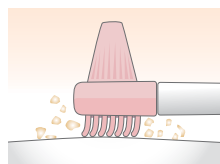


歯面用ラバーが歯面とステインに密着し、しっかり除去。

すき間の着色汚れに、「スクラブシリカ」

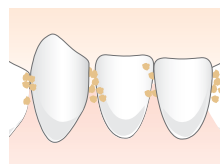

歯と歯のすき間に付着したステインはさらに落とすににくい汚れです。

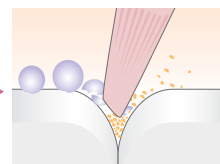


顆粒状の研磨剤「スクラブシリカ」がすき間に入り込みます。

注) 生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。

歯垢除去 音波振動^{※1}バス(ヨコ)磨き

歯ぐきにやさしくしっかり磨ける。

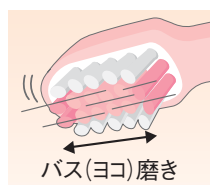


バス(ヨコ)磨き

リニア駆動による、高速微細なバス(ヨコ)磨き。歯ぐきを傷めず、歯と歯の間や、奥歯の奥の歯垢まですばやくしっかり除去します。

ブラシ ダブルエッジブラシ

すみずみまでやさしく磨ける。

日本人の小さな口のすみずみまで届くブラシ形状。歯間や奥歯の奥までしっかり磨けます。

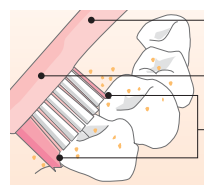

奥歯の奥までしっかり届く
ロング&カーブネック
お口にやさしい
ラバーヘッド
歯にフィットしやすく、
すみずみまで届きやすい
ダブルエッジ形状

※1 音波領域内での振動 ※2 AC100~120V電源(A-2プラグ地域)対応 ●ステインケアには専用のステインクリーンペーストをご使用ください。 ●写真、イラストは全てイメージです。

音波振動※1ハブラシ

Doltz 【ドルツ】

イオン

イオンとリニアの力で、歯ぐきにやさしく歯垢除去。



おうち

朝と夜はおうちで
しっかり歯垢除去



EW-DE41-S(シルバー調) EW-DE21-A(青)



(イオン用 2Way シリコンブラシは EW-DE41のみ付属)

音波振動※1ハブラシドルツ イオン

EW-DE41/EW-DE21

EW-DE41-S(シルバー調) EW-DE21-A(青)

オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

パワフルモード

ソフトモード

歯ぐきケアモード(EW-DE41のみ)

対応電圧：AC100～240V(自動電圧切替付)

充電表示：充電催促/充電完了/充電中(約8時間フル充電で約60分間使用可能)

寸法：高さ23.5×幅2.5×奥行3cm

質量：約130g(ブラシ含む)



リニア※1
音波振動



磨き時間
お知らせ
タイマー



ソフト
スタート
機能



イオン用ダブルエッジ
ブラシ 1本付



やわらか歯間®ブラシ1セット付



イオン用 2Way シリコン
ブラシ1本付 (EW-DE41のみ)



ブラシスタンド付



携帯ケース付
(EW-DE41のみ)

おうちでオーラルケアがしっかりできる。


歯垢除去 イオンとリニアの力で歯垢を除去



イオンと
リニアの力で歯と
歯垢のつながりを
ゆるめ※3、歯垢を
はじき飛ばす。



イオンの力

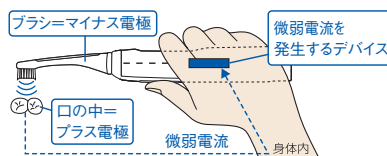


本体にあるイオンパネルを握りブラッシングすることで、本体から口腔内へ微弱電流が発生。歯をプラスに帯電し、歯の表面付近にマイナスイオンを引き寄せます。

歯にマイナスイオンを引き寄せる。



口の中に入れるとイオンランプが点灯。イオンパワー※4をお知らせします。(電源ONの状態では点滅)

リニアの力

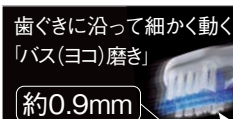

歯ぐきにやさしくしっかり磨ける
リニア音波振動※1。

スピーディ&パワフルに歯垢をはじき飛ばす、約28,500ブラシストローク/分のリニア音波振動※1。わずかに約0.9mm幅のバス(ヨコ)磨きで、歯ぐきにやさしく磨けます。

イオンとリニアの力で歯間部まで歯垢除去効果アップ

歯間や歯周ポケットは磨きにくく、歯垢がたまりやすい部分です。EW-DE41は従来のイオンなしタイプや、電極がひとつのイオンタイプに比べ、歯間部の歯垢除去率の向上が確認されています。これはダブルの電極により、イオンが広範囲に行き届くためだと考えられます。健やかな歯を保つために有効な手段のひとつと言えるでしょう。 福岡歯科大学 埴岡隆 先生



ブラシ 歯・歯間・歯ぐきをケア

(ドルツ イオンタイプの替ブラシラインアップ)

付属品

- 奥歯の奥、歯間を磨く

イオン用

ダブルエッジブラシ

小さめヘッド、エッジ植毛で歯と歯の間や奥歯の奥までしっかり磨けます。



- 歯間の奥まで入り込む

やわらか歯間® ブラシ

歯ぐきを傷めにくい、ゴム状素材のブラシ。歯ぐきが下がって広がった歯間をしっかりとケアします。



- 歯ぐきをケアする ※EW-DE41のみ付属

イオン用

2Wayシリコンブラシ

歯ぐきの状態に合わせて2つの面を使い分けできるシリコン素材のブラシ。歯ぐきを心地よくケアします。



別売品

- 極細毛で、歯周ポケットに届く

イオン用ダブルエッジ ブラシ ソフト

歯ぐきをいたわりながら、サイド極細毛が歯周ポケットに届きます。



- 1本1本磨く

ポイント磨きブラシ

毛先が入り込みやすい円すい形状のブラシで、歯間や歯並びの悪いところもきれいに磨けます。



- 舌を磨いて口臭を防ぐ

舌クリーニングブラシ

ソフト極細毛が舌乳頭のすき間に入り込み、舌の汚れを洗い落とします。



- 小さな口のお子さまに

こども用ソフトブラシ

コンパクトヘッドで、お子さまの小さなお口のすみずみまで磨けます。




イオンタイプに関するご注意

危険	● 下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対に使用しない。 ● ペースメーカー等の体内植込型医用電気機器 ● 人工心臓等の生命維持用医用電気機器 ● 心電計や点滴器等の装着型の医用電気機器 ● 医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作をまねくおそれがあります。
警告	● 妊娠中及び産後1か月以内は、使用しない。 口の中にトラブルをおこすおそれがあります。 ● 次のような方は、医師と相談のうえ、使用する。 ● 心臓疾患の人 ● 今までに重い病気をした人 ● 急性疾患の人 ● 有熱性疾患の人 ● 血圧異常の人 ● 感染性疾患の人 ● 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ● 血友病疾患の人 ● 守らないと事故やトラブルのおそれがあります。 ● アレルギー体質の人、金属等でかぶれた経験のある人 ● 守らないと口の中や手などにトラブルをおこすおそれがあります。

※1 音波領域内での振動 ※2 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。 ※3 福岡歯科大学口腔保健学講座評価2重遮蔽法で無作為割付試験の結果 ※4 歯面にマイナスイオンを引き寄せる力 ●「やわらか歯間」は小林製薬株式会社の登録商標です。 ●写真、イラストは全てイメージです。


音波振動※1バス(ヨコ)磨きで、 歯ぐきにやさしく歯垢除去。

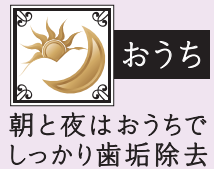

リニアモーターの力で実感、手磨きを超えるツルツル感へ

約1.5mm幅の音波振動※1バス(ヨコ)磨き

歯と歯ぐきの境目もやさしく磨くソフトモード

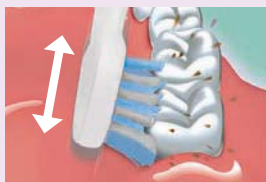

歯ぐきに沿って細かく動き、歯と歯ぐきにやさしく磨けます。



デリケートな歯ぐきにもやさしいソフトモードを搭載しました。

歯ぐきケアモード

シリコンブラシとの組み合わせで、歯ぐきを心地よく刺激します。

音波振動※1ハブラシ ドルツ リニア

EW-DL11

-W(白)
 オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

パワフルモード

ソフトモード

歯ぐきケアモード

対応電圧：AC100～120V (A-2プラグ地域対応)

充電表示：充電中(約8時間フル充電で約60分間使用可能)

寸法：高さ23.5×幅2.4×奥行2.8cm

質量：約120g(ブラシ含む)



リニア※1
 音波振動



ソフト
 スタート
 機能


ダブルエッジ
 ブラシ 1本付

シリコンブラシ
 1本付

⚠ 裏表紙に掲載の「安全に関するご注意」をご確認のうえ、ご使用ください。



軽量・スリムだから、 初めてでも磨きやすい。

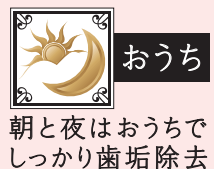

ペンのように持って磨ける、軽量・スリムデザイン

充電タイプ
 約50g
 (ブラシ含む)



持ちやすく、磨きやすいコンパクト設計。歯科衛生士オススの持ち方「ペングリップ」で磨けます。

音波振動※1ハブラシ ドルツ スリム

EW-DM41

-A(青) -W(白)
 オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ノーマルモード

ソフトモード

対応電圧：AC100～120V (A-2プラグ地域対応)

充電表示：充電中(約12時間フル充電で約30分間使用可能)

寸法：高さ21×幅1.8×奥行1.8cm


質量：約50g(ブラシ含む)



音波
 振動※1



磨き時間
 お知らせ
 タイマー

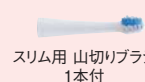

スリム用 山切りブラシ
 1本付

⚠ 裏表紙に掲載の「安全に関するご注意」をご確認のうえ、ご使用ください。



ブラシでは磨き残しやすい歯間や歯周ポケットを心地よくケア

ジェット水流で、歯間洗浄&歯ぐきケア。携帯に便利な充電式と、長時間使える交流式から選べます。

食べカス除去

歯間ジェット洗浄



ブラッシングしにくいこんなところにも効果的



歯ならびの
悪いところ



奥歯と
奥歯の間



歯と歯ぐき
の間



矯正器具や
ブリッジのまわり

歯ぐきケア



歯ぐきにジェットの刺激
たたくような断続水流で
歯ぐきを心地よく刺激。



歯周ポケット洗浄

ジェット水流が、ブラシでは
届きにくい歯周ポケットの
汚れを洗い流す。

ジェットウォッシャー ドルツ

EW-DJ40

-W(白) オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ノーマルモード

ソフトモード

充電式(約8時間フル充電で約15分間使用可能) タンク容量:165mL(約40秒)

対応電圧: AC100~240V(自動電圧切替付)

寸法:高さ21.8(収納時14.2)×幅5.1×奥行6.8cm

質量:約265g



※3

海外・国内
両対応

AC100~240V

ノズル

携帯に便利な
タンク収納式。



ジェットウォッシャー ドルツ

EW1250P

-W(白) 本体希望小売価格14,595円(税抜13,900円)

水流無段階調整

交流式

タンク容量:650mL(約2分)

対応電圧: AC100V

寸法:高さ25.6×幅17.4×奥行8.4cm

質量:約800g



ノズル
2本付



ノズル収納台付



⚠ 裏表紙に掲載の「安全に関するご注意」をご確認のうえ、ご使用ください。

ステインクリーナー

ステイン(着色汚れ)を除去し、輝く白い歯へ。

いつもの歯磨きでは落としきれないステインをしっかり除去

高速反転駆動(約3,000回転/分)と2つのアタッチメントで、歯のすみずみまでステインを除去します。

歯面を磨く



カップアタッチメント
歯面にしっかり密着して磨く。

歯間を磨く



ブラシアタッチメント
歯間や歯並びの悪い所に。

プロのクリーニングに学んだ、2ステップケア

STEP 1

ステインクリーンペースト
(販売名:ドルツはみがきCP)

ノーマルモードで
着色汚れ除去

STEP 2

トリートメントジェル
(販売名:ドルツはみがきTG)

ソフトモードで
やさしく仕上げ

ステインクリーナー ドルツ

EW-DC11

-S(シルバー調)

オープン価格※(乾電池別(単3形アルカリ乾電池※4×1本))

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ノーマルモード

ソフトモード

寸法:高さ15.8×幅4.5×奥行3.4cm


質量:約140g(乾電池・キャップ・カップアタッチメント含む)




ブラシ
アタッチメント
1本付



カップ
アタッチメント
1本付

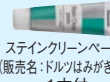

ステインクリーンペースト
(販売名:ドルツはみがきCP)

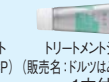

トリートメントジェル
(販売名:ドルツはみがきTG)



アタッチメント
収納ケース 1 個付

注)生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。

⚠ 裏表紙に掲載の「安全に関するご注意」をご確認のうえ、ご使用ください。



本体まるごと水洗いでき、
いつも清潔。


替アタッチメント、替専用剤もご用意。

アタッチメント交換の目安は、月2回のご使用で5~6ヵ月
(10~12回使用)です。●お手入れされる歯の本数などにより異なります。

別売替ブラシ他

音波振動※1
ハブラシに

本体品番

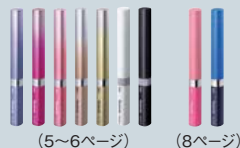	イオン専用		イオン・リニア・				
	イオン用ダブル エッジブラシ	イオン用カーブ ネックブラシ	ダブルエッジ ブラシ	カーブフロート ブラシ	マルチキャッチ ブラシ	ダブルエッジ ブラシ ソフト	こども用 ソフトブラシ
	EW0904-A(青) 希望小売価格 1,575円(税込) ■2本入、識別リング4色入 	EW0901-W(白)★ 希望小売価格 1,575円(税込) ■2本入、識別リング4色入 	EW0925-A(青) 希望小売価格 945円(税込) ■2本入、識別リング4色入 	EW0922-W(白) 希望小売価格 945円(税込) ■2本入、識別リング4色入 	EW0923-W(白)★ 希望小売価格 1,155円(税込) ■2本入、識別リング4色入 	EW0926-P(ピンク) 希望小売価格 945円(税込) ■2本入、識別リング4色入 	EW0942-W(白) 希望小売価格 630円(税込) ■2本入、識別リング4色入 
	イオン用ダブル エッジブラシ ソフト	イオン用2Way シリコンブラシ	シリコンブラシ	カーブフロート ブラシ ソフト			
	EW0905-P(ピンク) 希望小売価格 1,575円(税込) ■2本入、識別リング4色入 	EW0906-W(白) 希望小売価格 1,470円(税込) ■2本入、識別リング4色入 	EW0932-W(白) 希望小売価格 1,050円(税込) ■2本入、識別リング4色入 	EW0924-P(ピンク) 希望小売価格 1,155円(税込) ■2本入、識別リング4色入 			
EW-DE21・41  (11～12ページ)	●		▲注1	▲注1		▲注1	
EW-DL11  (13ページ)	×	×	●	×		●	
EW-DL21  (9～10ページ)	×	×	●	×		●	
EW-DM41  (13ページ)	×	×	×	×		×	
EW-DS12  (5～6ページ) (8ページ)	×	×	×	×		×	
EW-DS32  (7ページ)	×	×	×	×		×	
EW-DE20・40	●		▲注1	▲注1		▲注1	
EW-SA10・20・40	×	×	×	×		×	
EW-DS11	×	×	×	×		×	
EW-LA20・25・30	×	×	●		●	●	
EW1000・1011	×	×	●		●	●	
EW1012・1013	×	×	●		●	●	
EW1021	×	×	●		●	×	
EW1022	×	×	●		●	×	
EW1023・1024	×	×	●		●	●	
EW1031	×	×	●		●	●	
EW1032	×	×	●		●	×	
EW1033～1038	×	×	●		●	●	
EW1040	×	×	●		●	●	
EW1044～1046	●	×	▲注1	▲注1		▲注1	
EW1162・1163	×	×	×	×		×	

注1:使用可能ですが、イオンの効果は得られません。 注2:両面シリコンブラシEW0931は、手元での本体振動が大きくなる為おすすめできません。 注3:使用可能ですが、商品の

※1 音波領域内での振動 ●「やわらか歯間」は小林製薬株式会社の登録商標です。

★赤色の品番は生産終了品のため、在庫のみの取り扱いとなります。

替ブラシをラインアップ。

交換時期について

いつまでもツルツルの磨き心地をキープするために、3カ月を目安に新しいブラシと交換してください。また、3カ月以内でも、毛先が広がったら交換の目安です。




●替ブラシは、今お使いの本体品番をお確かめのうえ、ご購入ください。

ステインオフ共用				スリム専用		ステインオフ専用	ポケット専用			
山切りブラシ Vヘッド		両面シリコン ブラシ	歯間クリアブラシ	やわらか歯間® ブラシ	スリム用 山切りブラシ	スリム用 ポイント磨きブラシ	ステインケア アタッチメント	EW-DS11用 替ブラシ (やわらかめ)	EW-DS12用 替ブラシ (やわらかめ)	EW-DS32用 替ブラシ (やわらかめ)
EW0910-W(白) 希望小売価格 420円(税込) ■2本入、識別 リング2色入	EW09104-W(白) 希望小売価格 840円(税込) ■4本入、識別 リング4色入	EW0931-W(白)★ 希望小売価格 1,260円(税込) ■2本入、識別リング4色入	EW0943-W(白) 希望小売価格 1,470円(税込) ■4本入、識別リング4色入	EW0945-W(白) 希望小売価格 1,575円(税込) ■カートリッジ10本入、 ブラシネック1本入、 収納ケース付	EW0962-A(青) 希望小売価格 525円(税込) ■2本入、識別リング4色入	EW0961-W(白) 希望小売価格 420円(税込) ■2本入、識別 リング4色入	EW0944-W(白) 希望小売価格 1,260円(税込) ■2本入、識別リング4色入	EW0957-K(黒) 希望小売価格 525円(税込) ■2本入	EW0958-W(白) 希望小売価格 525円(税込) ■2本入	EW0959-W(白) 希望小売価格 630円(税込) ■2本入
ポイント磨き ブラシ				舌クリーニング ブラシ	スリム用山切り ブラシ ソフト			EW0957-W(白) 希望小売価格 525円(税込) ■2本入		NEW
EW0940-W(白) 希望小売価格 420円(税込) ■2本入、識別リング4色入				EW0941-W(白) 希望小売価格 1,260円(税込) ■2本入、識別リング4色入	EW0963-P(ピンク) 希望小売価格 525円(税込) ■2本入、識別リング4色入					
▲注1		▲注1注2	▲注1		×	×	×	×	×	×
●		×	●		×	×	×	×	×	×
●		×	●		×	×	●	×	×	×
×		×	×		●	×	×	×	×	×
×		×	×		×	×	×	×	●	×
×		×	×		×	×	×	×		●
▲注1		▲注1注2	▲注1		×	×	×	×	×	×
×		×	×		×	●	×	×	×	×
×		×	×		×	×	×	●	×	×
●		▲注2	●		×	×	×	×	×	×
●		●	×		×	×	×	×	×	×
●		●	●		×	×	×	×	×	×
●		●	●		×	×	×	×	×	×
●		●	×		×	×	×	×	×	×
●		●	●		×	×	×	×	×	×
▲注3		▲注3	●		×	×	×	×	×	×
●		▲注4	×		×	×	×	×	×	×
●		●	●		×	×	×	×	×	×
▲注3		▲注3	●		×	×	×	×	×	×
●		▲注4	×		×	×	×	×	×	×
▲注1		▲注1注2	▲注1		×	×	×	×	×	×
×		×	×		×	●	×	×	×	×

特性上タテ・ナナメの動きが弱くなります。 注4:歯間クリアブラシEW0943のみ使用可能です。

音波振動^{※1}ハブラシ以外に

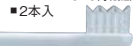	山切りブラシ Vヘッド	一般用レギュラー 4列植毛	歯周ポケット用 ブラシ	替カーブ スピンブラシ	替ノズル	エアinジェット 水流用替ノズル	ジェットウォッシャー用 替ノズル	ステインクリーナー用 替カップアタッチメント	替ステインクリーンペスト (販売名:ドルツはみがきCP)
	やわらかめ EW083-W(白) ふつう EW084-W(白) 希望小売価格315円(税込) ■2本入 	ふつう EW064-W(白) 希望小売価格315円(税込) ■2本入 	EW087-W(白)★ 希望小売価格315円(税込) ■2本入 	EW0981-W(白) 希望小売価格945円(税込) ■1本入 	EW092P-A(青) -H(グレー)-R(赤)-W(白) 希望小売価格210円(税込) ■1本入 	EW0950-W(白) 希望小売価格630円(税込) ■2本入、識別リング4色入 	EW0955-W(白) 希望小売価格630円(税込) ■2本入、識別リング4色入 	EW0951-W(白) 希望小売価格1,890円(税込) ■2本入 	ステインクリーナー・ ステインオフ ドルツ用/ EW0956P 希望小売価格630円(税込) ■容量25g 
	山切りブラシ やわらかめ EW081-W(白)★ 希望小売価格315円(税込) ■2本入 							ステインクリーナー用 替ブラシアタッチメント EW0952-W(白) 希望小売価格1,890円(税込) ■2本入 	替トリートメントジェル (販売名:ドルツはみがきTG) EW0954P 希望小売価格630円(税込) ■容量25g 
本体品番 EW-DC11  (14ページ)	×		×	×	×	×	×	●	
EW-DJ40  (14ページ)	×		×	×	×	×	●		×
EW115・116	●		●	×	×	×	×		×
EW117	●		×	×	×	×	×		×
EW118・122・ 126・129	●		●	×	×	×	×		×
EW135・138	●		×	×	×	×	×		×
EW139・141・ 144・145・147・ 150・152・159	●		●	×	×	×	×		×
EW166・168	●		●	×	●	×	×		×
EW170・175・ 176	×		×	×	●	×	×		×
EW182・183	●		×	×	×	×	×		×
EW187	●		●	×	×	×	×		×
EW188・191	●		●	●	×	×	×		×
EW1100・1150・ 1160	●		●	●	×	×	×		×
EW1192	●		●	×	×	×	×		×
EW1200	×		×	×	●	×	×		×
EW1211	×		×	×	×	●	×		×
EW1250  (14ページ)	×		×	×	●	×	×		×
EW1300	×		×	×	×	×	×		●
EW1452・1472・ 1522・1532・ 1542・1572	●		●	×	×	×	×		×
EW1822・1832	●		×	×	×	×	×		×
EW1872	●		●	×	×	×	×		×
EW1882・1912	●		●	●	×	×	×		×

★赤色の品番は生産終了品のため、在庫のみの取り扱いとなります。

ライフスタイルに合わせて選べるドルツシリーズ

朝から夜まで、
あなたのキレイをサポートします。

ドルツは、使う人それぞれの暮らしや目的に合わせた幅広いラインアップをご用意。
自宅用・外出用などを使い分けることで、より手軽かつ便利にオーラルケアに取り組めます。

ランチの後は
音波^{*2}で
ツルツル

おそと磨き おうち磨き

朝と夜は
おうちでしっかり
歯垢除去

	ポケット		ステインオフ	イオン		リニア	スリム
品番	EW-DS12	EW-DS32	EW-DL21	EW-DE41	EW-DE21	EW-DL11	EW-DM41
	-V -VP -P -PN -N -W -K	NEW Kids -PKD -AKD NEW Kids -P -A	-VP -P -W	-S	-A	-W	-W -A
おすすめ分け	外出先にも 携帯したい方に	子どもの ひとり磨きに	子どもの しあげ磨きに	より白い歯を 目指す方に	歯ぐきの衰えが気になる方に		電動ハブラシ 初めての方に
イオンタイプ	—		—	○		—	—
ステイン除去	—		○	—		—	—
振動数(ブラストロック/分)	約16,000		約12,000	約20,000	約28,500		約20,000
ブラシの動き	直径約0.3mm幅の 振動磨き		約1.2mm幅の バス(ヨコ)磨き	約0.9mm幅のバス(ヨコ)磨き		約1.5mm幅の バス(ヨコ)磨き	直径 約0.45mm幅の 振動磨き
ブラシ磨き	音波振動 ^{*1} 磨き		リニア音波振動 ^{*1} 磨き	リニア音波振動 ^{*1} 磨き		リニア音波振動 ^{*1} 磨き	音波振動 ^{*1} 磨き
歯ぐきケアモード	—		—	○	—	○	—
磨き時間お知らせタイマー	—		30秒/2分	30秒/2分		30秒/2分	30秒/2分
ソフトスタート機能	—		○	○		○	—
本体水洗い	○		○	○		○	○
無接点充電方式	—(乾電池式)		○	○		○	○

機能説明	スピーディに磨ける、 微細な振動磨き。	リニア駆動による、 高速微細なバス(ヨコ)磨き。	歯の表面付近にマイナス イオンを引き寄せます。
	本体を丸ごと水洗いでき、 いつも清潔に使えます。	リチウムイオン電池 ニッケル水素電池	無接点 充電方式 非接触で充電可能。 汚れにくく掃除もラクです。
	約30秒ごとに一時停止し、 約2分間で全体を磨けます。	やさしい振動でスタートします。	※3 海外・国内 ※4 海外・国内 海外電圧にも対応。

※1 音波領域内での振動 ※2 音波振動 ※3 AC100～120V電源(A・2プラグ地域)対応

※4 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。

●歯周病がひどい人などは歯科医にご相談のうえ、使用する。守らないとけがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。

〈ドルツ イオンEW-DE41・DE21〉

●次のような方は、医師と相談のうえ、使用する。

●心臓疾患の人 ●今までに重い病気をした人 ●急性疾患の人 ●有熱性疾患の人 ●血圧異常の人 ●感染性疾患の人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●血友病疾患の人
⇒守らないと事故やトラブルのおそれがあります。 ●アレルギー体質の人、金属等でかぶれた経験のある人⇒守らないと口の中や手などにトラブルを起こすおそれがあります。
歯周病のひどい人などは医師にご相談ください。

●妊娠中及び産後1か月以内は、使用しない。⇒口の中にトラブルをおこすおそれがあります。

●体調のすぐれない時や発熱時は、使用しない。⇒事故やトラブルのおそれがあります。

〈ステインオフドルツEW-DL21(ステインケア時)〉〈ステインクリーナー ドルツEW-DC11〉

●治療中の歯、詰めものをしている歯、冷たいものがしみる(知覚過敏の)歯、入れ歯など人工の歯、歯ぐきがいちじるしく下がっている歯は使用しない。⇒歯や歯ぐきを傷める原因になります。
歯周病のひどい人などは医師にご相談ください。

充電式電池 リサイクルの お願い



ニッケル水素電池
リチウムイオン電池

このマークの商品には、充電式電池を使用しております。
充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。
ご使用済みの商品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、
リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。

リサイクルボックス▶



愛情点検

●長年ご使用の電動ハブラシの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- コードや電源プラグが異常に熱い。
- 本体や充電器が変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- 動作中に異常な音、振動がする。

▶ **ご使用
中止**

事故防止のため、電源プラグを抜き、
販売店に点検をご依頼ください。

保証書に 関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

補修性能 部品保有期間

●電動ハブラシの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

eco
ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます 詳しくはホームページで
panasonic.co.jp/eco

省エネ

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様
にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を
目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの
家電製品などから回収した再生資源を使用
した商品を作り、資源循環を推進します。

化学
物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質*
の使用を規制するRoHS指令にグローバルで
準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

あなたも会員になりませんか？
会員登録無料！特典満載！

CLUB Panasonic

詳しくはホームページへ ▶▶▶

club.panasonic.jp

携帯から
アクセス
できます。



お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。ポイントを貯めてプレゼントも当たる楽しいWeb限定サービスです。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う
部門で国際標準規格である
ISO27001を取得し、適切に
情報管理を行う仕組みを構築
しています。

当社のISO27001認証取得事業場は
ホームページをご覧ください。
panasonic.co.jp/info/privacy

パナソニック お客様ご相談センター(受付9時～20時)

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

○お電話番号がご利用いただけない場合・・・06-6907-1187 ○FAX・・・0120-878-236



0120-878-365

※携帯・PHSからでもご利用いただけます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「520#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

ご相談窓口における お客様の 個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、
ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ・・・

パナソニック株式会社
アプライアンスマーケティング ジャパン本部
〒105-0004
東京都港区新橋6丁目17番15号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は
2012年1月1日現在のものです。

EW-JJ048M

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

●パナソニックホームページ panasonic.co.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。