

Guava easyCyte HT 开关机操作规程

一．系统组成

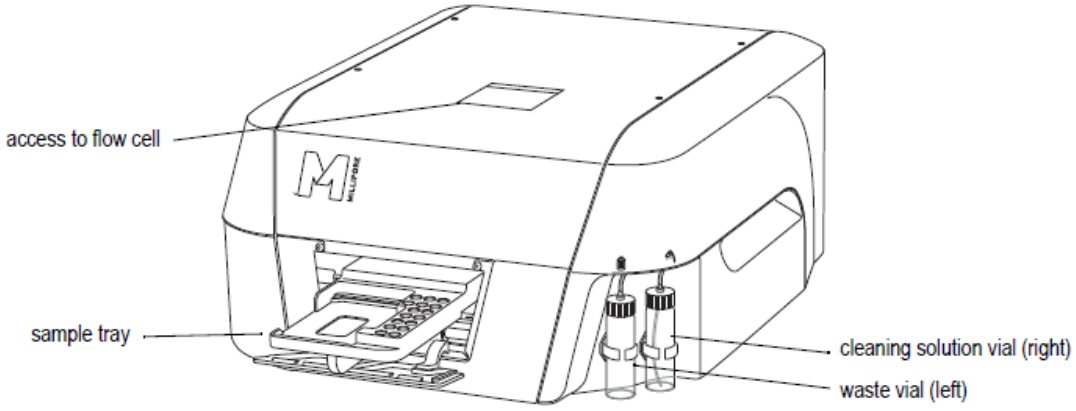


guava easyCyte HT System components

二．样品盘示意图

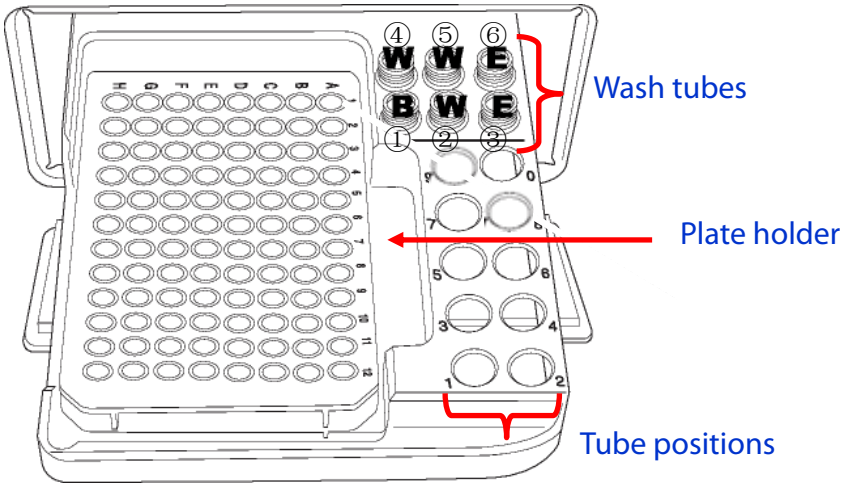


三．清空废液瓶并在清洗瓶中加入 ICF(Instrument Clean Fluid)

在仪器前面的右下角有两个瓶子，左为废液瓶，右为清洗瓶。先从架托上向外轻轻拨出右侧的清洗瓶，并将清洗瓶从旋口连接器上拧下，再旋开瓶盖，加上 ICF，再将清洗瓶装回机器。当瓶中的 ICF 为整瓶的 1/4 时，用纯水加满清洗瓶（可做 15 个清洗程序）。

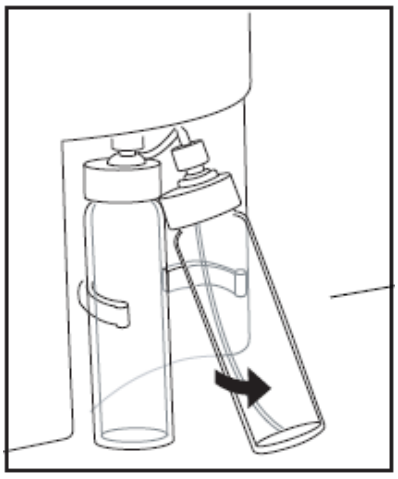


三. 开机


1. 先打开 easyCyte HT 的电源开关，再打开电脑开关，电脑正常启动后，双击桌面上的 guavaSoft2.2 的图标，启动流式程序并出现以下画面：

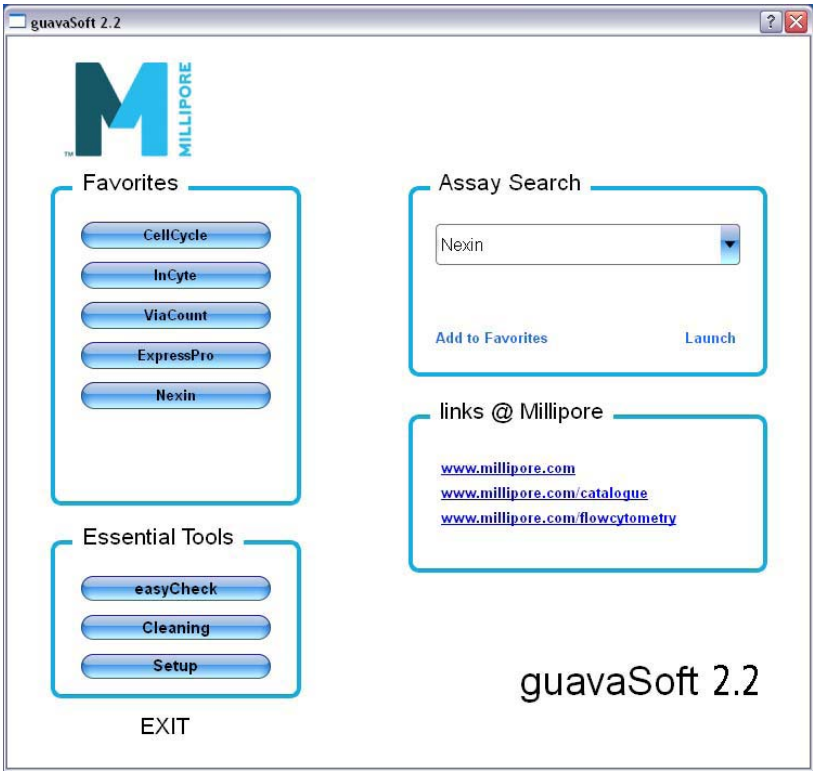

2. 双击主菜单左下方 Essential Tool 下的第二个“Cleaning”框，出现以下画面

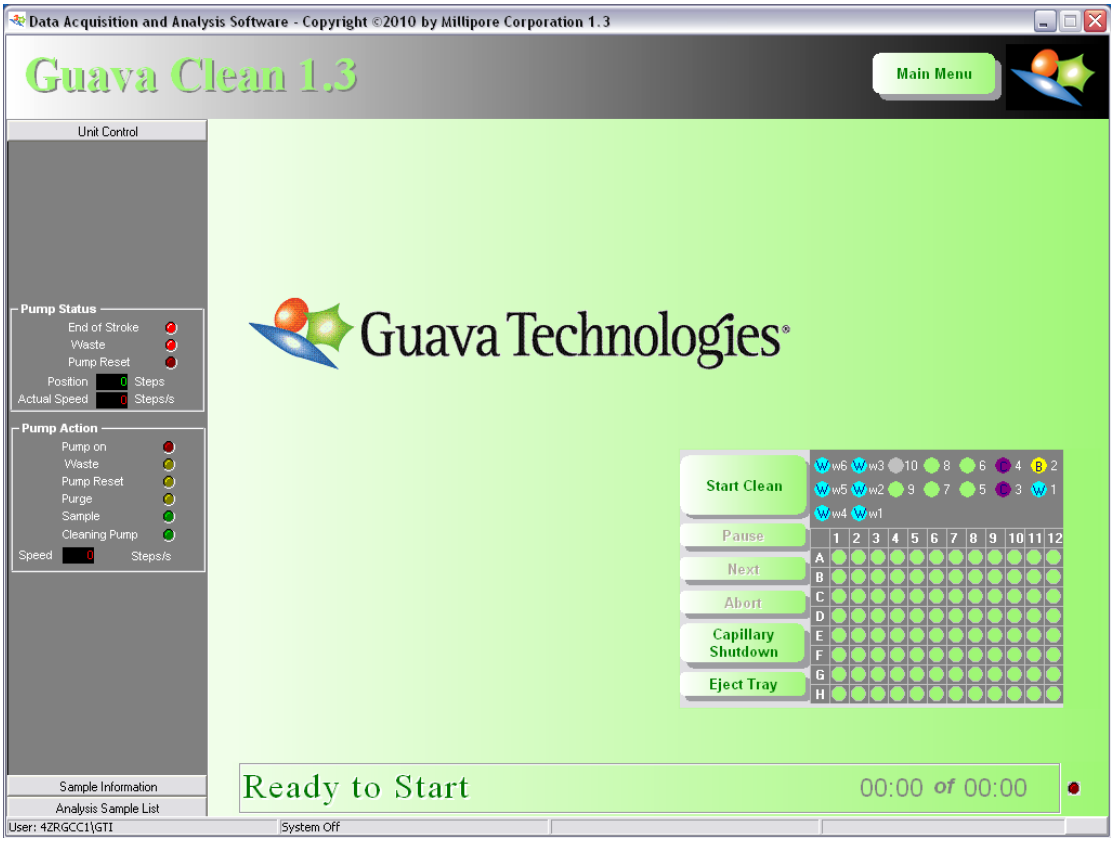

3. 点击“Start Cleaning”后，样品盘会弹出，并会出现以下提示画面：

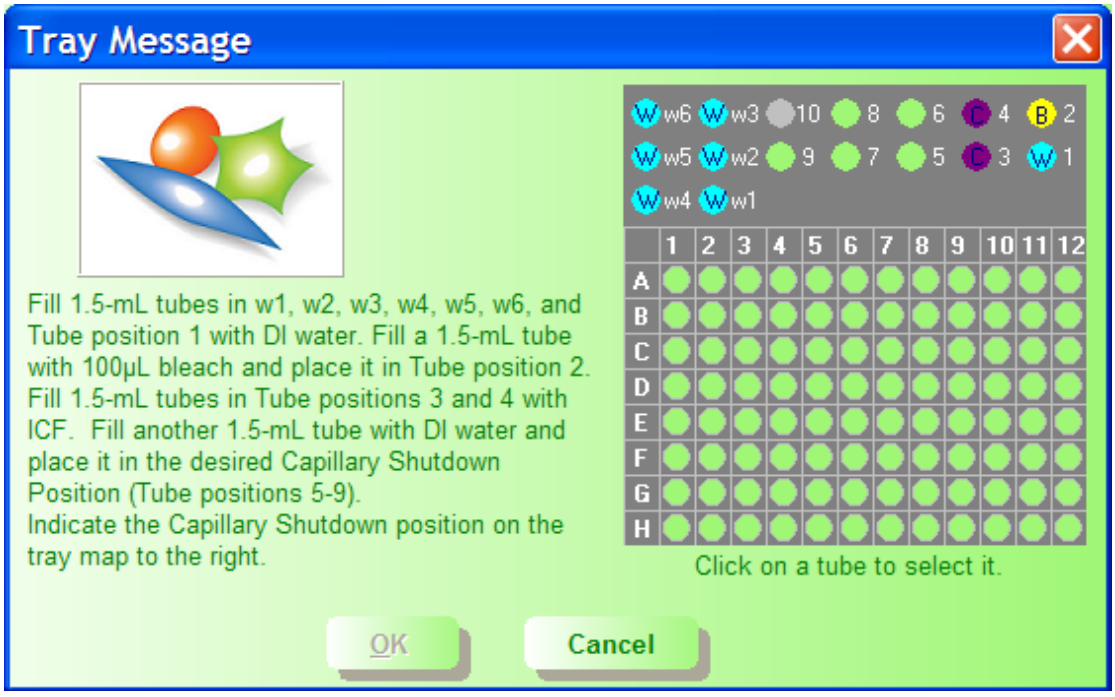


4. 按提示，在清洗管 w6、w3、w5、w2、w4、w1 及样品管 1（请参阅样品盘示意图）中加入 1.5ml 的纯水，样品管 2 中加入 100ul 的消毒剂，样品管 3 和样品管 4 中加入 1.5ml 的 ICF。然后，在样品管 7 中加入 1.5ml 的纯水，并点击样品管 7 的位置。最后点击“OK”，执行完全的清洗程序，整个清洗程序大约需要 30 分钟左右。


5．清洗程序完成后再进行其他的流式分析作业。如管路中有气泡，可执行“Blackflushing”的程序，这个程序完成后必须进行一次“Quick Clean”的程序。

四．关机

1. 关机前先检查左侧废液瓶  （Waste vial）的废液情况，清空废液前先从架托上向外轻轻拨出废液瓶，并将废液瓶从旋口连接器上拧下，再旋开瓶盖，将废液清空。

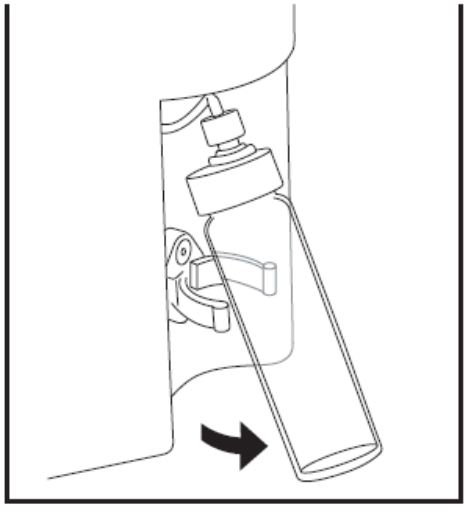


Pull waste vial out of bracket.

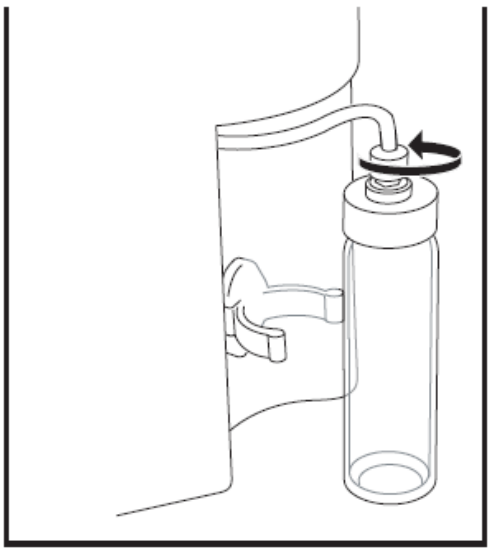

Unscrew waste tubing from vial cap.

2．用纯水冲洗废液瓶，洗完后，加入约 3ml 的 ICF（也可不加），再将瓶盖旋上，并安装回 easyCyte HT 的架托上。

3．从当前程序中点击右上方的“Main Menu”，回到主菜单：

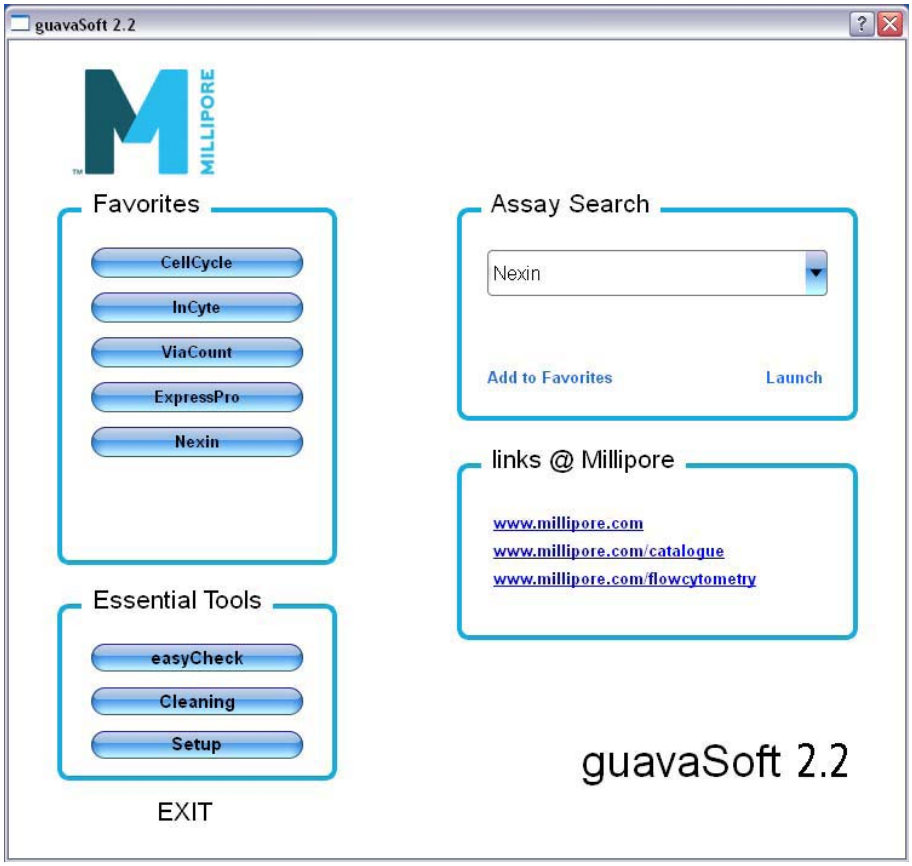

4．同开机中的 2 至 4 步骤，完成完整的清洗程序，注意要让样品管 7 中装满 1.5ml 的纯水，这样 Flow Cell 会停留在样品管 7 中以保持管道不会干涸。

5．关闭 guavaSoft 软件，并关闭电脑，最后关掉 easyCyte HT 的电源。完成关机程序。

（使用前请仔细阅读产品说明书，以上规程仅供参考）

密理博中国有限公司 生命科学部

技术支持服务热线：400-889-1988　技术支持电子邮箱：asiatechserv@millipore.com