




X-RiteColor Master 爱色丽测色系统操作步骤指南

一. 校正仪器

“仪器”→“校正”→用仪器测量白标准板→用仪器测量黑筒→“关闭”

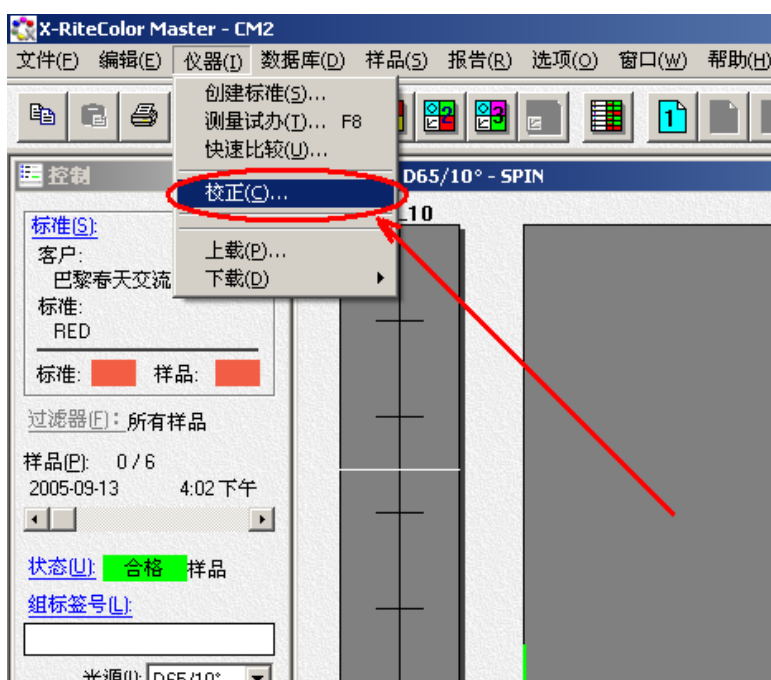



北京兴华科仪化工设备有限责任公司
海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A座2610室 邮编：100048
电话：010-68453263 021-52729900 020-81518550 023-60339668
传真：010-51799929
网站：www.chinacoat.com.cn
邮箱：info@chinacoat.com.cn



爱色丽（亚太）有限公司上海办事处

二. 创建标准

“仪器”→ “创建标准”→ “下一步”→ 测量标准色样→键入标准名称,创建或选择客户→
“下一步”→ 设置容差→ “下一步”→ “下一步”→ “完成”→ “否”

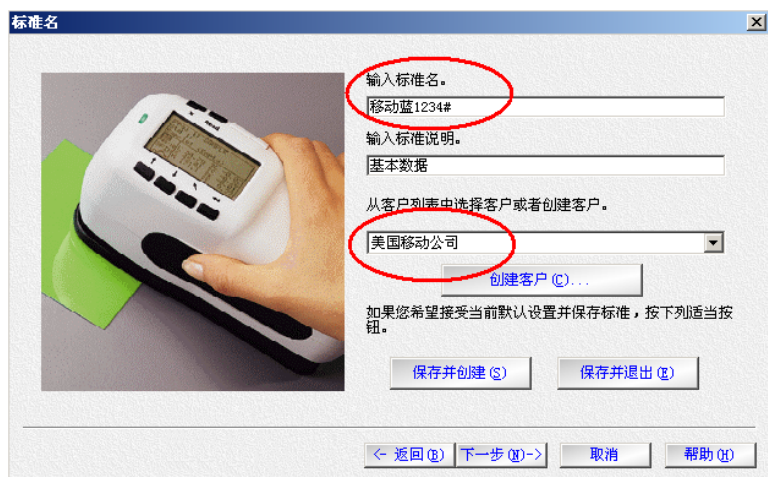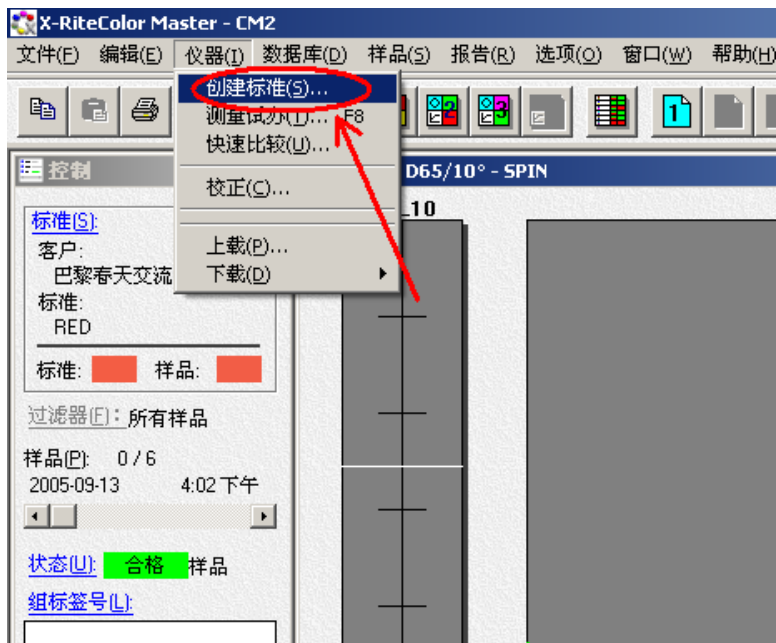




爱色丽（亚太）有限公司上海办事处

三. 测量样品

“仪器”→“测量试办”→用仪器测量样品→“保存”(或提前选中“自动保存”)

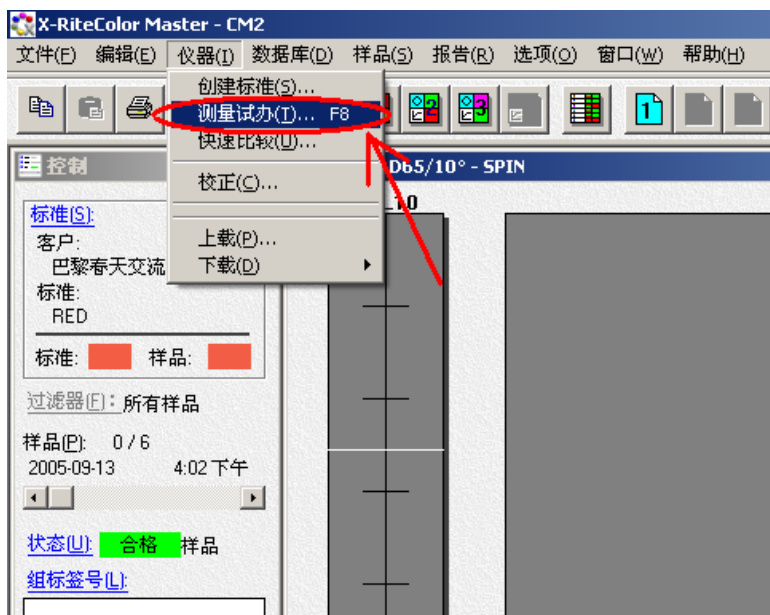




爱色丽（亚太）有限公司上海办事处

四. 打印报告

“报告” → “常规”:



点击“选项”可以选择打印内容:

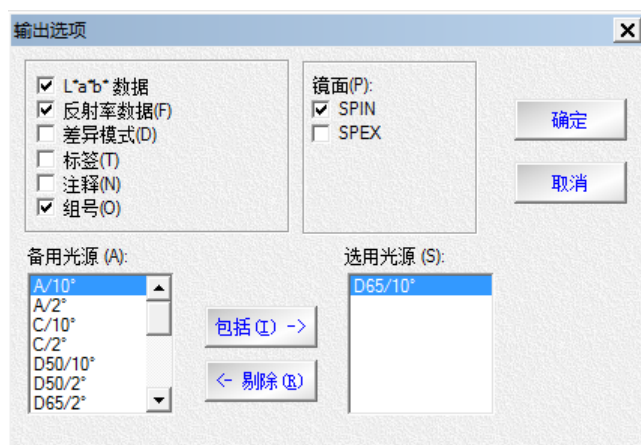

报告样式如下:

公司: X-Rite Shanghai Office				地址: Shanghai China			
通用报告							
客户:	X-Rite			报告日期:		2011/03/09	
颜色:	S			数据模式:		差异	
描述:	基本数据						
过滤器:	最末 100						
标准	2011/02/21	11:21	下午				
光谱:SPIN							
L*a*b* 数据:	<u>L*</u>	<u>a*</u>	<u>b*</u>	<u>C*</u>	<u>h°</u>		
D65/10°	99.96	-0.01	-0.02	0.02	242.61		
样品 #1	2011/02/21	11:22	下午	状态 =合格(未决)			
TTTT							
光谱:SPIN							
L*a*b* 数据:	<u>DL*</u>	<u>Da*</u>	<u>Db*</u>	<u>DC*</u>	<u>DH*</u>	<u>DE*</u>	
D65/10°	0.01	0.03	0.02	-0.00	0.03	0.03	
样品 #2	2011/02/21	11:22	下午	状态 =合格(未决)			
TTT							
光谱:SPIN							
L*a*b* 数据:	<u>DL*</u>	<u>Da*</u>	<u>Db*</u>	<u>DC*</u>	<u>DH*</u>	<u>DE*</u>	
D65/10°	0.00	0.02	-0.00	0.01	0.02	0.02	


若要打印更多内容, 可以选择“报告” → “完整”, 再进行选择。




爱色丽（亚太）有限公司上海办事处

五. 编辑和删除数据


若要删除样品，请先选择到需要删除的样品号码，菜单中“样品”→“删除样品”：

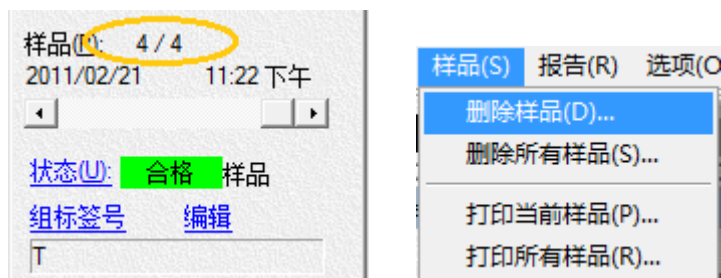

若要修改或删除标准，菜单中选择“数据库”→“编辑标准”→“编辑”或“删除”：

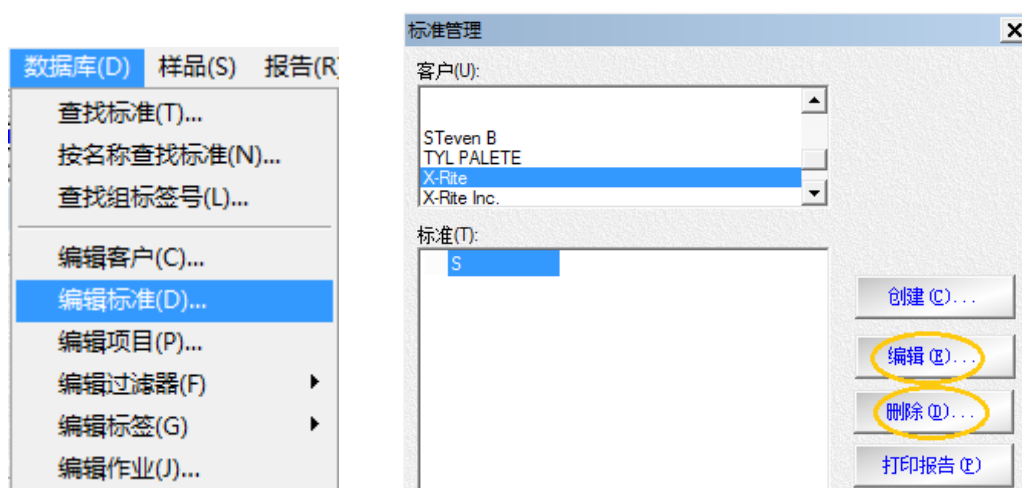

若要修改和删除客户，菜单中选择“数据库”→“编辑客户”，按照提示操作即可：

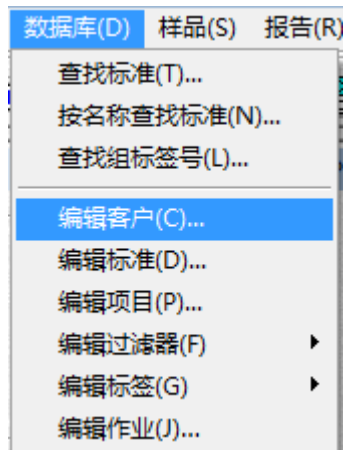



爱色丽（亚太）有限公司上海办事处

六. 数据下载和上载（仅用于便携式仪器，比如 SP64、SP62、MA68II、MA9 系列）

若仪器离开电脑需要远程操作，可能需要将软件中的标准传输到仪器中（我们称作“下载”），也可能需要将仪器中存储的样品数据传输到软件中（我们称作“上载”）。这种数据传输的原则是：必须先“下载”，再“上载”。需要特别注意的是：“下载”数据时软件会将仪器中存储的所有数据全部删除！

比如要到生产车间测量样品数据，请先连接上仪器，选择“仪器”→“下载”→“标准”→选择需要的标准，点击“下载”：



然后断开仪器，带仪器到车间测量样品数据，样品数据会存储到仪器中。

测量完成后，将仪器连接到软件，“仪器”→“上载”，按照提示操作即可将仪器中的样品数据上载到软件中的对应标准中：






爱色丽（亚太）有限公司上海办事处

七. 数据备份

为防止电脑故障引起重要颜色数据丢失，请定期备份颜色数据！
选择“文件”→“备份数据库”：

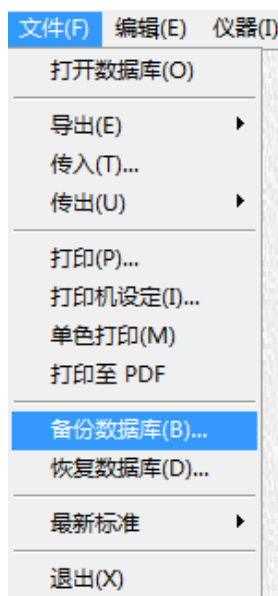

点击“备份数据库”选择要备份的数据库，比如：SP62、SP64 等积分球型仪器选择“CM2”，MA68II 五角度仪器选择“CM5”。
点击“将数据库备份于”选择备份的目录。
点击“开始”即可。

北京兴华科仪化工设备有限责任公司
海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A座2610室 邮编：100048
电话：010-68453263 021-52729900 020-81518550 023-60339668
传真：010-51799929
网站：www.chinacoat.com.cn
邮箱：info@chinacoat.com.cn



北京兴华科仪化工设备有限责任公司

海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A座2610室 邮编：100048

电话：010-68453263 021-52729900 020-81518550 023-60339668

传真：010-51799929

网站：www.chinacoat.com.cn

邮箱：info@chinacoat.com.cn
